


Scan 4 all

를 선보입니다

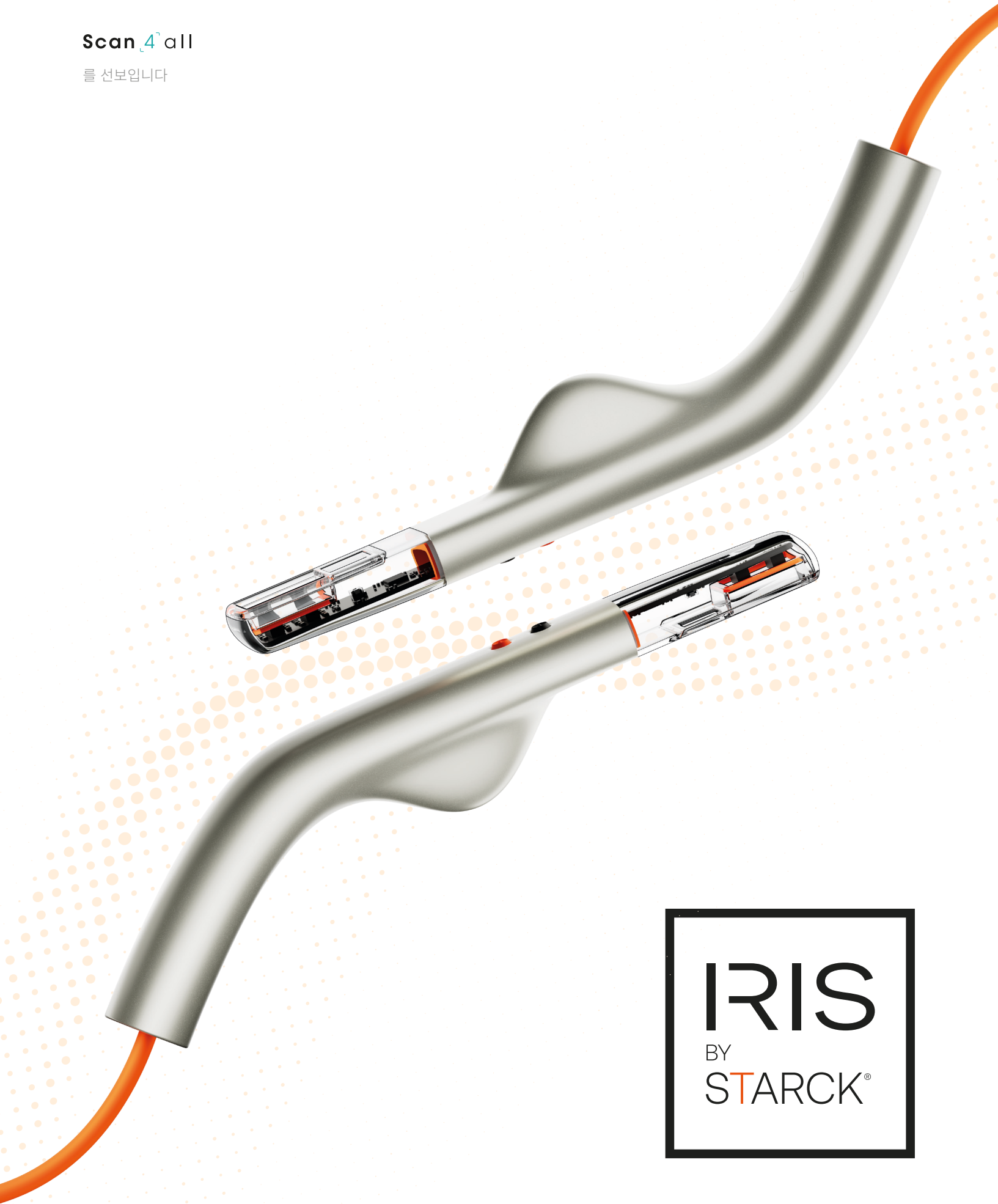

IRIS
BY
STARCK®

내부 / 시스템 정보

핵심 정보 한눈에 확인



💡 홈 페이지에서 "시스템 정보" 탭을 통해 IRIS BY STARCK®의 기술 데이터를 확인하십시오. 장비가 매일 정상적으로 작동하는지 확인하기 위해 이 데이터를 주기적으로 점검하십시오.

라이선스 참조	계정 활성화에 사용한 IRIS BY STARCK® 계정과 연결된 라이선스 번호입니다. 새 컴퓨터에서 로그인할 때마다 이 번호를 입력해야 합니다.
카메라 참조	연결된 IRIS BY STARCK® 카메라의 일련 번호입니다. 연결된 기기가 없거나 인식되지 않을 경우 "NC"가 표시됩니다.
소프트웨어 버전	소프트웨어의 현재 버전입니다.
최종 업데이트	컴퓨터에 설치된 마지막 업데이트 날짜입니다. 최신 기능을 손쉽게 이용할 수 있도록 하십시오.
설치 코드	IRIS BY STARCK을 설치하는 데 사용되는 코드로, 패키지에 포함된 카드에 인쇄되어 있습니다.
PC 번호	네트워크상에서 컴퓨터의 물리적 주소입니다. 각 장치에는 고유한 주소가 있습니다. 이 주소를 통해 여러 대의 컴퓨터에서 동일한 라이선스를 사용할 때 "동기화" 기능이 활성화되어 있을 경우, 스캔을 수행한 PC를 식별할 수 있습니다. 동일한 라이선스를 사용하는 경우, 어떤 PC에서 스캔을 수행했는지 식별하는 데 사용됩니다.
디스크 공간	하드 드라이브의 사용 용량을 확인합니다. 용량이 거의 꽉 찼다면, 대리점에 문의하여 도움을 받으십시오.

IRIS BY STARCK®와 함께 더 많은 기능을 경험해 보세요.

이용 가능한 모든 리소스를 살펴보세요.

 내부 / 시작 가이드

 내부 / 내 설정

 내부 / DIRECT SCAN

 내부 / 내 계정

 내부 / 시스템 정보

 내부 / 스캔 관련 도구

 내부 / IRIS Connect

 내부 / SAV

 내부 / 내 주문

 내부 / 실시간 스캔

 내부 / 내 알림

 내부 / 컴퓨터 기술 사양

 내부 / 내 파트너

 내부 / 가이드형 워크플로우

 내부 / 내 환자

 내부 / 자유형 워크플로우



전체 문서를 확인하십시오.

제조업체

Scan4all

모두를 위한 탁월함.

137 rue Garance 31670 Labège - 프랑스

N° SIRET 507 484 863 00059

www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®
디지털 치과용 1등급 의료기기(MD).
의료 전문가 전용.
© Scan4all - 버전 1.0 - 2026