


Scan⁴all
präsentiert

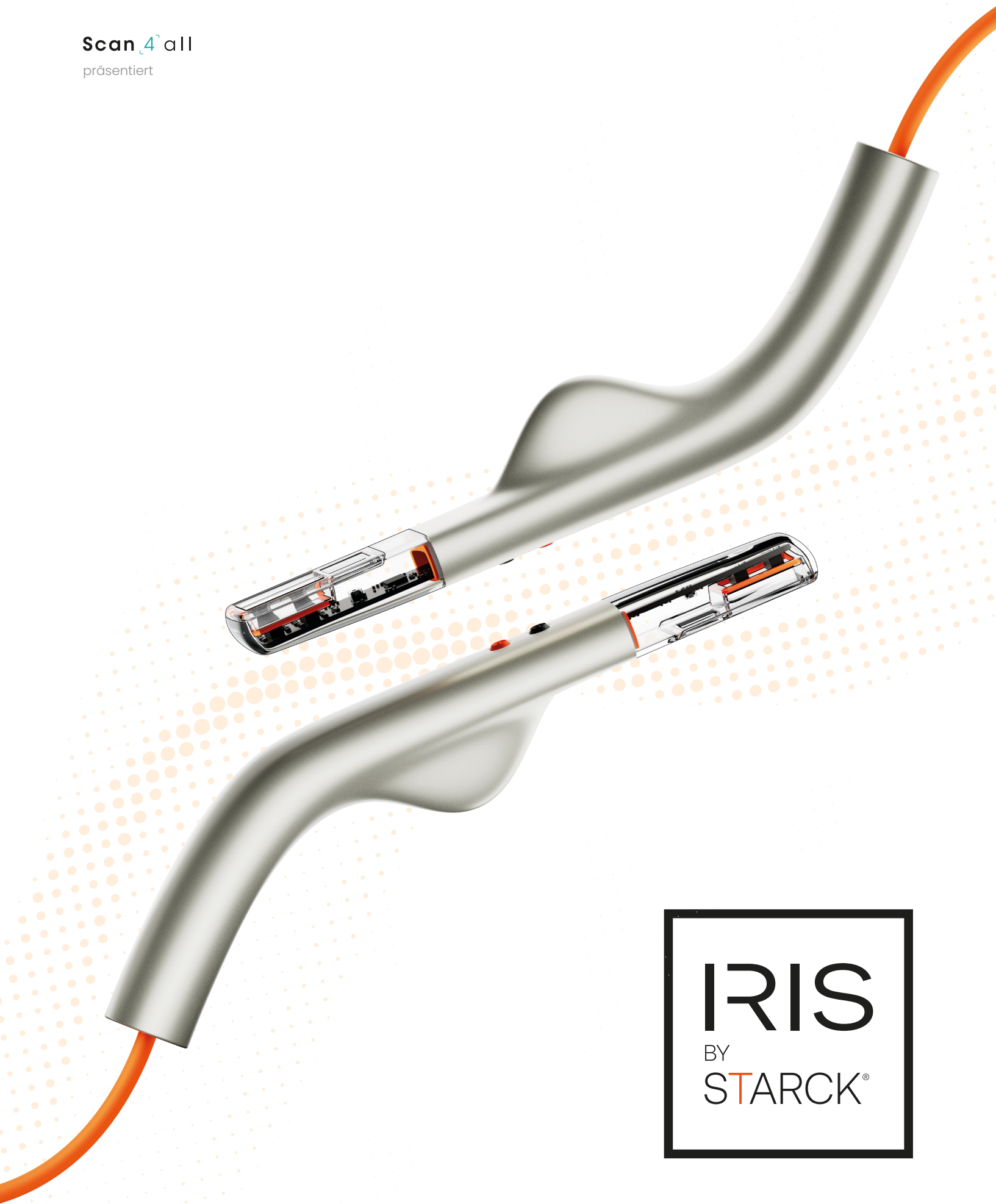

IRIS
BY
STARCK®

INSIDE / **Meine einstellungen**

PASSEN SIE IHR IRIS BY STARCK® INDIVIDUELL AN



Machen Sie IRIS BY STARCK® ganz einfach zu einem maßgeschneiderten Werkzeug.

AUSWAHL DER SPRACHE UND BEVORZUGTEN THEMEN

Wählen Sie die Sprache, in der Sie IRIS BY STARCK® verwenden möchten.

Passen Sie das Anzeigethema an Ihre Umgebung an, um maximalen Sehkomfort zu gewährleisten (hell oder dunkel).

AUTOMATISCHE STANDBY-FUNKTION

Legen Sie aus der vorgeschlagenen Liste eine Zeitspanne für die Inaktivität fest, nach der sich die Anwendung automatisch abmeldet und Sie zur Eingabe des Passworts auffordert, um wieder Zugriff zu erhalten.



Wenn Sie "Nie" auswählen, denken Sie daran, sich manuell abzumelden, wenn Sie sich entfernen.

Nie

10 Minuten

15 Minuten

30 Minuten

45 Minuten

1 Stunde

2 Stunden

3 Stunden

4 Stunden

5 Stunden

Nie

EMAIL BENACHRICHTIGUNGEN



Aktivieren oder deaktivieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen, um Statusänderungen von Bestellungen nach Ihrem eigenen Rhythmus zu verfolgen.

UNBEGRENZTE CLOUD-SICHERUNG

Aktivieren und sichern Sie Ihre Patientendaten kostenlos in der Ihrem Konto zugewiesenen IRIS BY STARCK®-Cloud-Sicherung (unter HDS-Schutz und ISO 27001-Sicherheit).



Sie müssen mit dem Internet verbunden sein, um diese Funktion nutzen zu können.



Wenn Sie sie deaktivieren, werden die Daten nur auf Ihrem Computer gesichert.

KONTO VERBUNDEN

Melden Sie sich mit Ihrer Lizenznummer und Ihren Zugangsdaten auf einem PC Ihrer Wahl bei IRIS BY STARCK® an. Aktivieren Sie diese Funktion, um alle Daten aus Ihrem gewohnten IRIS abzurufen, egal ob Sie in Ihrer Praxis, in der Klinik oder irgendwo anders auf der Welt sind.



Sind Sie mit mehreren verschiedenen PCs verbunden ? Wenn die Option "Konto verbunden" aktiviert ist, enthält die Identifikationsnummer (ID) jedes Auftrags und jedes Scans automatisch die Nummer des Computers, auf dem er durchgeführt wurde (PC1, PC2 usw.).

OPTIMIEREN SIE IHR SCAN-ERLEBNIS

Tracking-Optionen



Zu vervollständigende...



Automatischer Zoom



Aktivieren oder deaktivieren Sie die Tracking-Option beim Scannen : Ein akustisches Signal ertönt, wenn das Tracking läuft. Sie können auch zoom das Modell auf, wenn die Bewegung verlangsamt wird.

MIT IRIS BY STARCK® NOCH WEITER KÖNNEN.

Entdecken Sie alle Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen.



Inside / **Einführungshandbuch**



Inside / **Meine Einstellungen**



Inside / **DIRECT SCAN**



Inside / **Mein Konto**



Inside / **Systeminformationen**



Inside / **Tools rund um den Scan**



Inside / **IRIS Connect**



Inside / **Kundendienst**



Inside / **Meine Bestellungen**



Inside / **Echtzeit-Scan**



Inside / **Meine Benachrichtigungen**



Inside / **Computerspezifikationen**



Inside / **Mein Partner**




Inside / **Geführter Workflow**



Inside / **Meine Patienten**



Inside / **Offener workflow**

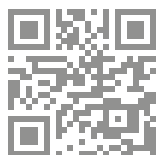

Auf die gesamte
Dokumentation
zugreifen.

Hersteller

Scan4all

Exzellenz, für alle.

137 rue Garance 31670 Labège - FRANCE

N° SIRET 507 484 863 00059

www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®

Medizinisches Gerät der Klasse I (MD) für die digitale Zahnmedizin. CE.

Nur für medizinisches Fachpersonal.

© Scan4all - Version 1.0 - 2026