


Scan 4 all
presenta

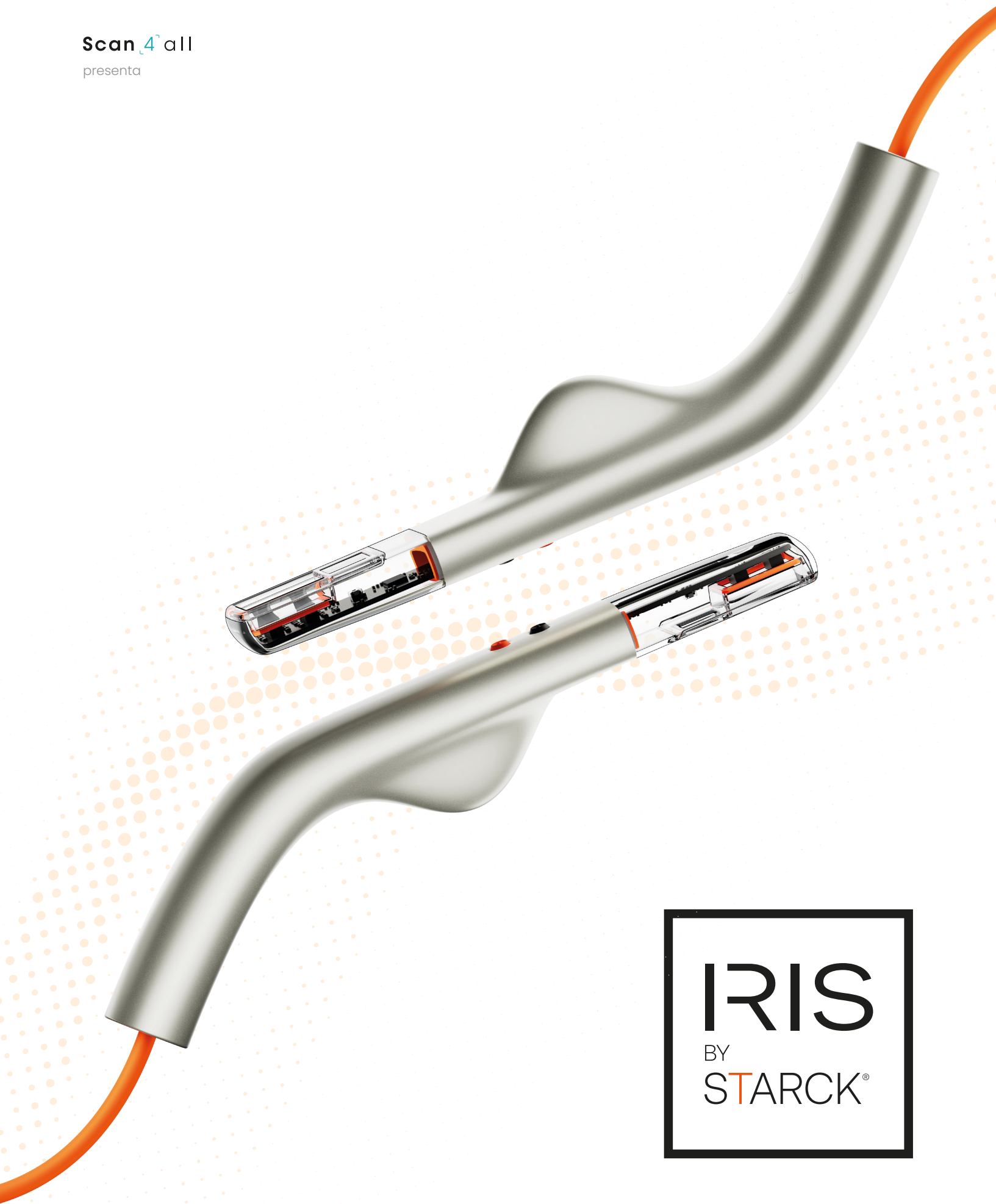

IRIS
BY
STARCK®

INSIDE / **Mis ajustes**

PERSONALICE SU IRIS BY STARCK®



Convierta su experiencia IRIS BY STARCK® en una herramienta a medida, con toda sencillez.

ELECCIÓN DEL IDIOMA Y TEMAS PREFERIDOS

Elija el idioma en el que desea utilizar IRIS BY STARCK®.

Adapta el tema de visualización a tu entorno para garantizar el máximo confort visual (claro u oscuro).

SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA

Defina un tiempo de inactividad de entre los que se proponen en la lista antes de que la aplicación se desconecte automáticamente y le solicite de nuevo la contraseña para acceder a ella.



Si selecciona "Nunca", no olvide desconectarse manualmente si se ausenta.

Nunca

10 minutos

15 minutos

30 minutos

45 minutos

1 hora

2 horas

3 horas

4 horas

5 horas

Nunca

NOTIFICACIONES POR EMAIL



Active o desactive las alertas por correo electrónico para seguir los cambios de estado de los pedidos a su ritmo.

COPIA DE SEGURIDAD EN LA NUBE SIN LÍMITES

Active y guarde gratuitamente los datos de sus pacientes en la copia de seguridad en la nube IRIS BY STARCK® dedicada a su cuenta (bajo protección HDS y seguridad ISO 27001).



Debe estar conectado a Internet para utilizar esta función.



Si la desactiva, los datos solo se guardarán en su ordenador.

CUENTA CONECTADA

Conéctese a IRIS BY STARCK® en el ordenador que desee con su número de licencia y sus datos de identificación. Activa esta función para recuperar todos los datos de su IRIS habitual, ya sea en su consulta, en la clínica o en cualquier otro lugar del mundo.



¿Está conectado a varios ordenadores diferentes? Si la opción «Cuenta conectada» está activada, el número de identificación (ID) de cada pedido y cada escaneo incluye automáticamente el número del ordenador en el que se ha realizado (PC1, PC2, etc.).

OPTIMICE SU EXPERIENCIA DE ESCANEEO

Opciones de rastreo

- ① Áreas que deben rellenarse ☒
- ① Zoom automático ☐
- ① Ayuda sonora ☐

Active o desactive la opción de seguimiento al realizar el escaneo : se emitirá una señal acústica cuando el seguimiento esté en curso. También puede ampliar la imagen del modelo cuando el movimiento se ralentiza.

LLEGA MÁS LEJOS CON IRIS BY STARCK®.

Explora todos los recursos a tu disposición.

IRIS
BY STARCK®



Inside / **Guía de inicio**



Inside / **Mis ajustes**



Inside / **DIRECT SCAN**



Inside / **Mi cuenta**



Inside / **Información del sistema**



Inside / **Herramientas relacionadas con el escaneo**



Inside / **IRIS Connect**



Inside / **Servicio postventa**



Inside / **Mis pedidos**



Inside / **Escaneo in tiempo real**



Inside / **Mis notificaciones**



Inside / **Especificaciones técnicas del ordenador**



Inside / **Mis socios**




Inside / **Workflow guiado**



Inside / **Mis pacientes**



Inside / **Workflow libre**

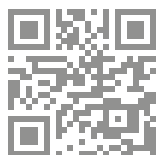

Acceder a toda la documentación.

Fabricante

Scan4all

Excelencia, para todos.

137 rue Garance 31670 Labège - FRANCE

N° SIRET 507 484 863 00059

www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®

Dispositivo médico de clase 1 (DM) destinado a la odontología digital. CE.

Solo para profesionales sanitarios.

© Scan4all - Version 1.0 - 2026

INS.R&D-INSIDE_07_ES_my_settings_20260831

Scan4all SAS - 131 rue Garance 31670 LABEGE - N° SIRET 507 484 863 00059