



Scan 4 all
présente

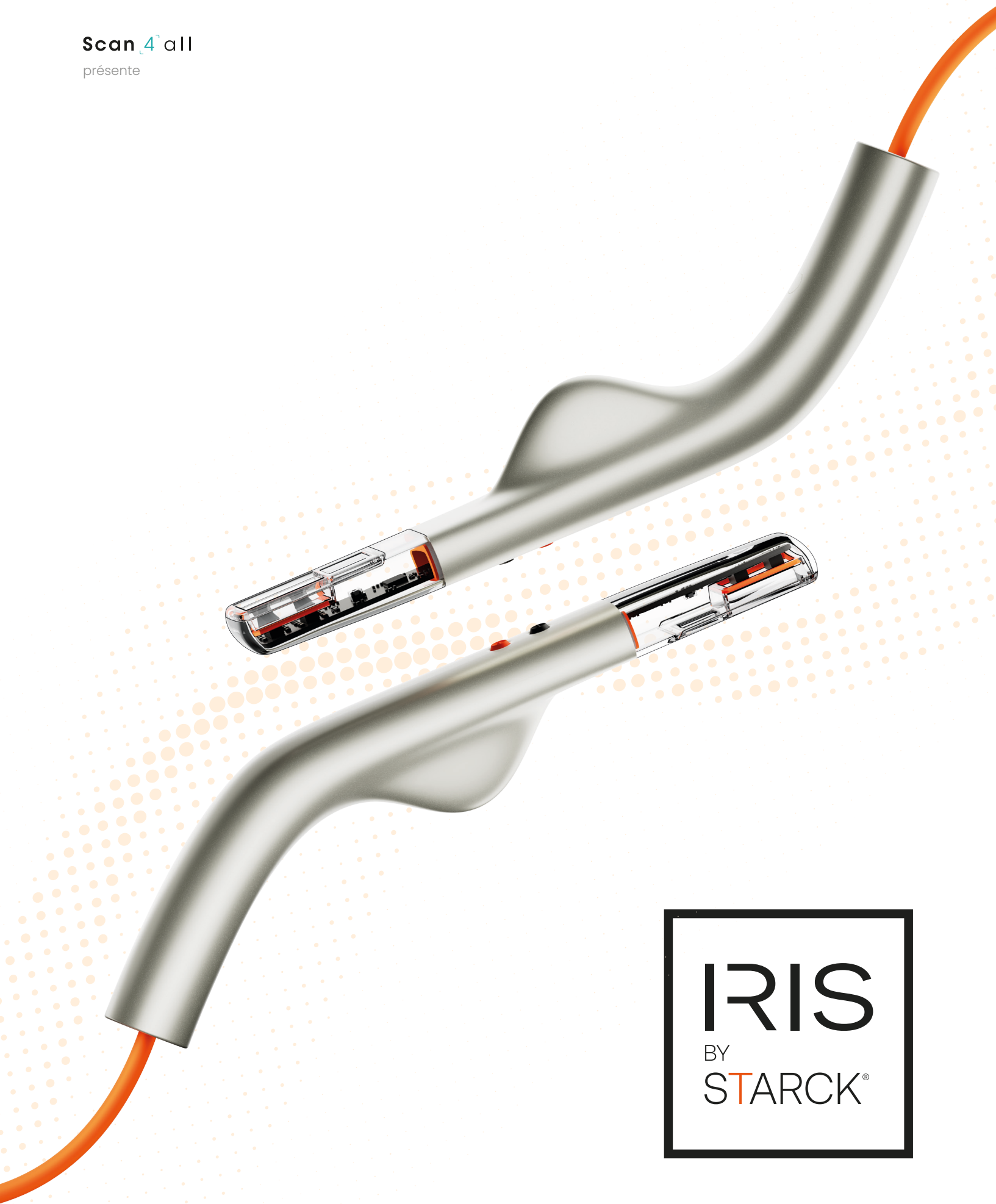

INSIDE / **Mes réglages**

PERSONNALISER VOTRE IRIS BY STARCK®

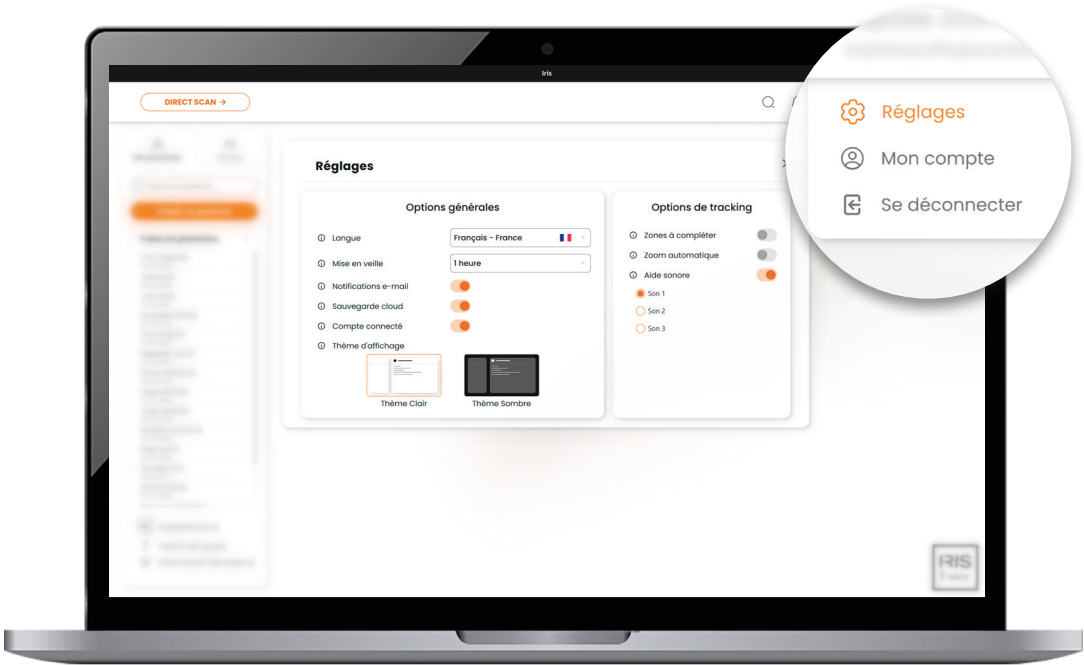

Faites de votre expérience IRIS BY STARCK® un outil sur-mesure, en toute simplicité.

CHOIX DE LA LANGUE ET THÈMES PRÉFÉRÉS

Choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez utiliser IRIS BY STARCK®.

Adaptez votre thème d’affichage à votre environnement pour garantir un maximum de confort visuel (clair ou sombre).

MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE

Définissez un délai d’inactivité parmi la liste proposée avant que l’application ne se déconnecte automatiquement et ne vous redemande l’entrée du mot de passe pour y accéder.



Si vous sélectionnez "Jamais", n’oubliez pas de vous déconnecter manuellement si vous vous absentez.

Jamais

10 minutes

15 minutes

30 minutes

45 minutes

1 heure

2 heures

3 heures

4 heures

5 heures

Jamais

NOTIFICATIONS PAR E-MAIL



Activez ou désactivez les alertes par e-mail pour suivre les changements de statuts des commandes à votre rythme.

SAUVEGARDE CLOUD SANS LIMITE

Activez et sauvegardez gratuitement vos données patients sur le backup cloud IRIS BY STARCK® dédié à votre compte (sous protection HDS et sécurité ISO 27001).



Vous devez être connecté à internet pour utiliser cette fonction.



Si vous la désactivez, les données seront uniquement sauvegardées sur votre ordinateur.

COMPTE CONNECTÉ

Connectez-vous à IRIS BY STARCK® sur le PC de votre choix grâce à votre numéro de licence et vos identifiants. Activez cette fonctionnalité pour récupérer toutes les données de votre IRIS habituel, que vous soyez à votre cabinet, en clinique ou n'importe où dans le monde.



Vous êtes connectés sur plusieurs PC différents ? Si l'option "Compte connecté" est activée, le numéro d'identification (ID) de chaque commande et chaque scan inclut automatiquement le numéro de l'ordinateur sur lequel il a été réalisé (PC1, PC2, etc).

OPTIMISEZ VOTRE EXPÉRIENCE DE SCAN

Options de tracking

- ① Zones à compléter ☐
- ① Zoom automatique ☐
- ① Aide sonore ☒
 - ☒ Son 1
 - ☐ Son 2
 - ☐ Son 3

Activez ou désactivez l'option de tracking lors de la prise de scan : afficher les zones à compléter, activer un zoom automatique lorsque le mouvement ralentit ou déclencher un signal sonore lorsque vous scannez parfaitement.

ALLER PLUS LOIN AVEC IRIS BY STARCK®.

Explorez l'ensemble des ressources mises à votre disposition.



Inside / [Guide de démarrage](#)



Inside / [Mes réglages](#)



Inside / [DIRECT SCAN](#)



Inside / [Mon compte](#)



Inside / [Informations système](#)



Inside / [Outils autour du scan](#)



Inside / [IRIS Connect](#)



Inside / [SAV](#)



Inside / [Mes commandes](#)



Inside / [Scan en temps réel](#)



Inside / [Mes notifications](#)



Inside / [Spécifications techniques ordinateur](#)



Inside / [Mes partenaires](#)




Inside / [Workflow guidé](#)



Inside / [Mes patients](#)



Inside / [Workflow libre](#)

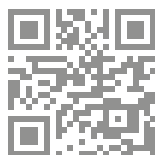

Accéder à toute la documentation.

Fabricant

Scan4all

L'excellence, pour tous.

137 rue Garance 31670 Labège - FRANCE

N° SIRET 507 484 863 00059

www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®

Dispositif médical de classe I (DM) destiné à la dentisterie numérique. CE.

Réservé aux professionnels de santé.

© Scan4all - Version 1.0 - 2026