



Scan 4 all
presenta

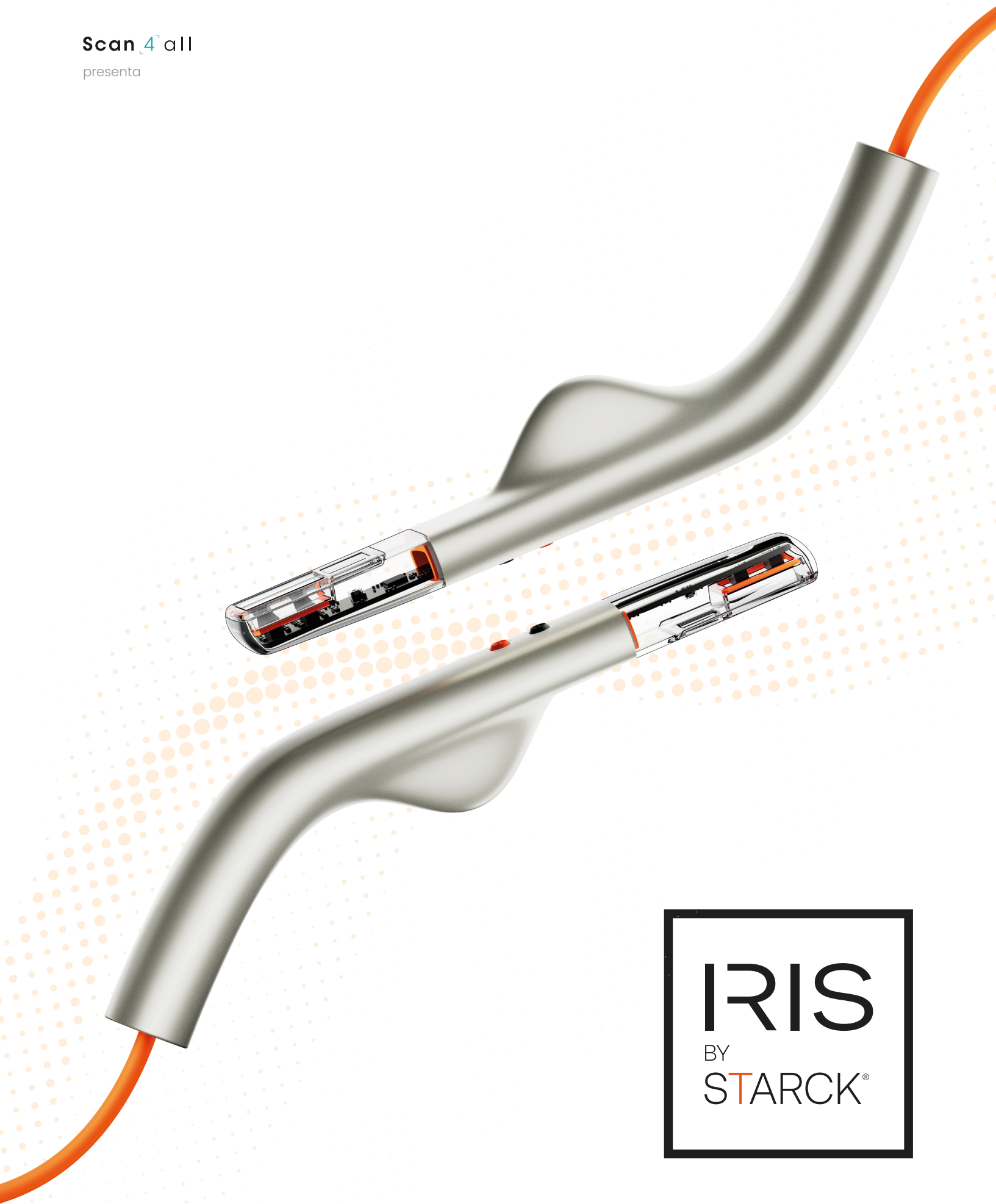

IRIS
BY
STARCK®

INSIDE / **Le mie impostazioni**

PERSONALIZZA IL TUO IRIS BY STARCK®

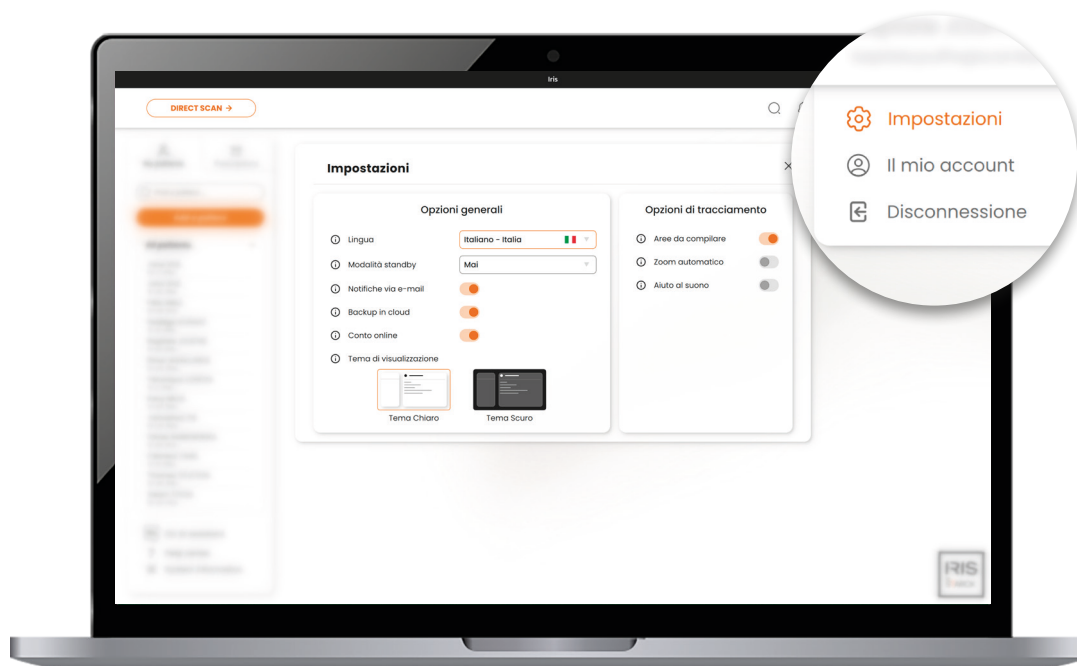

Rendi la tua esperienza IRIS BY STARCK® uno strumento su misura, in tutta semplicità.

SCELTA DELLA LINGUA E DEI TEMI PREFERITI

Scegli la lingua in cui desideri utilizzare IRIS BY STARCK®.

Adatta il tema di visualizzazione al tuo ambiente per garantire il massimo comfort visivo (chiaro o scuro).

SOSPENSIONE AUTOMATICA

Imposta un periodo di inattività dall'elenco proposto prima che l'applicazione si disconnetta automaticamente e richieda nuovamente l'inserimento della password per accedervi.



Se selezioni "Mai", ricordati di disconnetterti manualmente se ti allontani.

Mai ▲

10 minuti
15 minuti
30 minuti
45 minuti
1 ora
2 ore
3 ore
4 ore
5 ore
Mai

NOTIFICHE VIA E-MAIL



Attiva o disattiva gli avvisi via e-mail per seguire i cambiamenti di stato degli ordini secondo le tue esigenze.

BACKUP CLOUD ILLIMITATO

Attiva e salva gratuitamente i dati dei tuoi pazienti sul backup cloud IRIS BY STARCK® dedicato al tuo account (protetto da HDS e sicurezza ISO 27001).



Per utilizzare questa funzione è necessario essere connessi a Internet.



Se la disattivi, i dati saranno salvati solo sul tuo computer.

ACCOUNT CONNESSO

Accedi a IRIS BY STARCK® dal PC che preferisci utilizzando il tuo numero di licenza e le tue credenziali. Questa funzionalità per recuperare tutti i dati dal tuo IRIS abituale, che tu sia nel tuo studio, in clinica o in qualsiasi altra parte del mondo.



Sei connesso a più PC diversi ? Se l'opzione "Account connesso" è attivata, il numero di identificazione (ID) di ogni comando e di ogni scansione include automaticamente il numero del computer su cui è stato eseguito (PC1, PC2, ecc.).

OTTIMIZZATE LA VOSTRA ESPERIENZA DI SCANSIONE

Opzioni di tracciamento



Aree da compilare



Zoom automatico



Attiva o disattiva l'opzione di tracciamento durante la scansione: un segnale acustico si attiva quando il tracciamento è in corso. È anche possibile ingrandire il modello quando il movimento rallenta.

VAI OLTRE CON IRIS BY STARCK®.

Scopri tutte le risorse a tua disposizione.



Inside / Guida introduttiva



Inside / Le mie impostazioni



Inside / DIRECT SCAN



Inside / Il mio account



Inside / Informazioni di sistema



Inside / Strumenti relativi alla scansione



Inside / IRIS Connect



Inside / SAV



Inside / I miei ordini



Inside / Scansione in tempo reale



Inside / Le mie notifiche



Inside / Specifiche tecniche del computer



Inside / I miei partner




Inside / Workflow guidato



Inside / I miei pazienti



Inside / Workflow libero

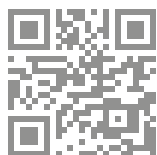

Accedere a tutta la documentazione.

Produttore

Scan4all

Eccellenza, per tutti.

137 rue Garance 31670 Labège - FRANCE

N° SIRET 507 484 863 00059

www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®

Dispositivo medico di classe I (DM) destinato all'odontoiatria digitale. CE.

Riservato esclusivamente agli operatori sanitari.

© Scan4all - Version 1.0 - 2026