


Scan 4 all


를 선보입니다

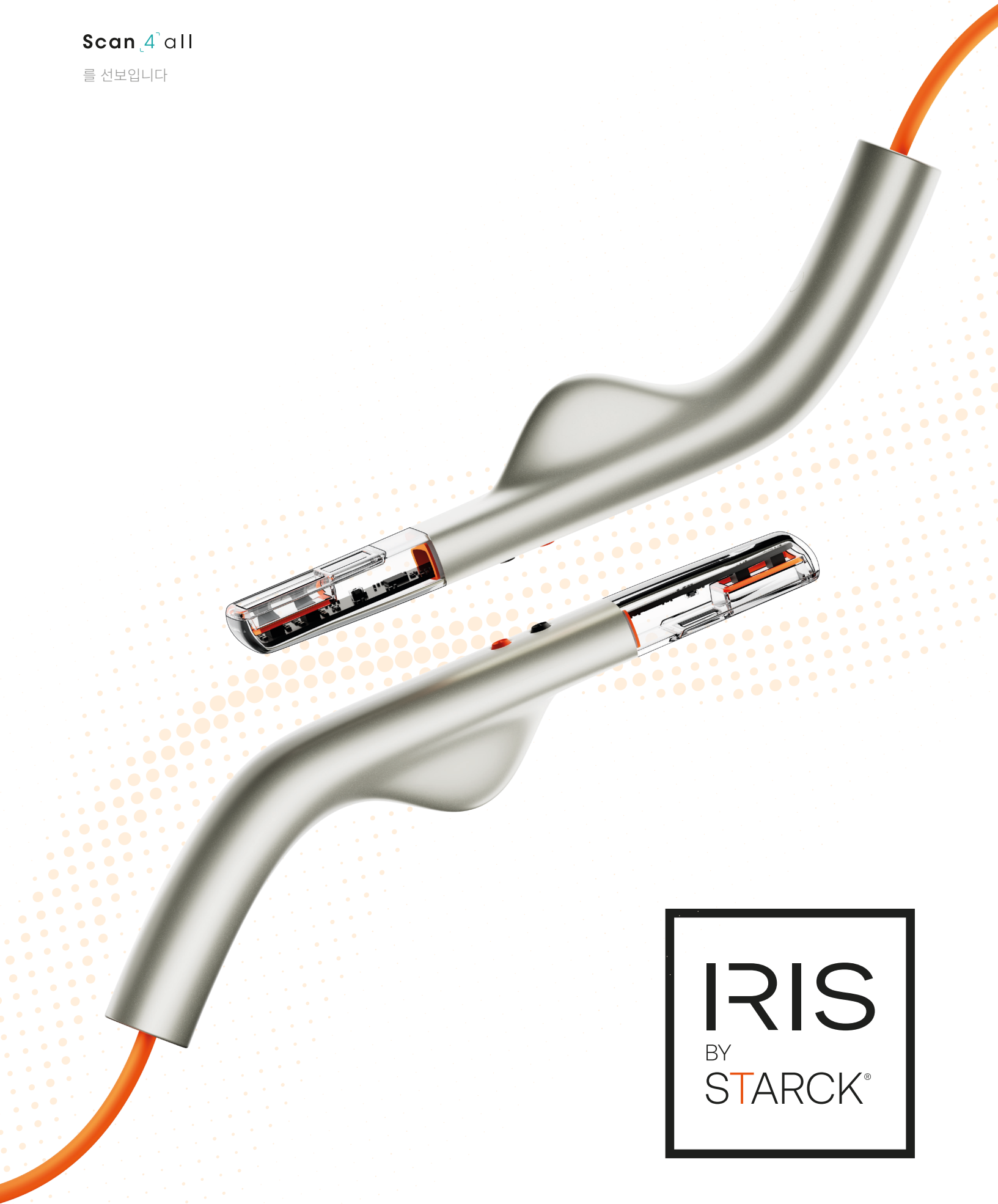

IRIS
BY
STARCK®

내부 / 내 설정

IRIS BY STARCK® 맞춤 설정

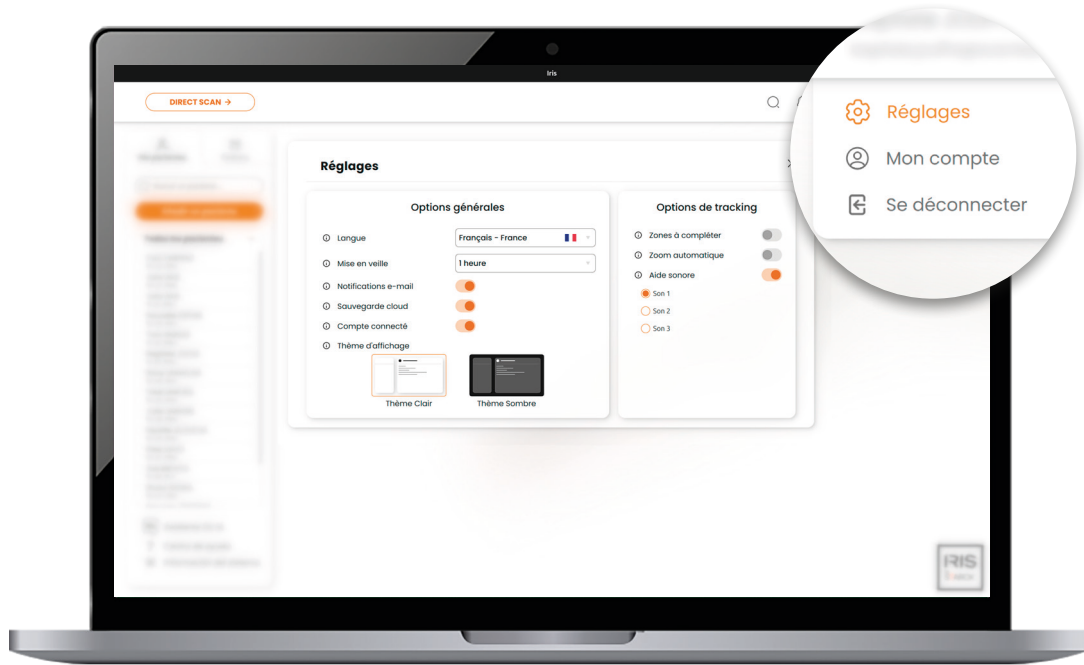

필요에 맞게 IRIS BY STARCK® 환경을 손쉽게 맞춤 설정하세요.

언어 및 선호 테마 선택

IRIS BY STARCK®을 사용할 언어를 선택하세요.

최상의 시각적 편안함을 위해 환경에 맞게 디스플레이 테마를 조정하세요(밝은 모드 또는 어두운 모드).

자동 대기 모드

제공된 목록에서 유효 시간을 설정하면, 해당 시간이 지나면 애플리케이션이 자동으로 로그아웃하고 다시 액세스하려면 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.



”절대 안 함”을 선택한 경우, 컴퓨터에서 자리를 비울 때는 수동으로 로그아웃하는 것을 잊지 마십시오.

Jamais
10 minutes
15 minutes
30 minutes
45 minutes
1 heure
2 heures
3 heures
4 heures
5 heures
Jamais

이메일 알림



이메일 알림을 활성화하거나 비활성화하여 원하는 방식으로 주문 상태 변경 사항을 추적하세요.

무제한 클라우드 백업

HDS 및 ISO 27001 보안으로 보호되는 귀하의 계정에 전용된 IRIS BY STARCK®클라우드에서 환자 데이터를 무료로 활성화하고 백업하십시오.



이 기능을 사용하려면 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.



이 기능을 비활성화하면 데이터는 컴퓨터에만 백업됩니다.


계정 연결

라이선스 번호와 로그인 정보를 사용하여 어느 PC에서든 IRIS BY STARCK®에 로그인하세요. 동기화를 활성화하면 진료실, 클리닉 또는 세계 어디에서든 평소 사용하던 모든 IRIS 데이터를 불러올 수 있습니다.



여러 대의 PC에 로그인되어 있습니까? "동기화" 옵션이 활성화되어 있으면, 각 주문 및 스캔의 식별 번호(ID)에 해당 작업이 수행된 컴퓨터 번호(PC1, PC2 등)가 자동으로 포함됩니다.

스캔 환경 최적화

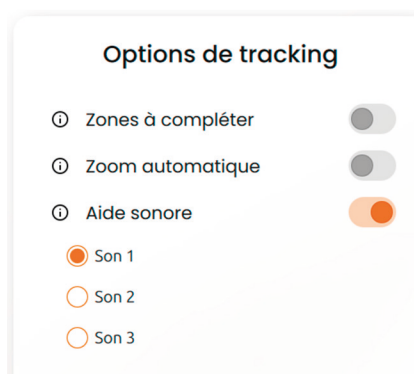

스캔 시 추적 기능을 켜거나 끄세요: 추적이 진행 중일 때 소리 신호가 울립니다. 또한 모델의 움직임이 느려지면 모델을 확대할 수 있습니다.

IRIS BY STARCK®와 함께 더 많은 기능을 경험해 보세요.

이용 가능한 모든 리소스를 살펴보세요.

 내부 / 시작 가이드

 내부 / 내 설정

 내부 / DIRECT SCAN

 내부 / 내 계정

 내부 / 시스템 정보

 내부 / 스캔 관련 도구

 내부 / IRIS Connect

 내부 / SAV

 내부 / 내 주문

 내부 / 실시간 스캔

 내부 / 내 알림

 내부 / 컴퓨터 기술 사양

 내부 / 내 파트너

 내부 / 가이드형 워크플로우

 내부 / 내 환자

 내부 / 자유형 워크플로우



전체 문서를 확인하십시오.

제조업체

Scan4all

모두를 위한 탁월함.

137 rue Garance 31670 Labège - 프랑스

N° SIRET 507 484 863 00059

www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®
디지털 치과용 1등급 의료기기(MD).
의료 전문가 전용.
© Scan4all - 버전 1.0 - 2026