



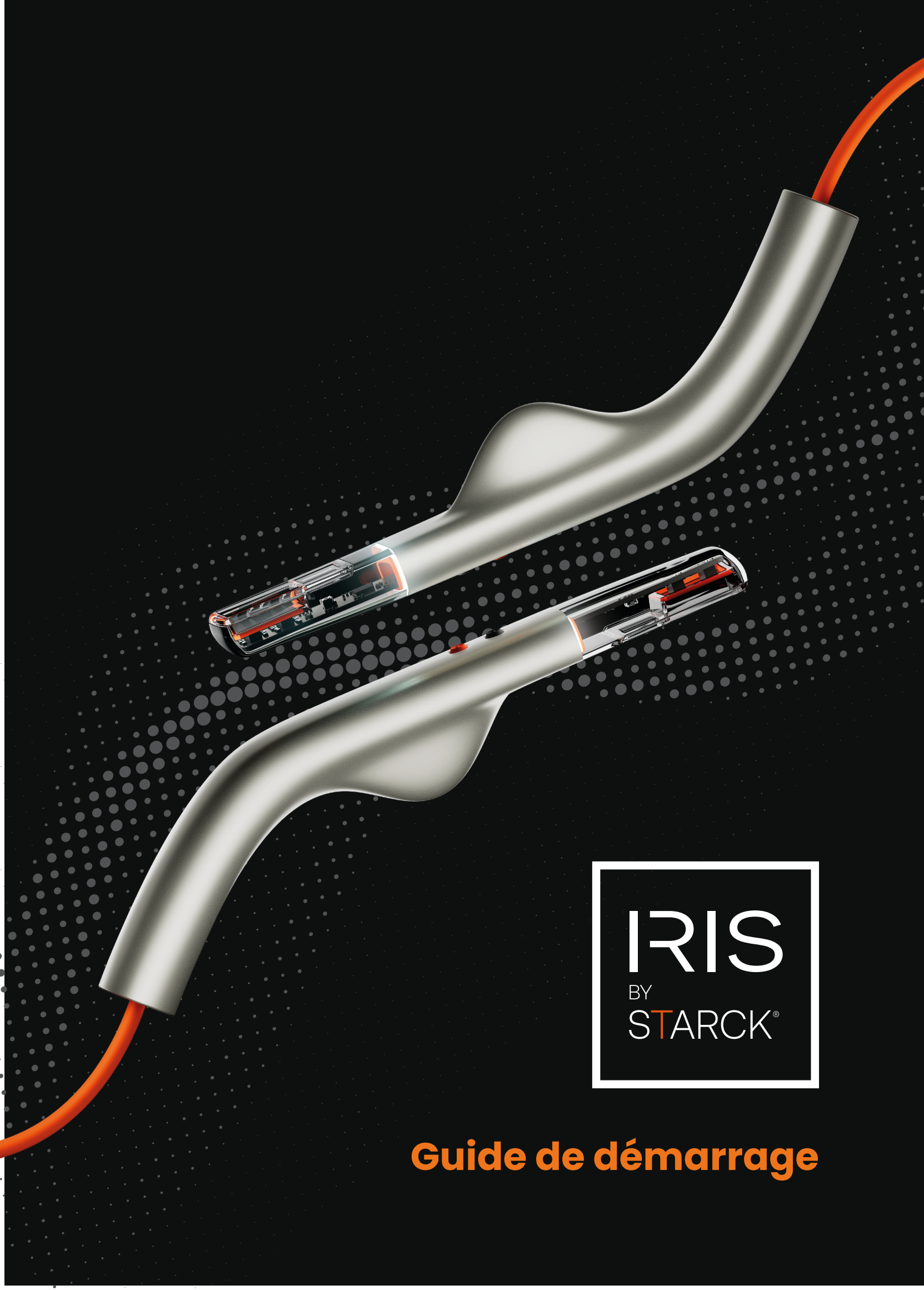


Guide de démarrage

FÉLICITATIONS !

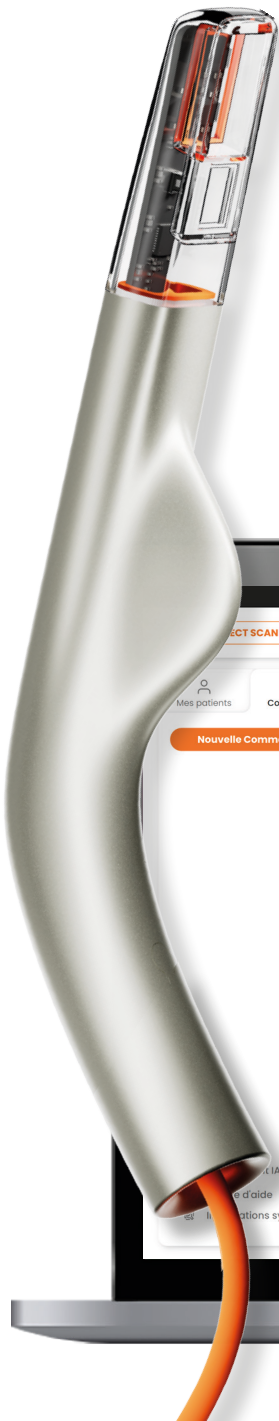

Vous venez d’acquérir IRIS BY STARCK®, une solution complète de prise d’empreinte numérique dédiée aux professionnels de la santé bucco-dentaire. Ce dispositif médical associe un scanner intra-oral et un logiciel propriétaire puissant pour modéliser en 3D l’ensemble de la cavité buccale.

Profitez d’une plateforme sécurisée, ouverte, évolutive et interopérable grâce à des formats standards (STL et PLY) qui permettent de centraliser la totalité du flux de traitement dentaire : de l’examen initial à la fabrication prothétique, en passant par la gestion des fiches patients, le travail collaboratif, les échanges interprofessionnels et le suivi des commandes.

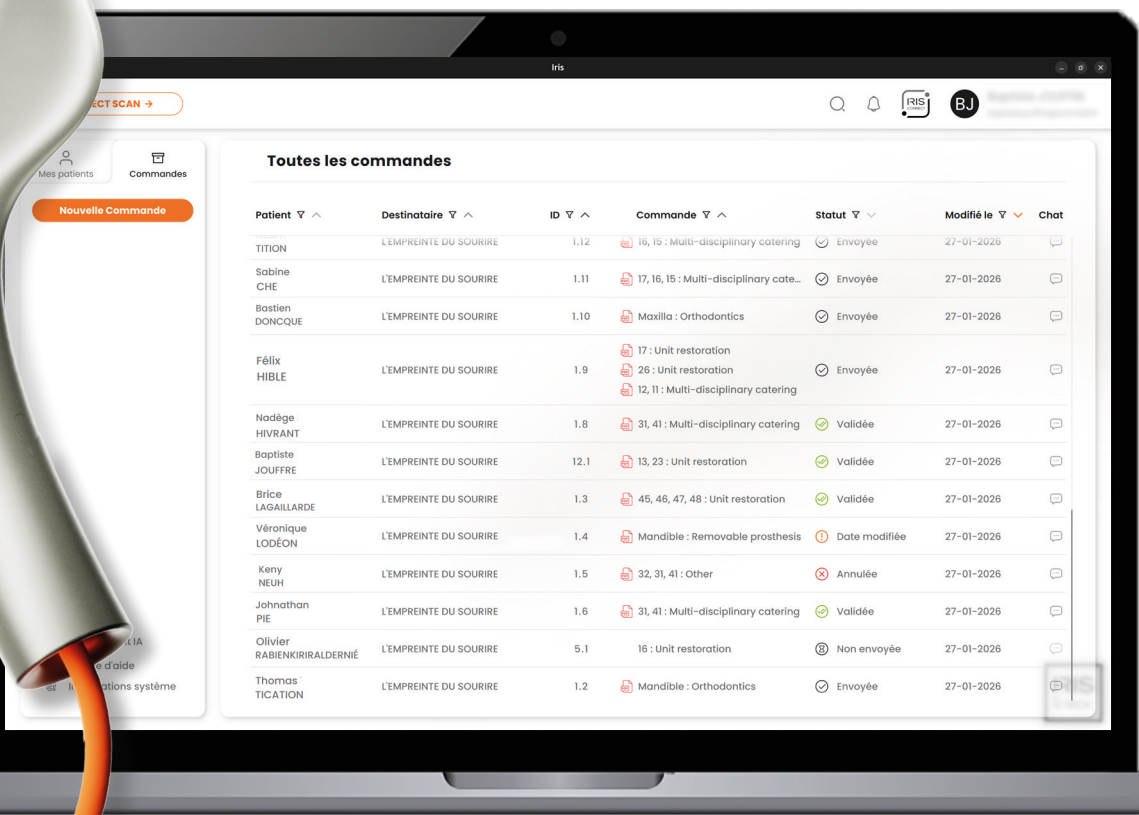

Alors pourquoi "BY STARCK" ?

Développée et fabriquée par Scan4all, la pièce à main a été dessinée par Philippe Starck. Elle se distingue par des lignes organiques biomimétiques et une forme adaptée à la morphologie de l'utilisateur.

SOMMAIRE

- PRÉSENTATION DU DISPOSITIF 4**
- ACTIVER VOTRE LICENCE 4**
- VOTRE PAGE D’ACCUEIL 5**
- UN PARCOURS ADAPTÉ 6**
- SCANNER EN TEMPS RÉEL 7**
- OUTILS AUTOUR DU SCAN 8**
- MES PATIENTS 10**
- MES COMMANDES 11**
- IRIS CONNECT 12**
- MON COMPTE 14**
- MES RÉGLAGES 15**

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF



ACTIVER VOTRE LICENCE


Vous avez reçu un ordinateur installé par Scan4all ?

Lancez IRIS BY STARCK®, cliquez sur "activer mon compte" et renseignez votre numéro de licence lors de votre inscription grâce au numéro unique inscrit sur votre carte SECURE.ID



Puis-je utiliser IRIS BY STARCK® sans internet ? Oui, une fois activé, vous pouvez scanner et utiliser le logiciel IRIS sans contrainte. Vos commandes seront automatiquement envoyées une fois la connexion internet établie.

VOTRE PAGE D'ACCUEIL

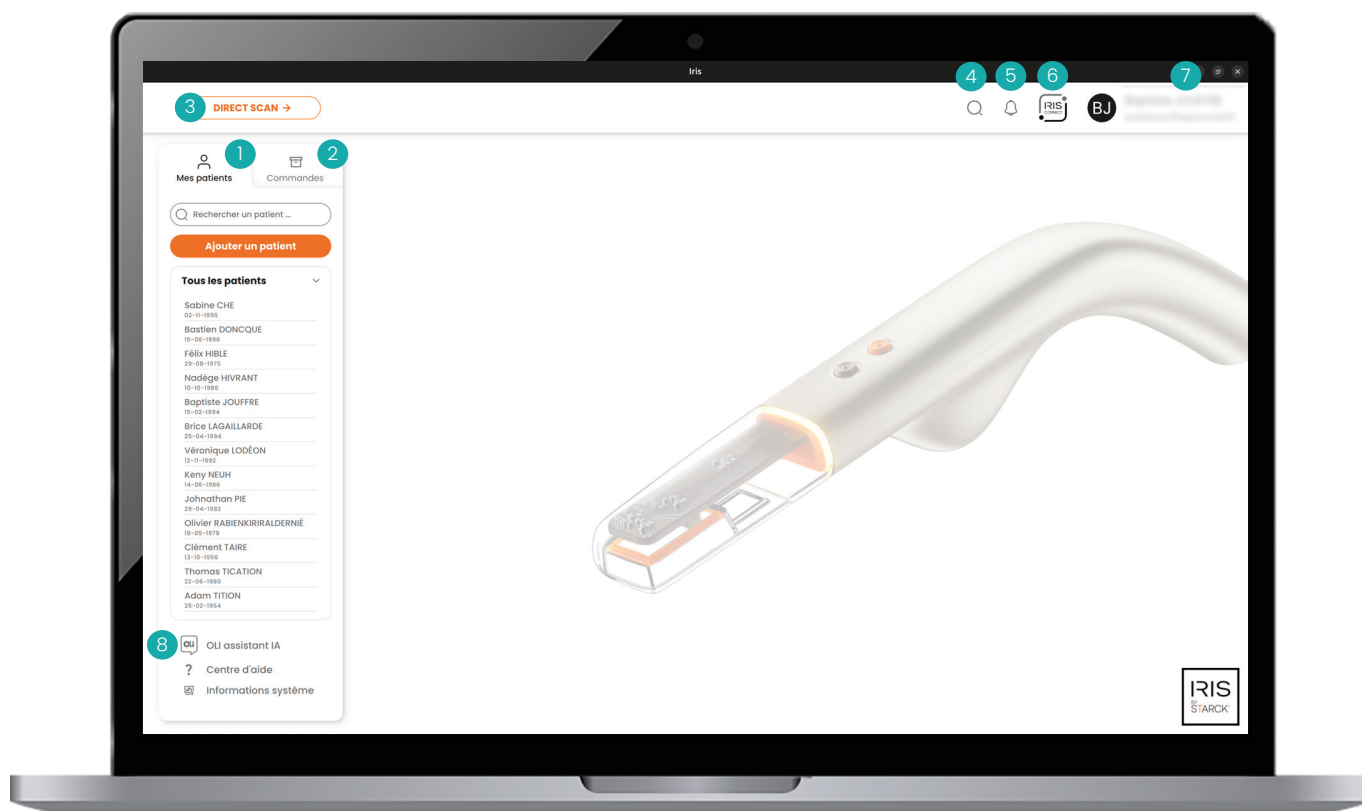

Profitez d'un écosystème totalement libre, autonome et ergonomique qui vous accompagne de manière naturelle dans votre quotidien.

- 1 **Gérer la liste de tous mes patients** : rechercher et ajouter.
- 2 **Gérer mes commandes** : création, suivi et historique.
- 3 **Lancer un scan** sans information préalable.
- 4 **Barre de recherche** (patients, scans, commandes, contacts, collaborateurs ou assistants).
- 5 **Centre de notifications** des actions liées à vos contacts et à vos commandes.
- 6 **IRIS CONNECT** : collaborer, discuter, partager, gérer mes contacts et mon équipe.
- 7 **Mon compte et mes réglages**.
- 8 **Discuter avec OLI**, une intelligence artificielle intégrée qui assure un support technique de niveau 1.

UN PARCOURS ADAPTÉ

Peu importe que vous commenciez par un scan ou une commande, l'IHM s'adapte automatiquement à votre logique. Passez d'un flux à l'autre à tout moment sans perte d'information.



Le workflow correspond aux différentes étapes nécessaires à l'envoi d'une commande : de la création de la fiche prothétique jusqu'à l'envoi des scans sélectionnés.

Pour ceux qui préfèrent scanner, puis organiser


DIRECT SCAN →



Scannez votre patient sans attendre grâce à la fonction **DIRECT SCAN**. Ensuite, enregistrez le scan à une fiche patient et créez une commande ultérieurement.

Le **DIRECT SCAN** est un workflow libre. Ce mode privilégie la réactivité en conservant toutes les fonctionnalités habituelles.

Pour ceux qui planifient avant d'agir

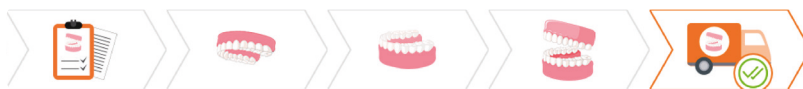

Éditer la fiche prothétique ➤ Scan maxillaire ➤ Scan mandibule ➤ Scan occlusion ➤ Envoi de la commande.

Le workflow GUIDÉ vous assiste automatiquement selon le traitement sélectionné dans la fiche prothétique.

Chaque type d'acte **déclenche les étapes de scan nécessaires à la commande** : vous n'avez qu'à suivre le parcours.

Vous gardez la liberté de personnaliser ce parcours.

Le workflow LIBRE, où chaque étape est indépendante (au clic).

Vous êtes responsable de réaliser les scans nécessaires pour une commande complète en sélectionnant vous-même les étapes.



Depuis l'onglet "Commandes" ou depuis une fiche patient, cliquez sur "Nouvelle commande". Remplissez votre fiche prothétique et choisissez votre mode de workflow préféré (guidé ou libre).

SCANNER EN TEMPS RÉEL



Pour débuter votre scan, vous pouvez commencer par la face occlusale, puis linguale ou palatine pour terminer par la face vestibulaire.

Pour les incisives, effectuez un mouvement de bascule sur l'axe occlusal et finissez en glissant légèrement sur la face avant.

Scanner à la bonne distance : calibrage automatique

Placer l'embout parallèle et au contact de la dentition garantit la bonne distance pour un scan précis.

Scanner à une allure régulière : gardez un geste fluide

Adoptez une vitesse au rythme d'affichage de la vue 3D et privilégiez la stabilité du mouvement **tel un pinceau le long d'une toile**. Le scanner IRIS BY STARCK® **glisse sur la dentition, sans à-coup**, ni précipitation.

Signal lumineux

Allumé ou éteint : blanc, la caméra est allumée.
État de tracking : identique à la vue de scan.
Vert : tracking en cours.
Jaune : ralentissez, le scan se stabilise.
Rouge : perte de tracking.

Démarrer le scan.

Mettre en pause.
Reprendre.

Valider et lancer la reconstruction finale.




Pour maintenir une bonne expérience de scan : utiliser l'icône chrono (en haut à droite de votre vue de scan en temps réel).
Gris : vous pouvez continuer.
Jaune : expérience de scan ralentie.
Rouge : privilégiez le lancement de la reconstruction finale. Une reprise de scan sera possible grâce à l'outil "Reprendre le scan".

OUTILS AUTOUR DU SCAN

IRIS BY STARCK® vous offre une suite d'outils pour contrôler, ajuster, analyser et enrichir vos scans.

Affiner votre visualisation

Profitez des **fonctions de visualisation** 1 pour afficher le format PLY ou STL, prendre des captures d'écran, changer votre point de vue de scan, jouer avec la transparence et choisir les mesures visibles ou non.

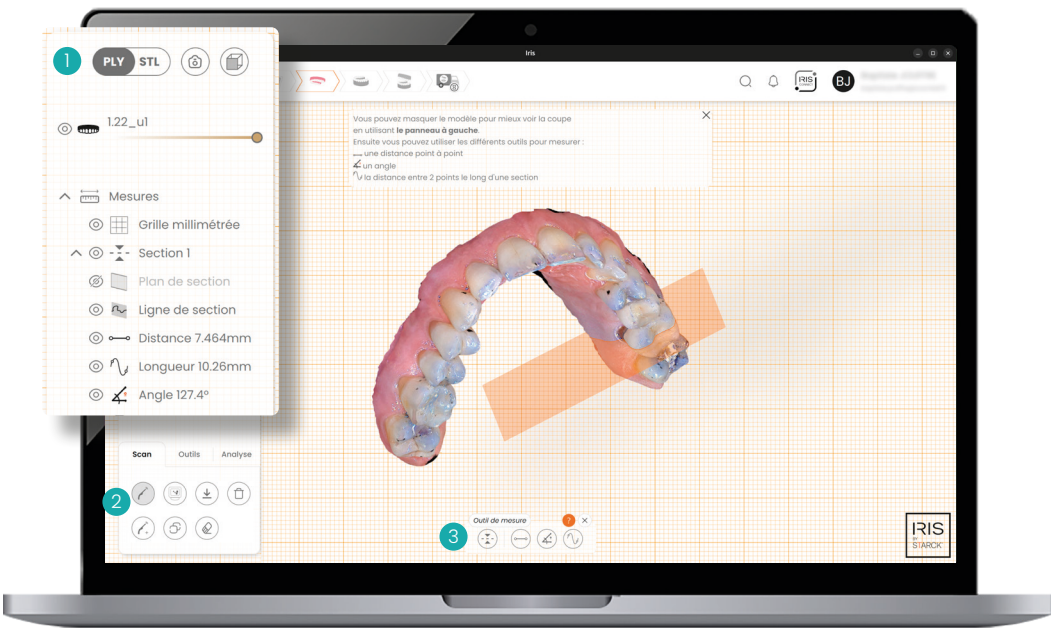


Accédez à des **fonctionnalités d'analyses avancées, de retouche ou de personnalisation** 2 à travers trois onglets complémentaires : Scan, Outils et Analyse.

💡 Tracez une section 3 sur un plan 2D afin de faciliter le repérage et affichez la grille millimétrée pour toujours plus de précision.

Maîtrisez chaque détail de votre scan


Tirez parti des fonctionnalités liées à la **gestion du scan**, des **outils** pour vous accompagner dans votre clinique et des possibilités d'**analyses comparatives et de mesures**.

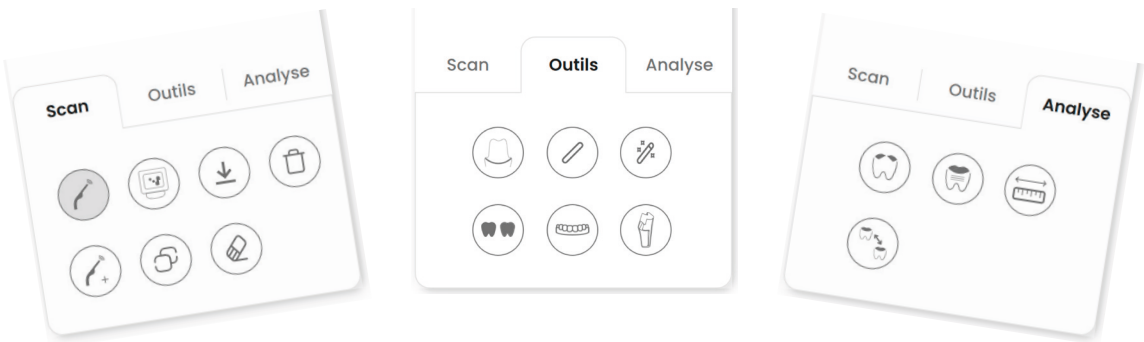

Tous les outils disponibles

SCAN	OUTILS	ANALYSE
 Reprendre le scan	 Afficher les lignes de finitions	 Courbure
 Ajouter un scan	 Créer une ligne de finition manuelle	 Rugosité
 Copier le scan	 Créer une ligne de finition auto	 Comparaison
 Gommer le scan	 Modifier le type de socle	 Mesures
 Télécharger le scan	 Labéliser	
 Supprimer le scan	 Ajouter un scanbody	
 Photogrammétrie		

Encore plus de précision à l'occlusion

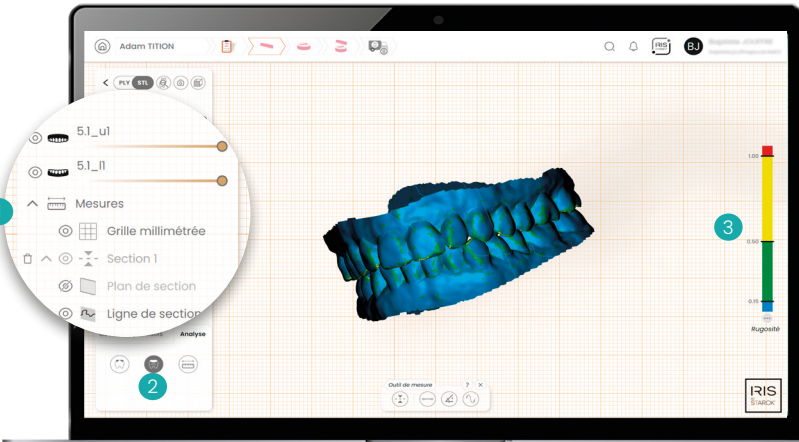

 Ajouter un scan à l'occlusion
  Optimisation de l'intercuspidie
  Ajouter une occlusion
  Ajuster manuellement

Retrouvez toutes les **fonctions de visualisation** 1 et les outils d'analyses précédents ainsi que **des fonctionnalités supplémentaires et spécifiques à l'occlusion** 2.


Optimisation de l'intercuspidie

Perfectionnez automatiquement l'intercuspidie grâce à un alignement basé sur les zones de contacts préalablement identifiées.


3 Personnalisez l'échelle de valeur

Les codes couleurs vous aident à localiser rapidement les zones critiques. Vous pouvez définir votre propre colorimétrie.

MES PATIENTS

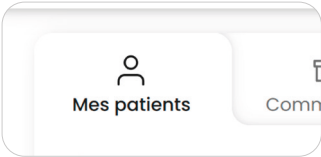

Sur la page d'accueil, l'onglet "Mes patients" vous permet d'accéder rapidement à la liste de tous vos patients, d'en ajouter de nouveaux, de consulter et gérer leurs informations ou de visualiser l'historique de leurs actes (voir ci-dessous).

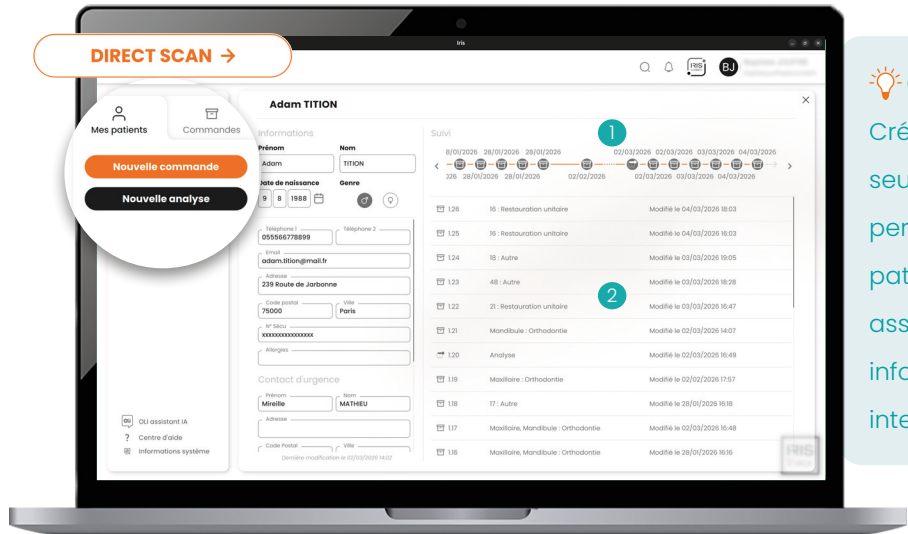


Gagnez du temps

Créer une fiche patient nécessite seulement 4 informations ce qui vous permet d'enregistrer un nouveau patient en quelques secondes et vos assistants peuvent renseigner les informations complémentaires sans interrompre votre flux de travail.

En sélectionnant un patient, vous profitez d'une visualisation optimisée de son historique des actes réalisés sur sa timeline 1 et dans une liste chronologique 2. Chaque action est enregistrée dans la fiche patient.

3 types d'actes

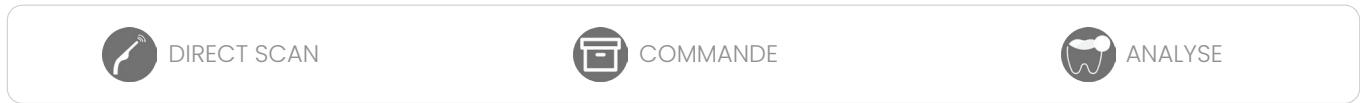

Gardez le contrôle

Droits	Aucun	Lecture	Écriture
Dossier patient	☐	☒	☐
Discussion	☒	☐	☐

AnnulerValider

Paramétrez des droits d'accès personnalisés pour permettre à vos assistants de compléter les informations (voir "IRIS CONNECT", page 12).


Rechercher rapidement

Depuis la barre de recherche de l'onglet ou via la barre de recherche générale : retrouver rapidement votre patient pour accéder à sa fiche.

Suppression définitive : En cas de suppression d'un patient, l'ensemble de ses informations et tous les scans associés sont définitivement supprimés. Aucun archivage n'est conservé conformément à la législation en vigueur.

MES COMMANDES

Sur la page d'accueil, l'onglet "Commandes" vous permet d'accéder à un suivi complet de l'ensemble de vos commandes. Ajoutez une commande à tout moment directement depuis cet espace.

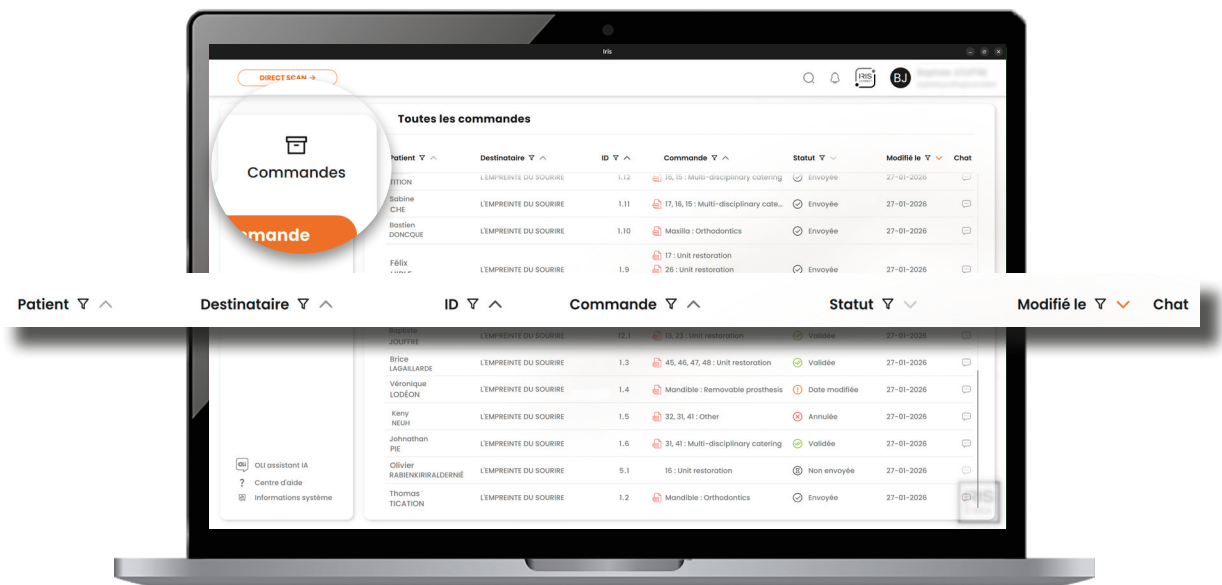

Un tchat dédié pour suivre la discussion de chaque commande.

Passer une commande

Rien de plus simple.

Depuis l'onglet "Commandes" ou directement via la fiche patient : cliquez sur "Nouvelle commande", choisissez votre partenaire, remplissez la fiche prothétique puis suivez le workflow de scan de votre choix.

Choix de vos partenaires

Sauvegarder et envoyer vos commandes chez vos partenaires directement depuis IRIS BY STARCK® lors de la création d'une commande :

Synchronisation LaGalaxy

Synchronisez vos données via votre compte LaGalaxy pour assurer une mise à jour continue des données (à activer depuis "Mon compte").


Partenaires intégrés

Choisissez un des partenaires intégrés à IRIS BY STARCK® (ex. SMILERS, CIRCLE) pour envoyer la commande sur votre compte chez ce partenaire.

IRIS CONNECT

Invitez vos propres partenaires via IRIS CONNECT. Ils pourront recevoir vos commandes et interagir par message avec vous (voir "IRIS CONNECT", page 12).

IRIS CONNECT

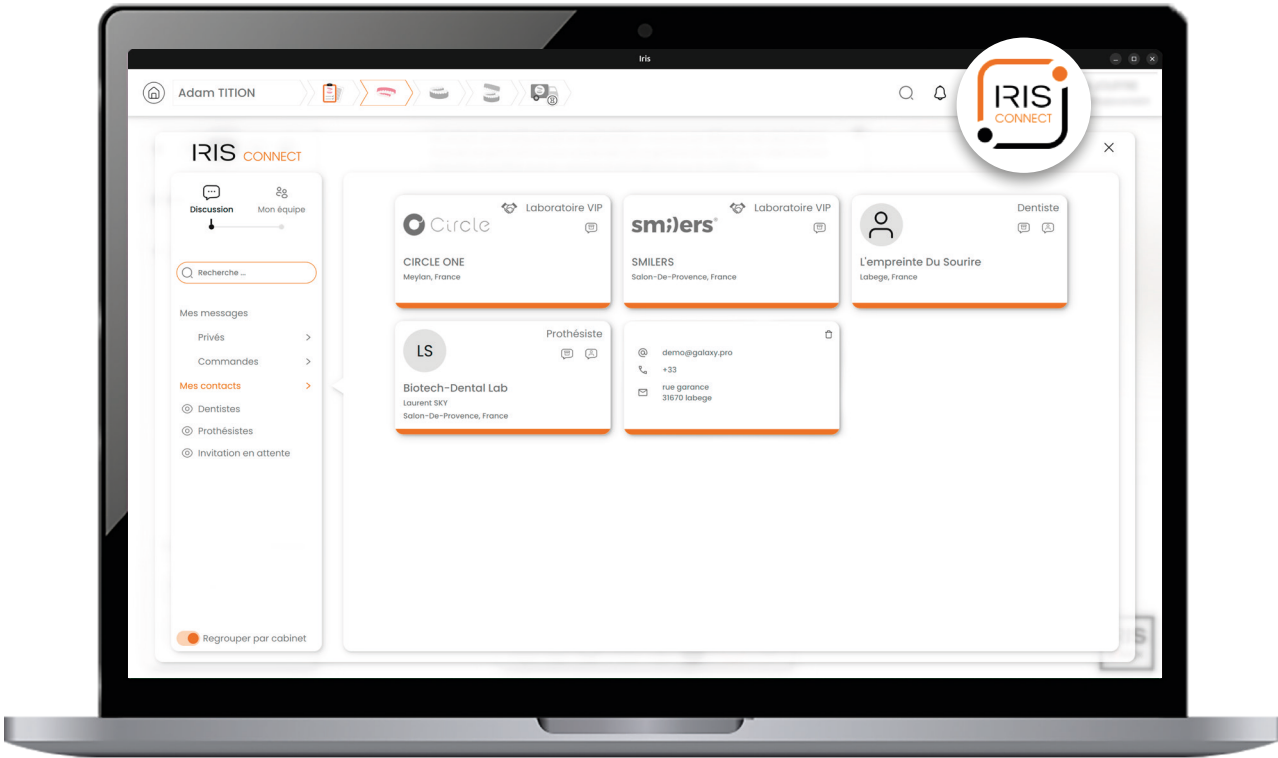

Sécurité maximale

- › Environnement de partage sécurisé.
- › Certification ISO 27001 et HDS.

Création d'équipe sur mesure

- › Créer votre équipe en tant qu'administrateur.
- › Gestion des rôles adaptés à votre organisation ; droits d'accès aux dossiers patients et discussions :
 - pour vos collaborateurs.
 - pour vos assistants.

Messagerie instantanée

- › Gestion automatique des messages.
- › Notifications intelligentes.

-  Profitez d'espaces de discussions dédiés :
- pour vos commandes.
 - pour vos discussions privées.


Gestion des commandes facilitée

- › Renvoi automatique des commandes hors ligne.
- › Statuts des commandes.
- › Notifications de la mise à jour du statut.
- › Historique des échanges.

Collaboration sans limite

- › Annuaire exclusif du réseau IRIS BY STARCK®.
- › Intégration de vos contacts externes.
- › Format de fichier universel (STL).
- › Interface web externe sécurisée.

Une interface web pour vos partenaires externes

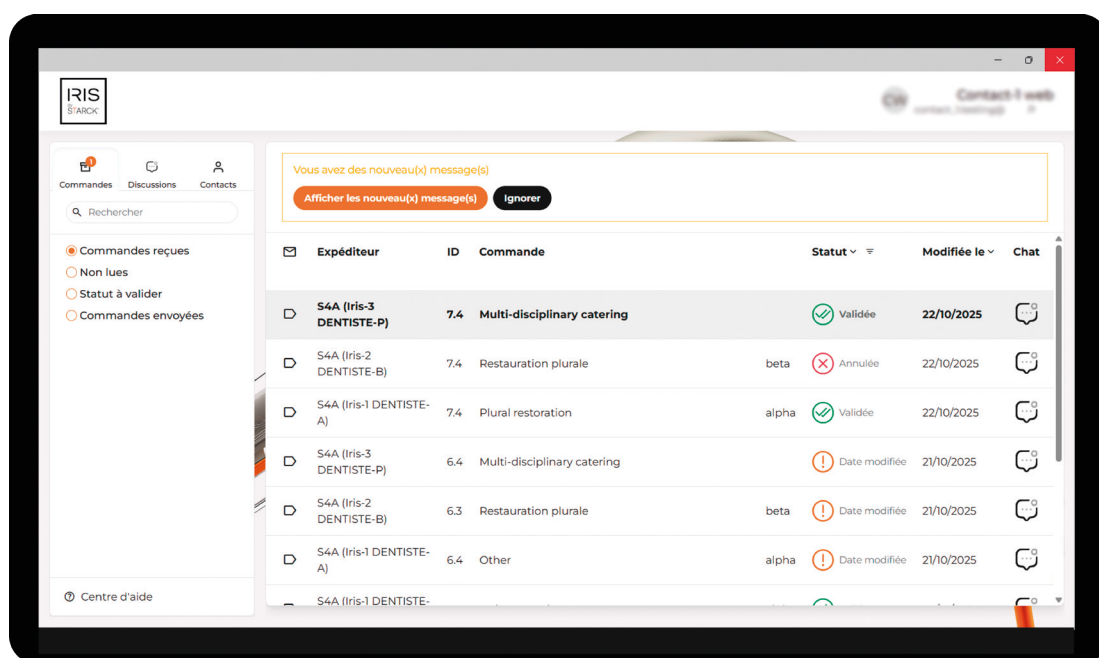

IRIS BY STARCK® WEB est **une interface d'échange universelle et sécurisée** pour vous et vos partenaires externes.

💡 En plus de posséder un scanner dernière génération, vous avez la possibilité d'inviter n'importe quel confrère, clinique ou laboratoire à échanger sur la commande de votre choix.

Inviter un partenaire externe

Vous ne trouvez pas votre contact ?

Envoyer une invitation par email

Depuis IRIS CONNECT, utilisez le champ de recherche pour retrouver rapidement un collaborateur. S'il ne fait pas partie de l'annuaire IRIS BY STARCK®, **saisissez son adresse mail pour l'inviter**. Il recevra un lien d'inscription associé à un code de sécurité unique pour créer son compte web sur www.irisbystarck.com

Des partenaires intégrés


IRIS BY STARCK® propose des partenaires intégrés : lors de la création d'une commande, choisissez celui de votre choix comme destinataire pour retrouver directement celle-ci sur votre compte partenaire.

Restez informé

Les notifications, visibles depuis l'icône en haut de la page d'accueil , vous tiennent au courant des actions liées à vos contacts et à vos commandes : répondre ou envoyer une invitation de contact, ou encore être informé d'un changement de statut de commande (validée, annulée, modifiée).

MON COMPTE

L'onglet "Mon compte" vous permet de **consulter et modifier vos informations personnelles** à tout moment. Pratique et rapide, vous restez en contrôle total de vos données depuis votre interface IRIS BY STARCK®.

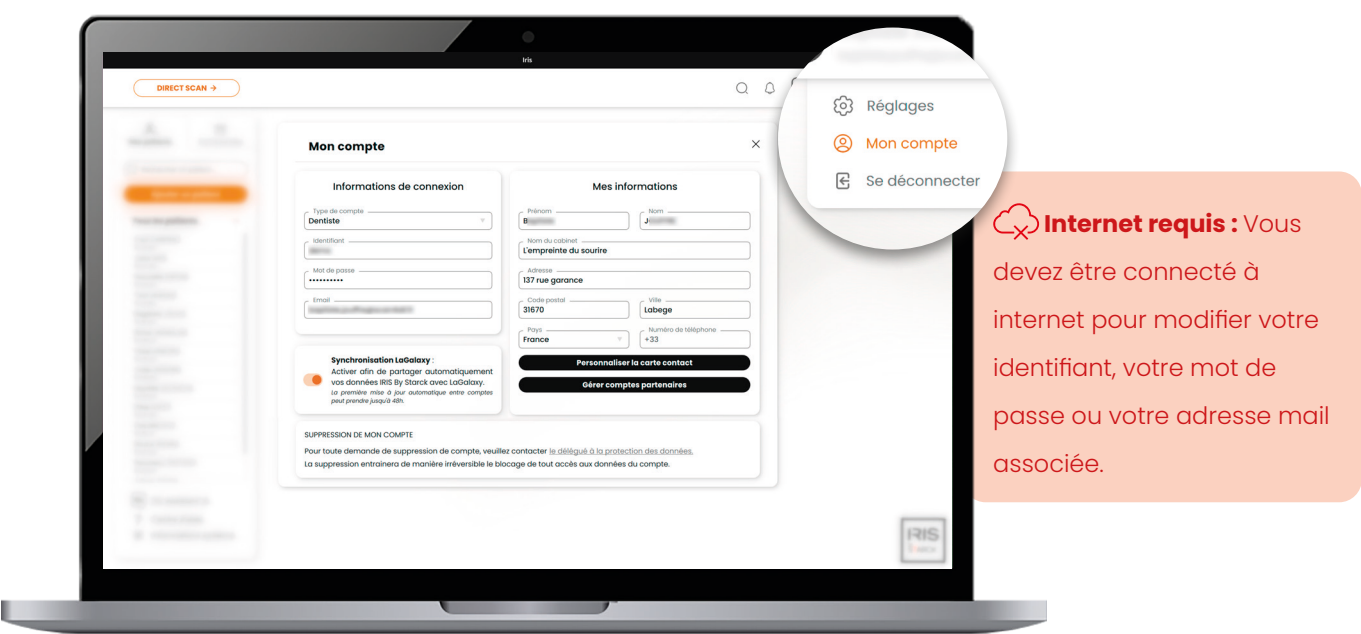

Votre réseau professionnel exclusif

Votre visibilité sur le réseau exclusif IRIS BY STARCK® vous appartient. Profitez des avantages collaboratifs d'IRIS BY STARCK® en faisant partie de l'annuaire communautaire, tout en gardant facilement le contrôle de vos informations.



Connexion avec LaGalaxy


Tout votre univers dentaire, synchronisé sur un écosystème digital sécurisé qui regroupe l'ensemble des produits et solutions du Groupe Biotech Dental. Une fois la synchronisation activée, vos patients, scans et commandes IRIS BY STARCK® seront disponibles dans votre espace LaGalaxy.

Plus d'informations sur www.biotechgalaxy.com

LaGalaxy
By Biotech Dental

BIOTECH DENTAL
GROUP

MES RÉGLAGES

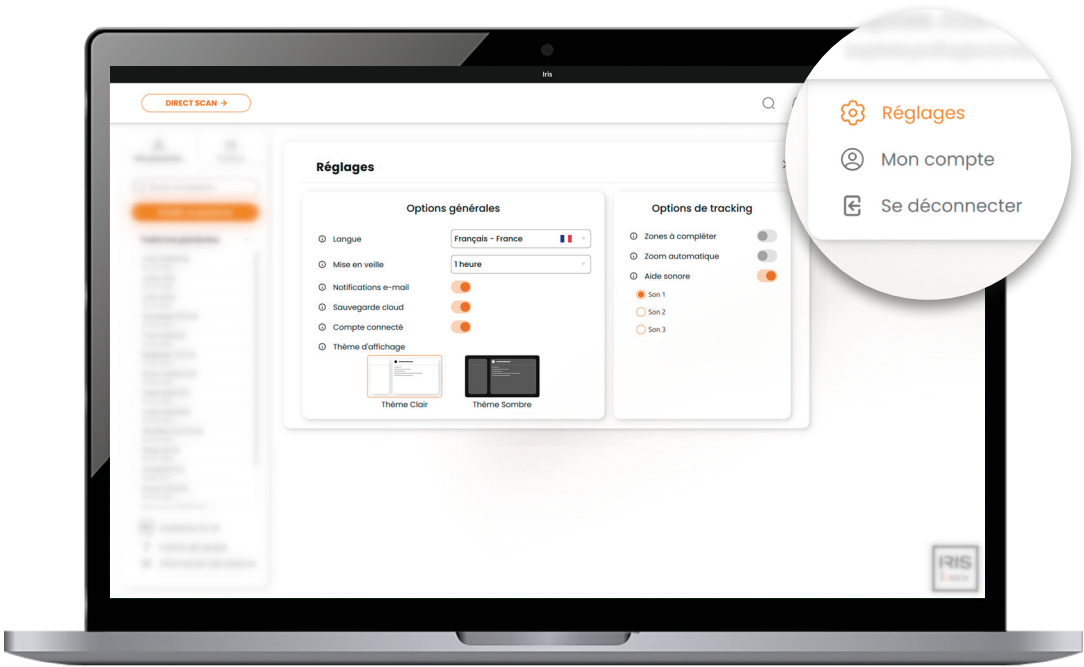

Choix de la langue, thème préféré et notifications

Choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez utiliser IRIS BY STARCK®. Adaptez votre thème d’affichage à votre environnement (clair ou sombre) pour garantir un maximum de confort visuel et choisissez d’activer ou non les notifications par mail pour suivre les changements de statuts des commandes à votre rythme.

Mise en veille automatique

Définissez un délai d’inactivité avant que l’application ne se déconnecte automatiquement et ne vous redemande l’entrée du mot de passe pour y accéder.



Si vous sélectionnez "Jamais", n’oubliez pas de vous déconnecter manuellement si vous vous absentez.

Jamais

10 minutes

15 minutes

30 minutes

45 minutes

1 heure

2 heures

3 heures

4 heures

5 heures

Jamais

Sauvegarde CLOUD : gratuite et sans limite

Activez et sauvegardez gratuitement vos données patients sur le cloud IRIS BY STARCK® dédié à votre compte, sous protection HDS et sécurisé ISO 27001. Vous devez être connecté à internet pour utiliser cette fonction. Si vous la désactivez, les données seront uniquement sauvegardées sur votre ordinateur.

Compte connecté

Utilisez votre licence sur tous les ordinateurs où IRIS BY STARCK® est installé. Activez cette fonctionnalité pour récupérer les données sauvegardées de l’ensemble de vos connexions.



Accéder à toute la
documentation.

Fabricant
Scan 4all

L'excellence, pour tous.
137 rue Garance 31670 Labège - FRANCE
N° SIRET 507 484 863 00059
 www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®
Dispositif médical de classe I (DM) destiné à la dentisterie numérique. CE.
Réservé aux professionnels de santé.
© Scan4all - Version 1.0 - 2026