


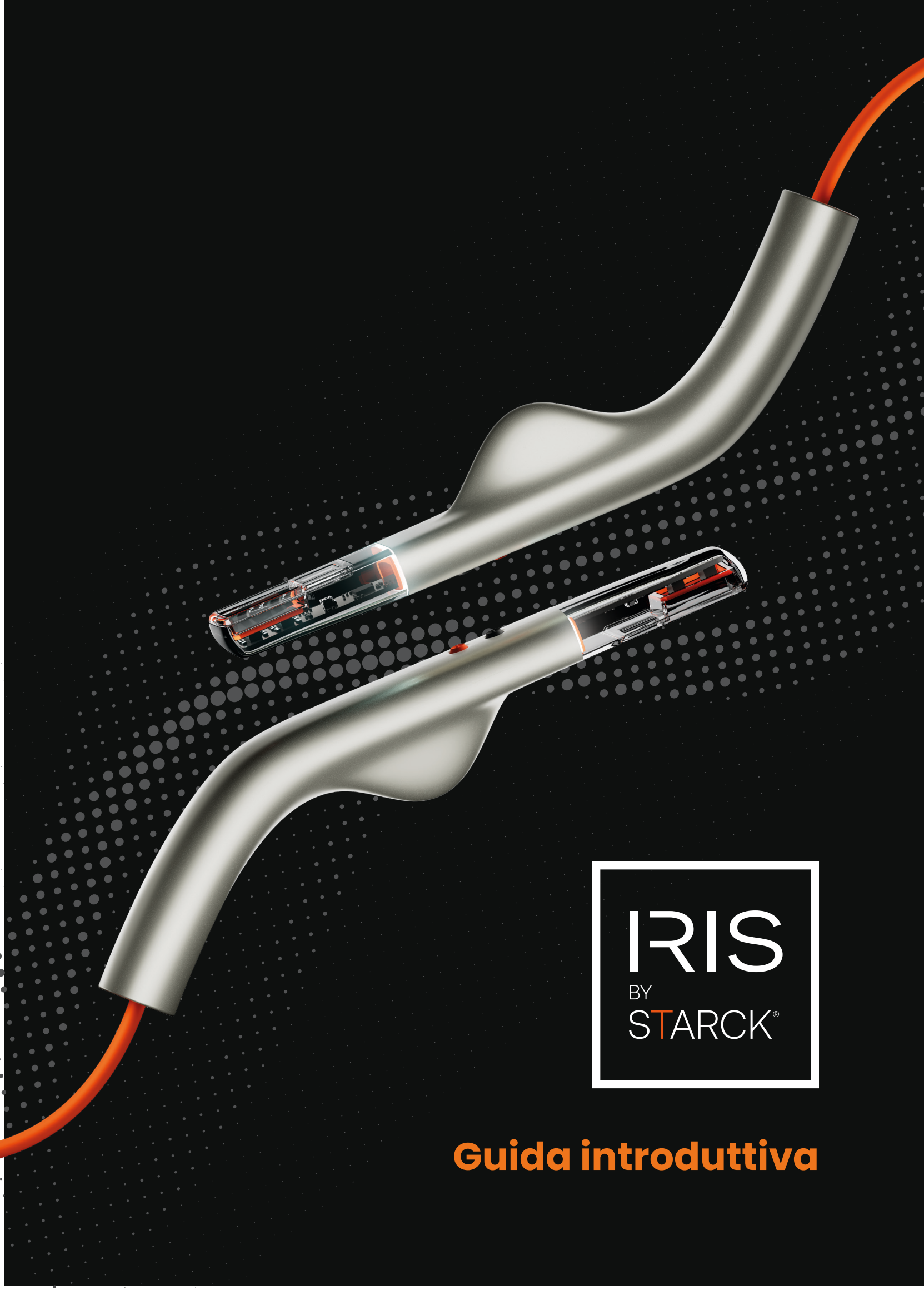

IRIS
BY
STARCK®

Guida introduttiva

CONGRATULAZIONI!

Hai appena acquistato IRIS BY STARCK®, una soluzione completa per la presa di impronte digitali dedicata ai professionisti della salute orale. Questo dispositivo medico combina uno scanner intraorale e un potente software proprietario per modellare in 3D l'intera cavità orale.

Approfittate di una piattaforma sicura, aperta, scalabile e interoperabile grazie a formati standard (STL e PLY) che consentono di centralizzare l'intero flusso del trattamento odontoiatrico: dalla visita iniziale alla realizzazione protesica, passando per la gestione delle cartelle cliniche dei pazienti, il lavoro collaborativo, gli scambi interprofessionali e il monitoraggio degli ordini.



Ma perché "BY STARCK"?

Sviluppato e prodotto da Scan4all, il manipolo è stato disegnato da Philippe Starck. Si distingue per le linee organiche biomimetiche e una forma adattata alla morfologia dell'utente.

INDICE

PRESENTAZIONE DEL DISPOSITIVO	4
ATTIVARE LA LICENZA	4
LA TUA PAGINA INIZIALE	5
UN PERCORSO SU MISURA.....	6
SCANSIONE IN TEMPO REALE.....	7
STRUMENTI PER LA SCANSIONE.....	8
I MIEI PAZIENTI	10
I MIEI ORDINI	11
IRIS CONNECT	12
IL MIO ACCOUNT	14
LE MIE IMPOSTAZIONI.....	15


PRESENTAZIONE DEL DISPOSITIVO



ATTIVARE LA LICENZA


Hai ricevuto un computer configurato da Scan4all?

Avvia IRIS BY STARCK®, clicca su “attiva il mio account” e inserisci il tuo numero di licenza durante la registrazione utilizzando il numero univoco riportato sulla tua scheda SECURE.ID

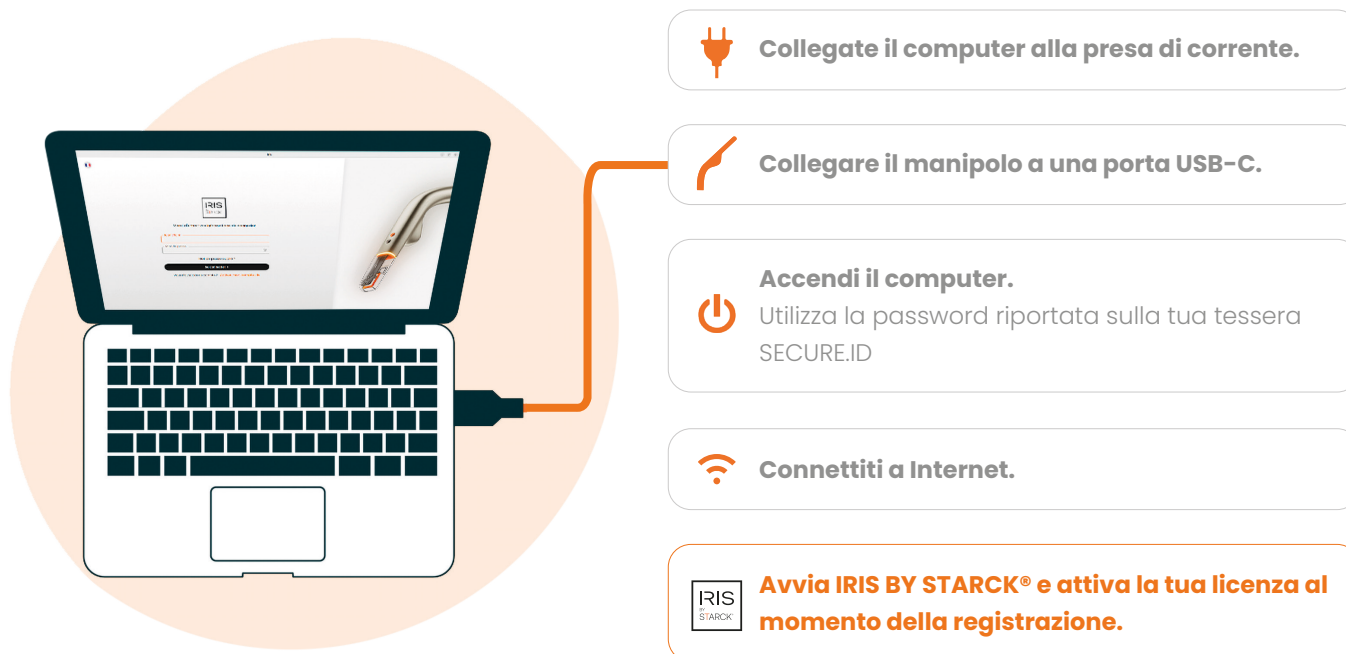

Posso utilizzare IRIS BY STARCK® senza connessione a Internet? Sì, una volta attivato, potrai scansionare e utilizzare il software IRIS senza alcuna limitazione. I tuoi ordini verranno inviati automaticamente non appena verrà stabilita la connessione a Internet.

LA TUA PAGINA INIZIALE

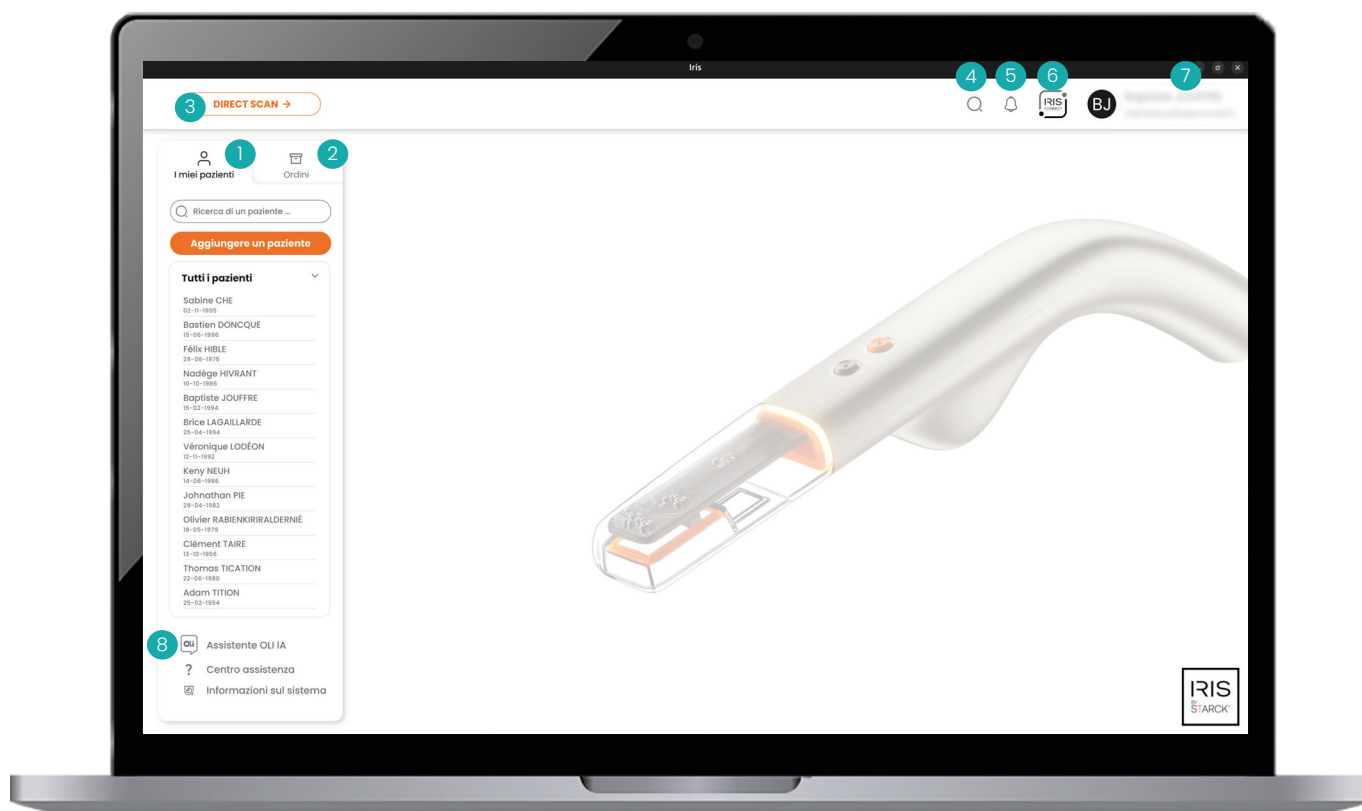

Approfitta di un ecosistema completamente libero, autonomo ed ergonomico che ti accompagna in modo naturale nella tua quotidianità.

- 1 **Gestire l'elenco di tutti i miei pazienti:** ricerca e aggiunta.
- 2 **Gestire i miei ordini:** creazione, monitoraggio e cronologia.
- 3 **Avviare una scansione** senza informazioni preliminari.
- 4 **Barra di ricerca** (pazienti, scansioni, ordini, contatti, collaboratori o assistenti).
- 5 **Centro notifiche** delle azioni relative ai tuoi contatti e ai tuoi ordini.
- 6 **IRIS CONNECT** : collaborare, chattare, condividere, gestire i miei contatti e il mio team.
- 7 **Il mio account e le mie impostazioni.**
- 8 **Chattare con OLI**, un'intelligenza artificiale integrata che fornisce assistenza tecnica di primo livello.

UN PERCORSO SU MISURA

Che si inizi con una scansione o con un ordine, l'interfaccia utente si adatta automaticamente alla vostra logica. Passate da un flusso all'altro in qualsiasi momento senza perdita di informazioni.



Il workflow corrisponde alle diverse fasi necessarie per l'invio di un ordine: dalla creazione della scheda protesica all'invio delle scansioni selezionate.

Per chi preferisce eseguire la scansione e poi organizzare


DIRECT SCAN →



Scansionate il vostro paziente senza attese grazie alla funzione **DIRECT SCAN**. Successivamente, salvate la scansione in una scheda paziente e create un ordine in un secondo momento.

DIRECT SCAN è un workflow flessibile. Questa modalità privilegia la reattività mantenendo tutte le consuete funzionalità.

Per chi preferisce pianificare prima di agire

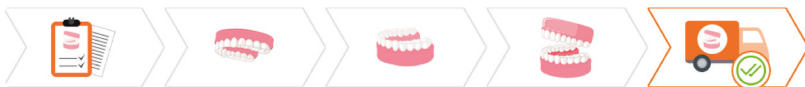

Modifica della scheda protesica ➤ Scansione mascellare ➤ Scansione mandibolare ➤ Scansione dell'occlusione ➤ Invio dell'ordine.

Il workflow GUIDATO vi assiste automaticamente in base al trattamento selezionato nella scheda protesica.

Ogni tipo di intervento avvia **le fasi di scansione necessarie per l'ordine**: basta seguire il percorso.

Hai comunque la libertà di personalizzare questo percorso.

Il workflow LIBERO, in cui ogni fase è indipendente (con un clic).

Siete voi a dover eseguire le scansioni necessarie per un ordine completo, selezionando autonomamente le fasi.



Dalla scheda "Ordini" o dalla scheda paziente, clicca su "Nuovo ordine". Compila la scheda protesica e scegli la modalità di workflow che preferisci (guidato o libero).

SCANSIONE IN TEMPO REALE



Collegare il computer a una presa di corrente.

Evitare qualsiasi fonte di luce diretta sull'area da scansionare.

Indossare guanti neri.

Asciugare la bocca e i denti.

Iniziare la scansione.



Per iniziare la scansione, è possibile partire dalla superficie oclusale, proseguire con quella linguale o palatale e terminare con quella vestibolare.



Per gli incisivi, eseguire un movimento oscillatorio sull'asse oclusale e terminare scorrendo leggermente sulla superficie anteriore.

Scansionare alla giusta distanza: calibrazione automatica

Posizionare la punta parallelamente e a contatto con la dentatura garantisce la giusta distanza per una scansione precisa.

Eseguire la scansione con un ritmo regolare: mantenere un movimento fluido

Adottare una velocità in sintonia con il ritmo di visualizzazione della vista 3D e privilegiare la stabilità del movimento, come un pennello lungo una tela. Lo scanner IRIS BY STARCK® scivola sulla dentatura, senza scatti né fretta.

Segnale luminoso

Accesso o spento: bianco, la telecamera è accesa.

Stato del tracciamento: identico alla vista di scansione.

Verde: tracciamento in corso.

Giallo: rallentare, la scansione si sta stabilizzando.

Rosso: perdita di tracciamento.

Avviare la scansione.

Mettere in pausa.

Riprendere.

Confermare e avviare

la ricostruzione finale.



Per garantire una buona esperienza di scansione: utilizzare l'icona del cronometro (in alto a destra nella vista di scansione in tempo reale).

Grigio: è possibile continuare.

Giallo: scansione rallentata.


Rosso: dare priorità all'avvio della ricostruzione finale. Sarà possibile riprendere la scansione grazie allo strumento "Riprendi la scansione".

STRUMENTI PER LA SCANSIONE

IRIS BY STARCK® offre una suite di strumenti per controllare, regolare, analizzare e arricchire le scansioni.

Ottimizzate la visualizzazione

Sfruttate le **funzioni di visualizzazione** 1 per visualizzare il formato PLY o STL, acquisire schermate, modificare il punto di vista della scansione, giocare con la trasparenza e scegliere quali misure rendere visibili o meno.

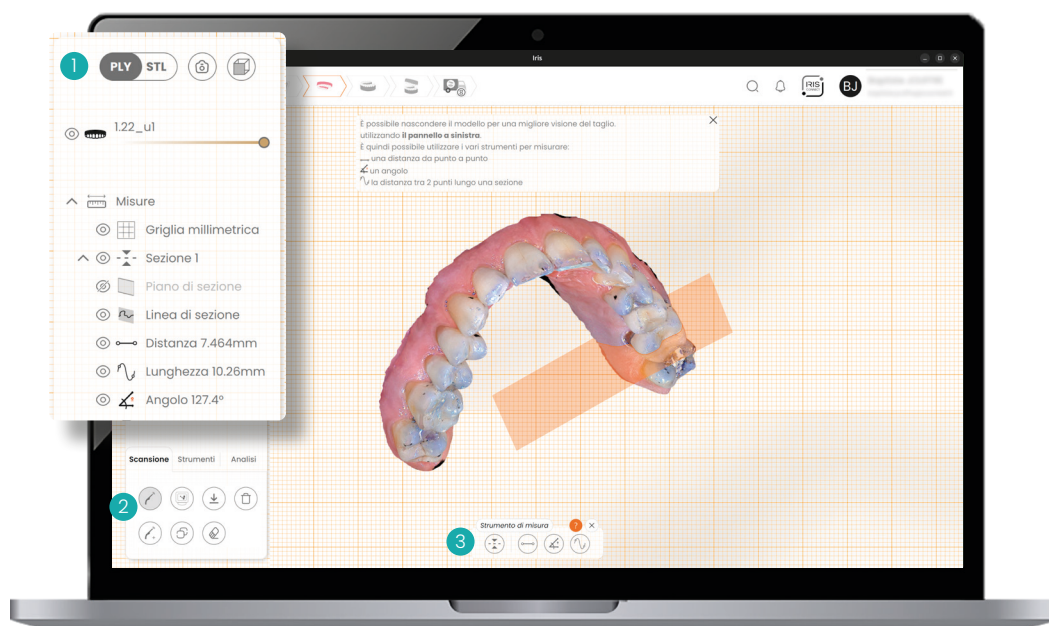

Accedete a **funzionalità avanzate di analisi, ritocco o personalizzazione** 2 attraverso tre schede complementari: Scansione, Strumenti e Analisi.

💡 Traccia una sezione 3 su un piano 2D per facilitare l'individuazione e visualizza la griglia millimetrata per una precisione ancora maggiore.

Padroneggiate ogni dettaglio della vostra scansione


Sfruttate le funzionalità relative alla **gestione della scansione**, gli **strumenti** a supporto della vostra attività clinica e le possibilità **di analisi comparative e misurazioni**.



Tutti gli strumenti disponibili

SCANSIONE	STRUMENTI	ANALISI
 Ripeti la scansione	 Visualizza le linee di finitura	 Curvatura
 Aggiungi una scansione	 Creare una linea di definizione manuale	 Rugosità
 Copia la scansione	 Creare una linea di definizione automatica	 Confronto
 Cancella la scansione	 Modifica il tipo di base	 Misure
 Scarica la scansione	 Etichettare	
 Elimina la scansione	 Aggiungere uno scanbody	
 Fotogrammetria		

Ancora più precisione nell'occlusione

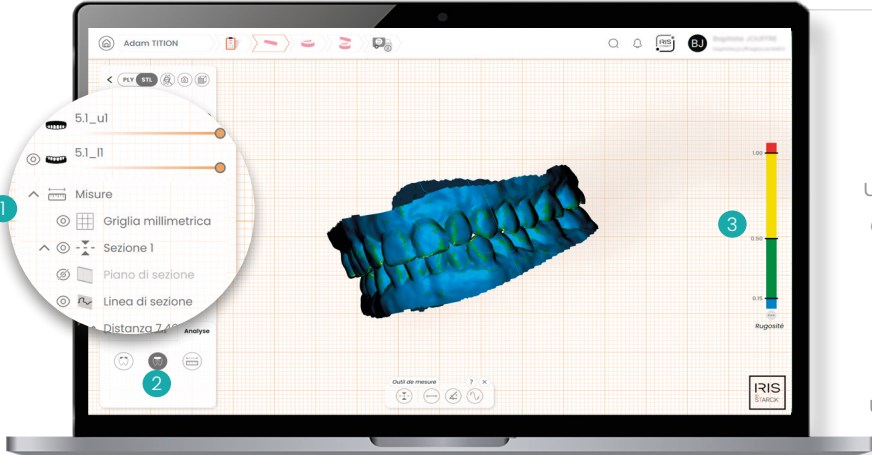

 Aggiungere una scansione all'occlusione	 Ottimizzazione dell'intercuspidazione
 Aggiungere un'occlusione	 Regolare manualmente

Troverete tutte le **funzioni di visualizzazione** 1 e gli strumenti di analisi precedenti, oltre a **funzionalità aggiuntive e specifiche per l'occlusione** 2.


Ottimizzazione dell'intercuspidazione

Perfeziona automaticamente l'intercuspidazione grazie a un allineamento basato sulle zone di contatto precedentemente identificate.


3 Personalizza la scala dei valori

I codici colore vi aiutano a individuare rapidamente le zone critiche. È possibile definire la propria scala cromatica.

I MIEI PAZIENTI

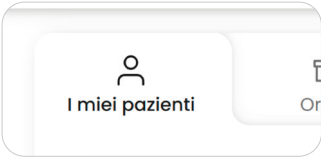

Nella pagina iniziale, la scheda “I miei pazienti” consente di accedere rapidamente all’elenco di tutti i pazienti, di aggiungerne di nuovi, di consultare e gestire le loro informazioni o di visualizzare la cronologia delle loro prestazioni (vedi sotto).

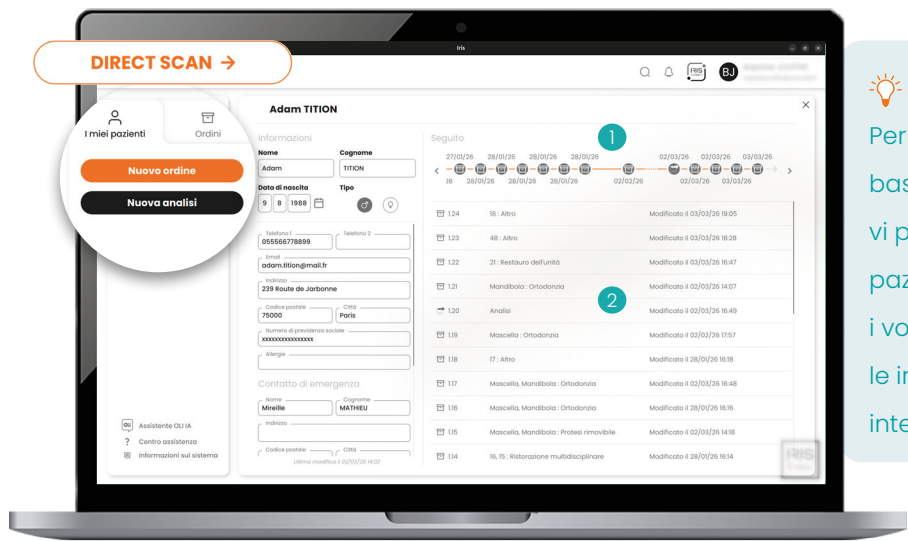

Risparmia tempo

Per creare una scheda paziente bastano solo 4 informazioni, il che vi permette di registrare un nuovo paziente in pochi secondi, mentre i vostri assistenti possono inserire le informazioni aggiuntive senza interrompere il vostro workflow.

Selezionando un paziente, potrai usufruire di una visualizzazione ottimizzata della cronologia delle prestazioni effettuate sulla sua timeline **1** e in un elenco cronologico **2**. Ogni azione viene registrata nella scheda paziente.

3 tipi di prestazioni



DIRECT SCAN



ORDINE



ANALISI

Mantenete il controllo

Diritti	No	Letture	Scrittura
Scheda paziente	☐	☒	☐
Discussione	☒	☐	☐

Annullamento **Validare**

Imposta diritti di accesso personalizzati per consentire ai tuoi assistenti di completare le informazioni (vedi “IRIS CONNECT”, pagina 12).


Ricerca rapida

Dalla barra di ricerca della scheda o tramite la barra di ricerca generale: individuate rapidamente il vostro paziente per accedere alla sua scheda.

Cancellazione definitiva: in caso di cancellazione di un paziente, tutte le sue informazioni e tutte le scansioni associate vengono eliminate definitivamente. Non viene conservata alcuna archiviazione, in conformità con la legislazione vigente.

I MIEI ORDINI

Nella pagina iniziale, la scheda “Ordini” ti permette di **accedere a un monitoraggio completo di tutti i tuoi ordini**. Puoi aggiungere un ordine in qualsiasi momento direttamente da questa sezione.

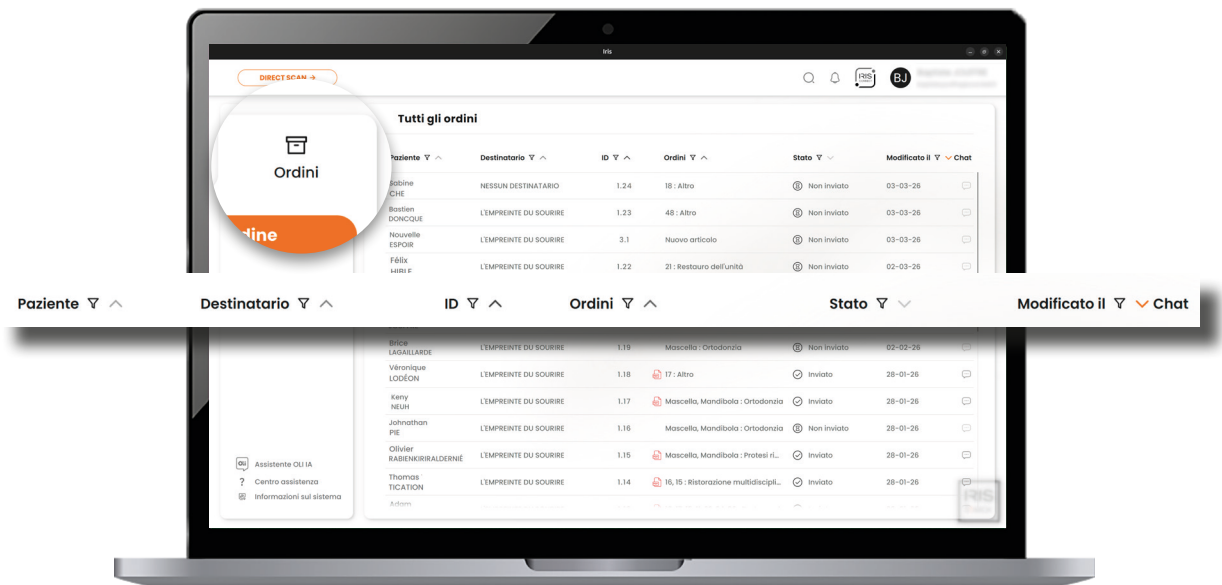

Una chat dedicata per seguire la conversazione relativa a ogni singolo ordine.

Effettuare un ordine

Niente di più semplice.

Dalla scheda “Ordini” o direttamente dalla scheda paziente: clicca su **“Nuovo ordine”**, scegli il tuo partner, compila la scheda protesica e segui il workflow di scansione che preferisci.

Scelta dei partner

Salvare e inviare gli ordini ai propri partner direttamente da IRIS BY STARCK® durante la creazione di un ordine:

Sincronizzazione LaGalaxy

Sincronizzate i vostri dati tramite il vostro account LaGalaxy per garantire un aggiornamento continuo dei dati (da attivare da **“Il mio account”**).


Partner integrati

Scegli uno dei partner integrati in IRIS BY STARCK® (ad es. SMILERS, CIRCLE) per inviare l'ordine al tuo account presso quel partner.

IRIS CONNECT

Invita i tuoi partner tramite IRIS CONNECT. Potranno ricevere i tuoi ordini e interagire con te tramite messaggi (vedi **“IRIS CONNECT”**, pagina 12).

IRIS CONNECT

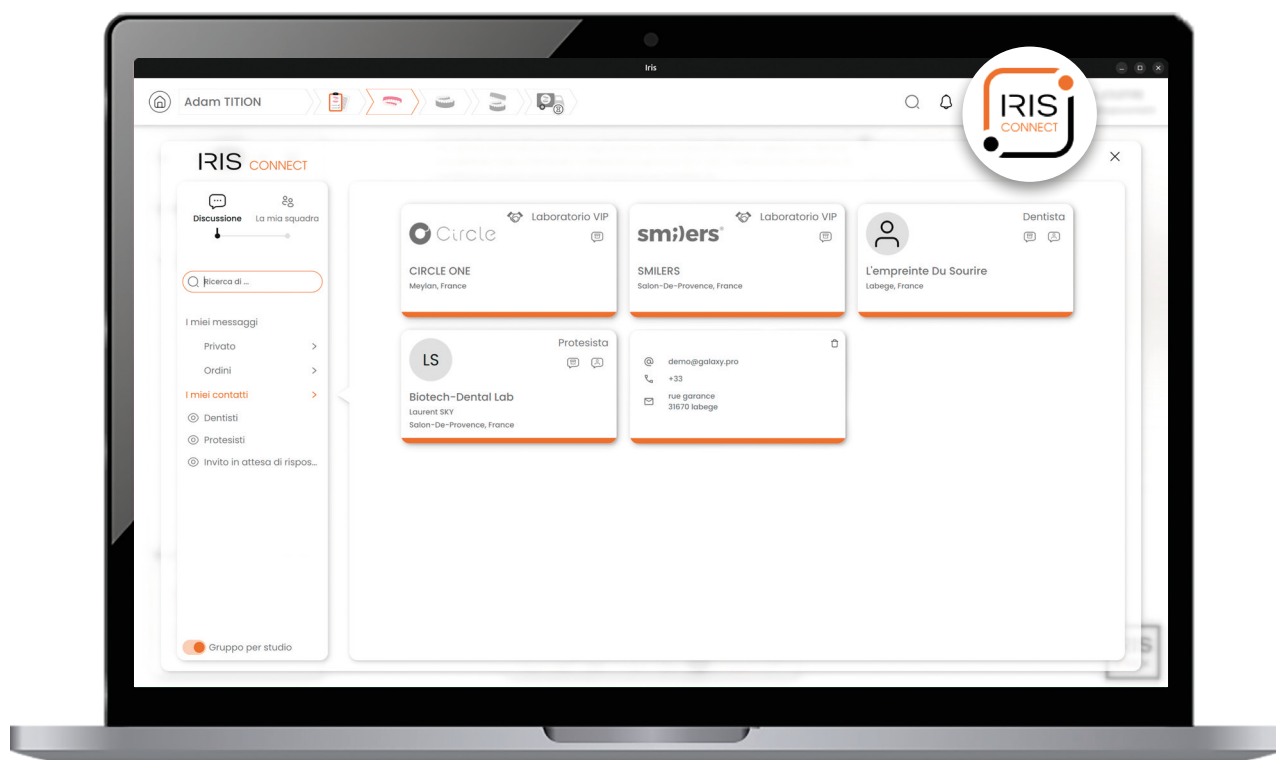

Massima sicurezza

- › Ambiente di condivisione protetto.
- › Certificazione ISO 27001 e HDS.

Creazione di team su misura

- › Crea il tuo team in qualità di amministratore
- › Gestione dei ruoli su misura per la tua organizzazione; diritti di accesso alle cartelle cliniche e alle discussioni:
 - per i tuoi collaboratori.
 - per i tuoi assistenti.

Messaggistica istantanea

- › Gestione automatica dei messaggi.
- › Notifiche intelligenti.

Approfitta delle chat dedicate:

- per i tuoi ordini.
- per le tue chat private.


Gestione semplificata degli ordini

- › Inoltro automatico degli ordini offline.
- › Stato degli ordini.
- › Notifiche relative all'aggiornamento dello stato.
- › Cronologia delle conversazioni.

Collaborazione senza limiti

- › Rubrica esclusiva della rete IRIS BY STARCK®.
- › Integrazione dei vostri contatti esterni.
- › Formato file universale (STL).
- › Interfaccia web esterna protetta.

Un'interfaccia web per i vostri partner esterni

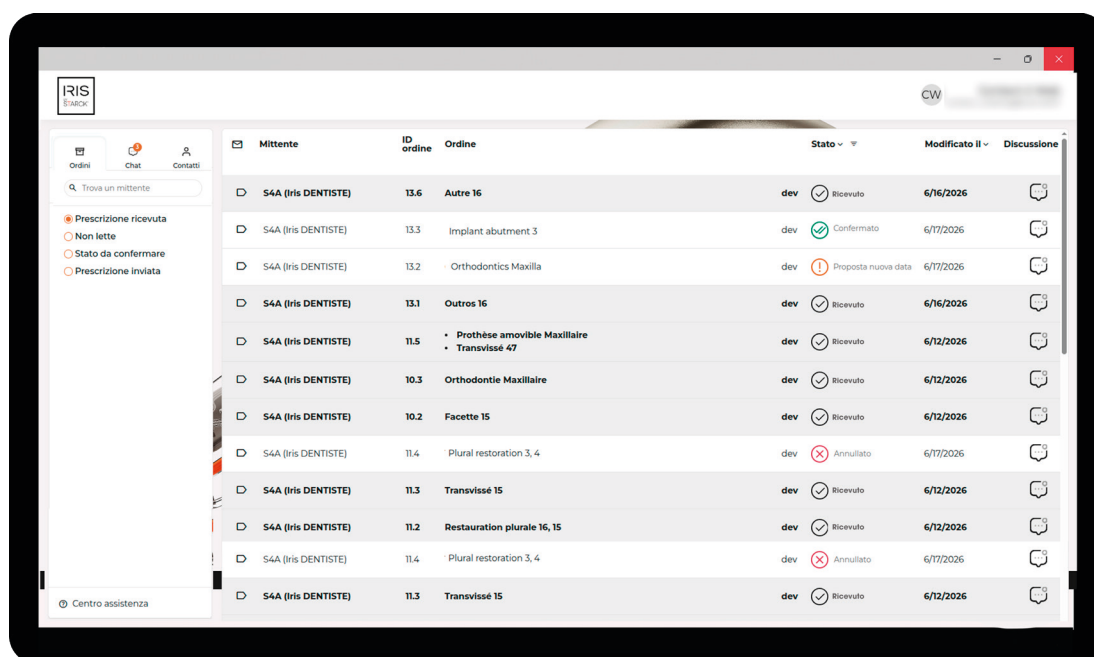

IRIS BY STARCK® WEB è un'interfaccia di scambio universale e sicura per voi e i vostri partner esterni.

Oltre a disporre di uno scanner di ultima generazione, avete la possibilità di invitare qualsiasi collega, clinica o laboratorio a collaborare sull'ordine di vostra scelta.

IRIS CONNECT Invitare un partner esterno

Non riuscite a trovare il vostro contatto?

Inviare un invito via e-mail

Da IRIS CONNECT, utilizzate il campo di ricerca per trovare rapidamente un collaboratore. Se non fa parte della rubrica IRIS BY STARCK®, **inserite il suo indirizzo e-mail per invitarlo**. Riceverà un link di registrazione associato a un codice di sicurezza univoco per creare il proprio account web su www.irisbystarck.com

Partner integrati


IRIS BY STARCK® offre **partner integrati**: al momento della creazione di un ordine, scegliete quello che preferite come destinatario per ritrovarlo direttamente sul vostro account partner.

Rimani aggiornato

Le notifiche, visibili dall'icona nella parte superiore della pagina iniziale , vi tengono aggiornati sulle azioni relative ai vostri contatti e ai vostri ordini: rispondere o inviare un invito di contatto, oppure essere informati di un cambiamento di stato dell'ordine (confermato, annullato, modificato).


IL MIO ACCOUNT

La scheda "Il mio account" vi permette di **consultare e modificare i vostri dati personali** in qualsiasi momento. Pratica e veloce, vi garantisce il controllo totale dei vostri dati direttamente dalla vostra interfaccia IRIS BY STARCK®.

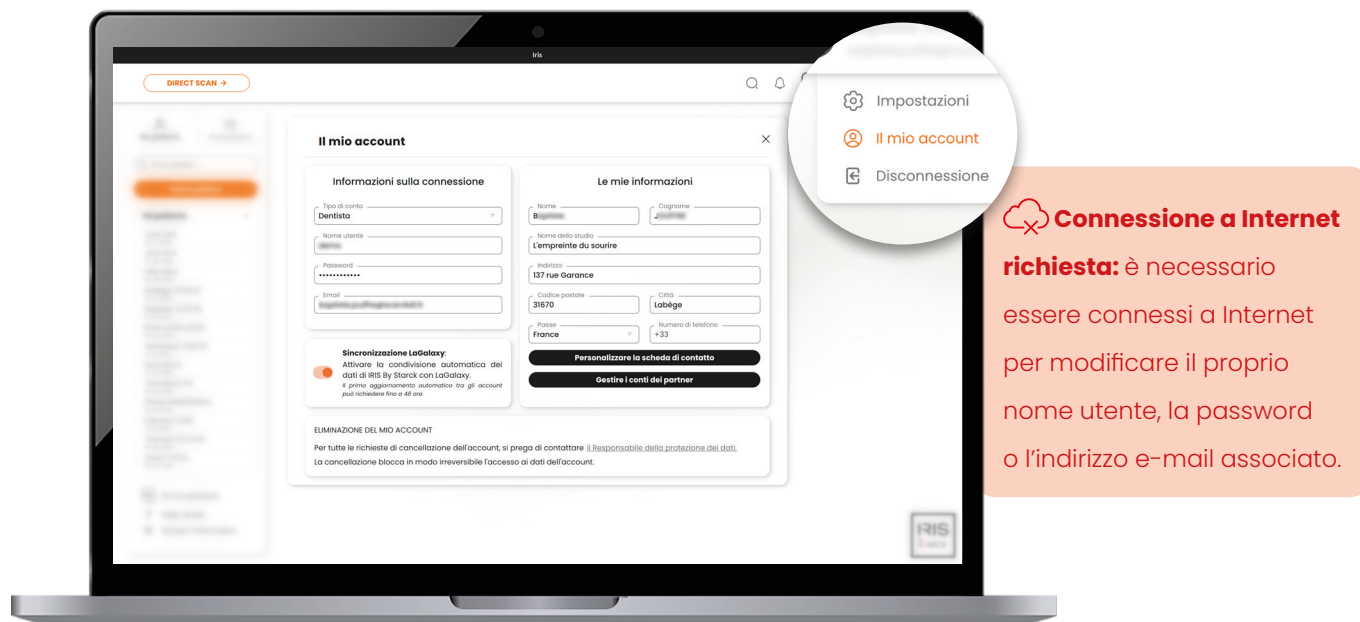

La tua rete professionale esclusiva

La tua visibilità sulla rete esclusiva IRIS BY STARCK® dipende da te. Approfitta dei vantaggi collaborativi di IRIS BY STARCK® entrando a far parte della rubrica della comunità, mantenendo al contempo il pieno controllo delle tue informazioni.

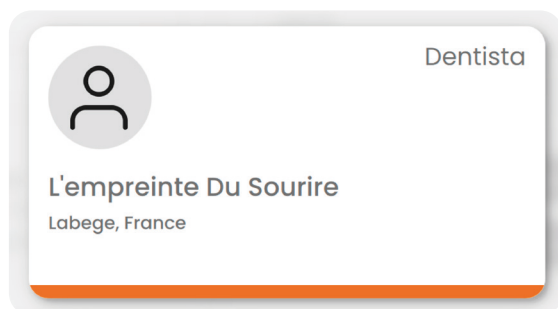

Personalizza le informazioni visualizzate sulla tua scheda di contatto (generata automaticamente): sei libero di condividere o nascondere il nome del tuo studio, così come il tuo nome e cognome.

Collegamento con LaGalaxy


Tutto il tuo mondo odontoiatrico, sincronizzato su un ecosistema digitale protetto che riunisce l'insieme dei prodotti e delle soluzioni del Gruppo Biotech Dental. Una volta attivata la sincronizzazione, i tuoi pazienti, le scansioni e gli ordini IRIS BY STARCK® saranno disponibili nel tuo spazio LaGalaxy.

Maggiori informazioni su www.biotechgalaxy.com

LaGalaxy
By Biotech Dental

BIOTECH DENTAL
GROUP

LE MIE IMPOSTAZIONI

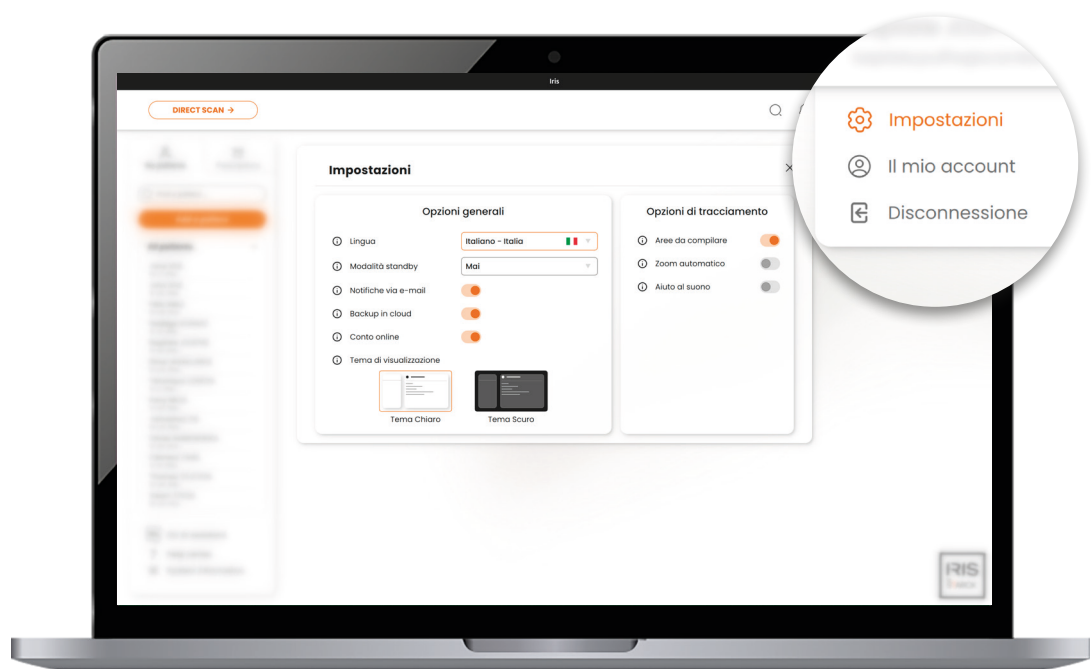

Sceita della lingua, tema preferito e notifiche

Scegli la lingua in cui desideri utilizzare IRIS BY STARCK®. Adatta il tema di visualizzazione al tuo ambiente (chiaro o scuro) per garantire il massimo comfort visivo e scegli se attivare o meno le notifiche via e-mail per seguire gli aggiornamenti di stato degli ordini secondo i tuoi ritmi.

Sospensione automatica

Imposta un intervallo di inattività dopo il quale l'applicazione si disconnetterà automaticamente e ti chiederà nuovamente di inserire la password per accedervi.



Se selezioni “Mai”, non dimenticare di disconnetterti manualmente se ti allontani dal dispositivo.

Mai
10 minuti
15 minuti
30 minuti
45 minuti
1 ora
2 ore
3 ore
4 ore
5 ore
Mai

Backup su CLOUD: gratuito e illimitato

Attiva e salva gratuitamente i dati dei tuoi pazienti sul cloud IRIS BY STARCK® dedicato al tuo account, protetto da HDS e conforme alla norma ISO 27001. Per utilizzare questa funzione è necessario essere connessi a Internet. Se la disattivi, i dati verranno salvati esclusivamente sul tuo computer.

Account connesso

Utilizza la tua licenza su tutti i computer su cui è installato IRIS BY STARCK®. Attiva questa funzionalità per recuperare i dati salvati da tutte le tue sessioni di accesso.



Accedi a tutta la
documentazione.

Produttore
Scan 4all

L'eccellenza, per tutti.
137 rue Garance 31670 Labège - FRANCIA
N° SIRET 507 484 863 00059
 www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®
Dispositivo medico di classe I (DM) destinato all'odontoiatria digitale. CE.
Riservato agli operatori sanitari.
© Scan4all - Version 1.0 - 2026