



Scan⁴all
präsentiert

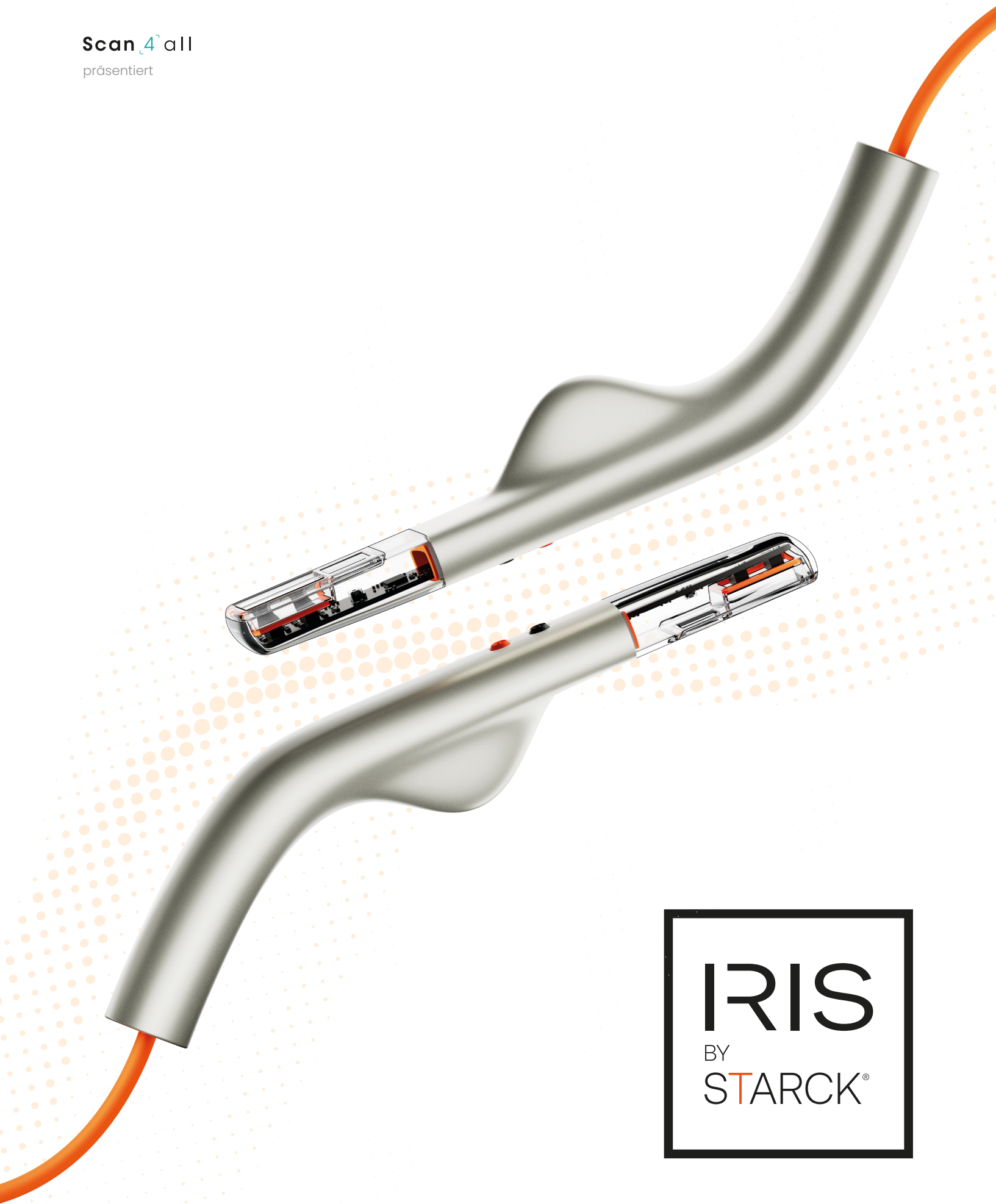

IRIS
BY
STARCK®


INSIDE / **Tools rund um den scan**

BEHALTEN SIE JEDES DETAIL IHRES SCANS IM GRIFF

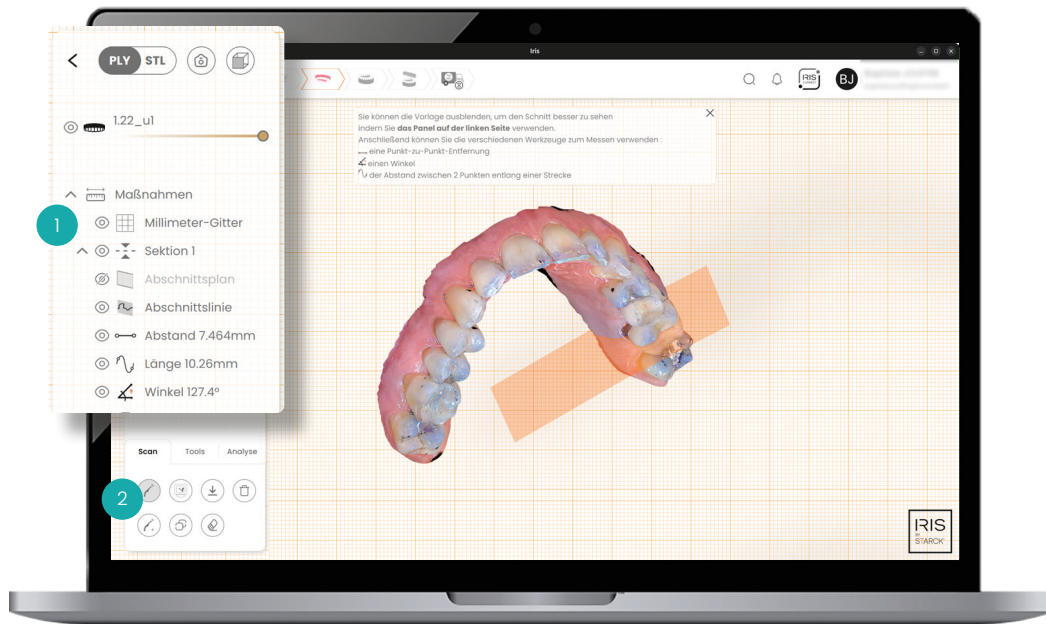

IRIS BY STARCK® bietet Ihnen eine Reihe von Tools zur Kontrolle, Anpassung, Analyse und Bereicherung Ihrer Scans. Nutzen Sie die **Visualisierungsfunktionen** ① und greifen Sie über drei ergänzende Registerkarten auf erweiterte **Analyse-, Bearbeitungs- oder Anpassungsfunktionen** ② through three complementary tabs: Scan, Tools, and Analysis.

VISUALISIERUNGSFUNKTIONEN

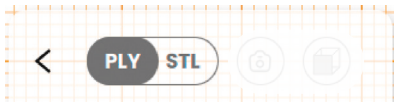


Ändern Sie den Rendering-Modus : PLY oder STL



Bild aufnehmen : Greifen Sie mit einem Klick auf  zu Halten Sie den aktuellen Zustand Ihres 3D-Modells fest und/oder laden Sie die Dateien in einen Ordner Ihrer Wahl auf Ihrem Computer herunter.



Blickwinkel : Passen Sie Ihren Scan schneller an. Wählen Sie zwischen verschiedenen Ansichten, um Ihre Analyse zu erleichtern.

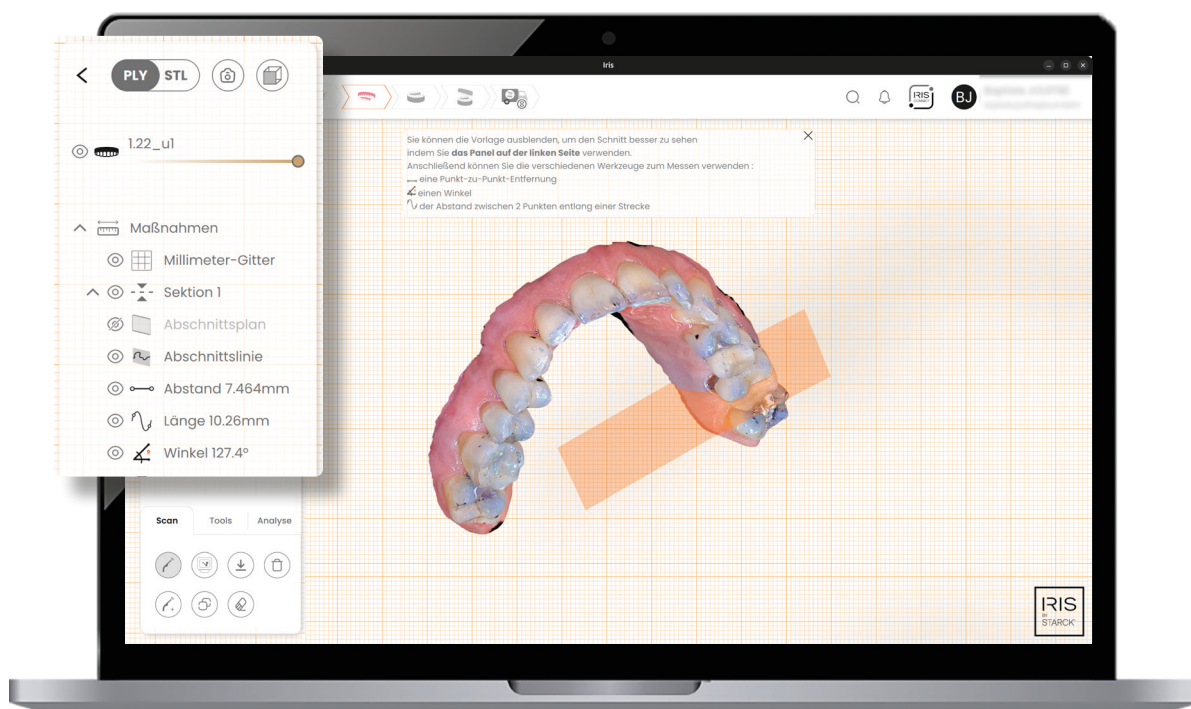

Auge : Aktivieren/deaktivieren Sie die Anzeige des entsprechenden Elements, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren (Scan, Gitter oder Messungen).




Weichgewebeanzeige : Aktivieren/deaktivieren Sie die automatische Segmentierung von Weichgewebe und Zähnen, um das Zahnfleisch auszublenden



Transparenz : Verwalten Sie die Intensität des entsprechenden Elements frei. Besonders nützlich beim Vergleich von Scans oder Messungen.

REGISTERKARTE "SCAN" : ABDRUCK VERWALTEN UND BEARBEITEN

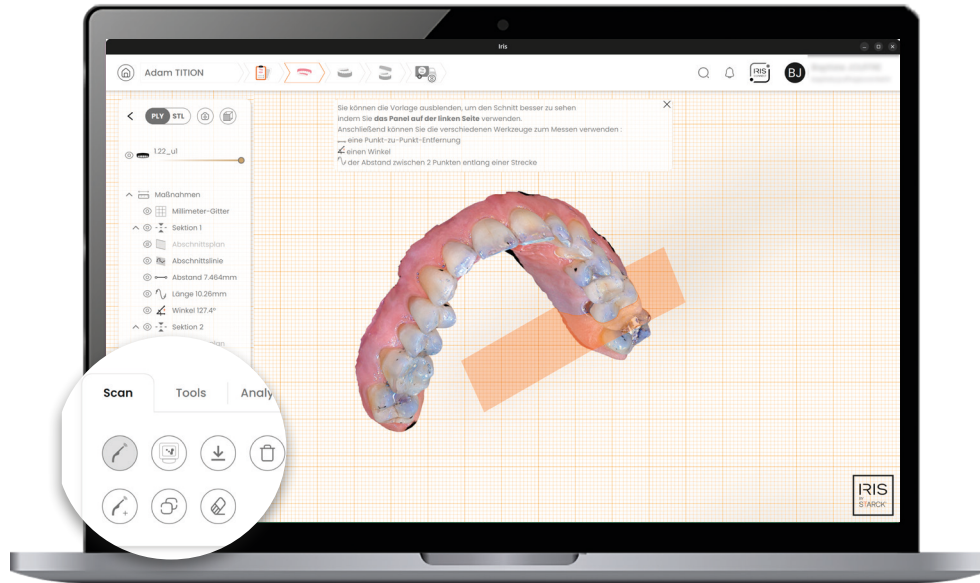

Verwalten und bearbeiten Sie Ihre Scans ganz einfach, um die Patientenhistorie zu ergänzen.



Scan wiederholen

Vervollständigen Sie den Scan oder korrigieren Sie einen unvollständigen Bereich.



Scan hinzufügen

Ergänzen Sie die Patientenakte mit einem zusätzlichen Scan (Oberkiefer oder Unterkiefer).



Fotogrammetrie

Kombinieren Sie einen extraoralen Scan mit Ihrem intraoralen Scan, um eine präzise und exakte Übereinstimmung zwischen der Position der Zahnimplantate und der in der Software geplanten Position zu erzielen.



Scan kopieren

Duplizieren Sie den Scan sofort.



Scan herunterladen

Exportieren Sie die STL- und PLY-Datei Ihres Scans direkt in einen Ordner Ihrer Wahl auf Ihrem PC.



Scan radieren

Korrigieren Sie den gewünschten Bereich, indem Sie Unvollkommenheiten mit Radiergummis in verschiedenen Größen entfernen.

- › Der 2D-Radiergummi entfernt alles, was auf dem Bildschirm sichtbar ist – manipulieren Sie das Modell, um es anzupassen.
- › Der 3D-Radiergummi entfernt den ausgewählten Bereich in der Tiefe, ohne dass Sie das Modell manipulieren müssen.



Scan löschen

Wählen Sie den Scan, den Sie löschen möchten, im Workflow aus.

REGISTERKARTE "TOOLS": SELBSTSTÄNDIGE VERBESSERUNG



Passen Sie Ihre Modelle mit den erweiterten Modellierungs- und Anmerkungenfunktionen an.



Fertigstellungslinien anzeigen

Aktivieren Sie diese Option, um die Linien anzuzeigen. Andernfalls lassen Sie sie deaktiviert



Manuelle Abschlusslinie erstellen

Zeichnen Sie Ihre Linien frei mit der Maus Punkt für Punkt.



Automatische Abschlusslinie erstellen

Wird automatisch generiert und kann anschließend manuell geändert werden.



Ändern Sie den Sockeltyp

Nach Zahnbogen: halb oder vollständig.
Nach Typ: einfach, gerade oder ohne Sockel. Offen oder geschlossen mit einstellbarer Dicke und Höhe.



Beschriften


IRIS BY STARCK® berechnet automatisch die Segmentierung. Anschließend können Sie manuelle Anpassungen vornehmen, indem Sie Ihren Zahn, GEN (Zahnfleisch), SB (Scanbody) oder PREP (Präparation) auswählen.



Scanbody hinzufügen

Vereinfacht die Implantatkonstruktion, auch wenn Sie dies ursprünglich nicht vorgesehen hatten. Füllen Sie das Prothesenblatt aus, überprüfen Sie die Positionierung und befolgen Sie das erforderliche Scanverfahren.

REGISTERKARTE "ANALYSE" : ERKUNDEN UND ANALYSIEREN

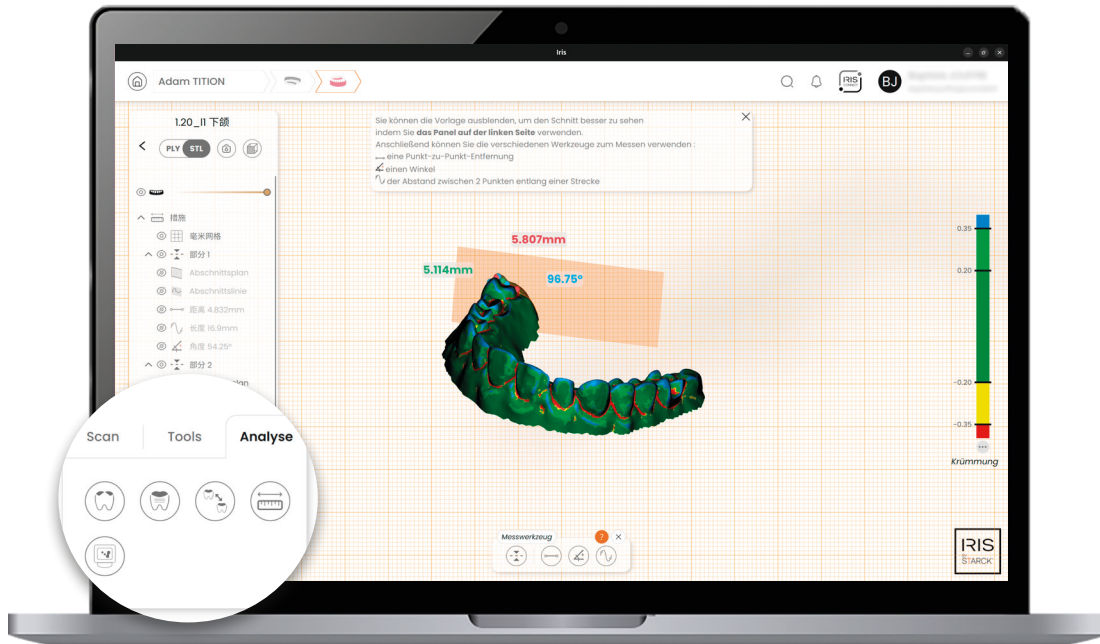

Untersuchen Sie Ihre Scans mithilfe der Analysewerkzeuge eingehend.



Krümmung

Visualisieren Sie Krümmungen anhand einer anpassbaren Messskala.



Rauheit

Erkennen Sie Oberflächenunregelmäßigkeiten anhand einer anpassbaren Skala.



Erweiterte Messungen

Messen Sie einen Abstand Punkt für Punkt, von einem Winkel oder einer Fläche.



Zeichnen Sie einen Ausschnitt auf einer 2D-Ebene, um die Lokalisierung zu erleichtern, und zeigen Sie das Millimeterraster für noch mehr Präzision an.




Vergleich

Wählen Sie im Verlauf der Patientenakte zwei Modelle aus, die Sie vergleichen möchten. Markieren Sie auf jedem Modell die übereinstimmenden Punkte. Dank der automatischen Überlagerung können Sie Abweichungen analysieren und den Behandlungsverlauf verfolgen.



Jede der Analysefunktionen projiziert die Ergebnisse in den Anzeigebereich und ermöglicht es Ihnen, die Werte anzuzeigen oder auszublenden.

NOCH MEHR FACHWISSEN ZUR OKKLUSION

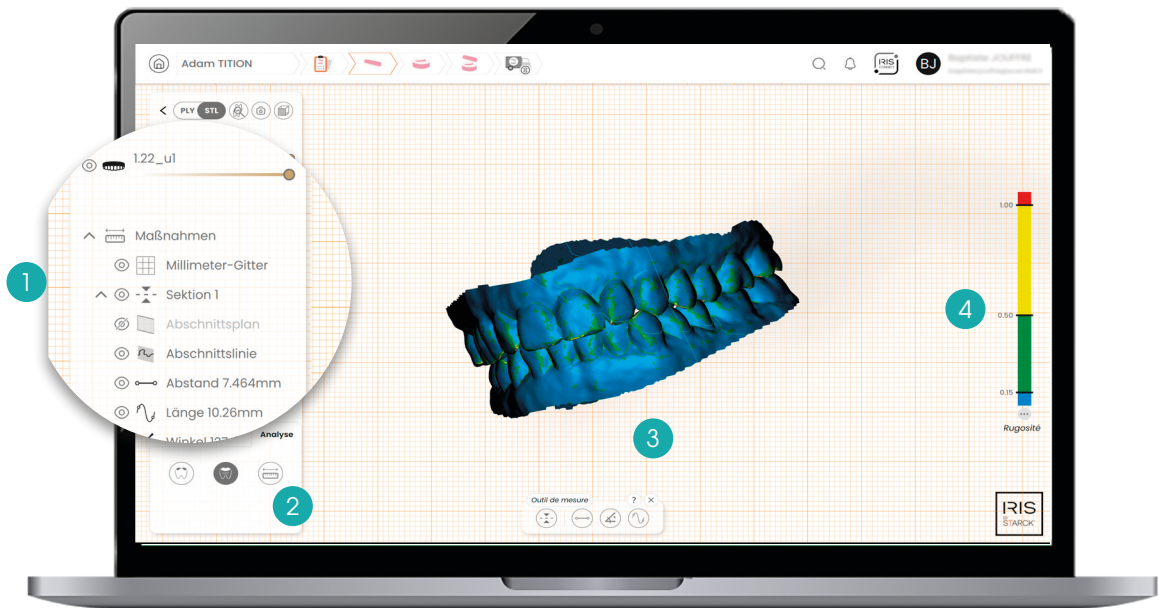

Hier finden Sie **alle üblichen Anzeige** **1** und Analysefunktionen sowie zusätzliche Funktionen **speziell für die Okklusion** **2** :

OKKLUSION	WERKZEUGE	ANALYSE
 Scan zur Okklusion hinzufügen	 Optimierung der Interkuspidien	 Krümmung
 Okklusion hinzufügen	 Manuell anpassen	 Rauheit
 Okklusion herunterladen	 Sockeltyp ändern	 Erweiterte Messungen
 Okklusion löschen	 Letzte Bewegung rückgängig machen	

3 Optimierung der Interkuspidien
Optimieren Sie den Abstand zwischen den Zähnen automatisch durch eine Ausrichtung auf Basis zuvor identifizierter Kontaktbereiche. Nehmen Sie je nach Bedarf manuelle Anpassungen vor.

4 Passen Sie die Werteskala an
Farbcodes helfen Ihnen, kritische Bereiche schnell zu lokalisieren. Sie können Ihre eigene Farbskala definieren.

MIT IRIS BY STARCK® NOCH WEITER KONNEN.

Entdecken Sie alle Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen.



Inside / **Einführungshandbuch**



Inside / **Meine Einstellungen**



Inside / **DIRECT SCAN**



Inside / **Mein Konto**



Inside / **Systeminformationen**



Inside / **Tools rund um den Scan**



Inside / **IRIS Connect**



Inside / **Kundendienst**



Inside / **Meine Bestellungen**



Inside / **Echtzeit-Scan**



Inside / **Meine Benachrichtigungen**



Inside / **Computerspezifikationen**



Inside / **Mein Partner**




Inside / **Geführter Workflow**



Inside / **Meine Patienten**



Inside / **Offener workflow**

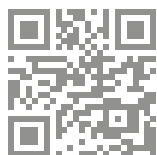

Auf die gesamte
Dokumentation
zugreifen.

Hersteller

Scan4all

Exzellenz, für alle.

137 rue Garance 31670 Labège - FRANCE

N° SIRET 507 484 863 00059

www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®

Medizinisches Gerät der Klasse I (MD) für die digitale Zahnmedizin. CE.

Nur für medizinisches Fachpersonal.

© Scan4all - Version 1.0 - 2026