



Scan⁴all
presenta

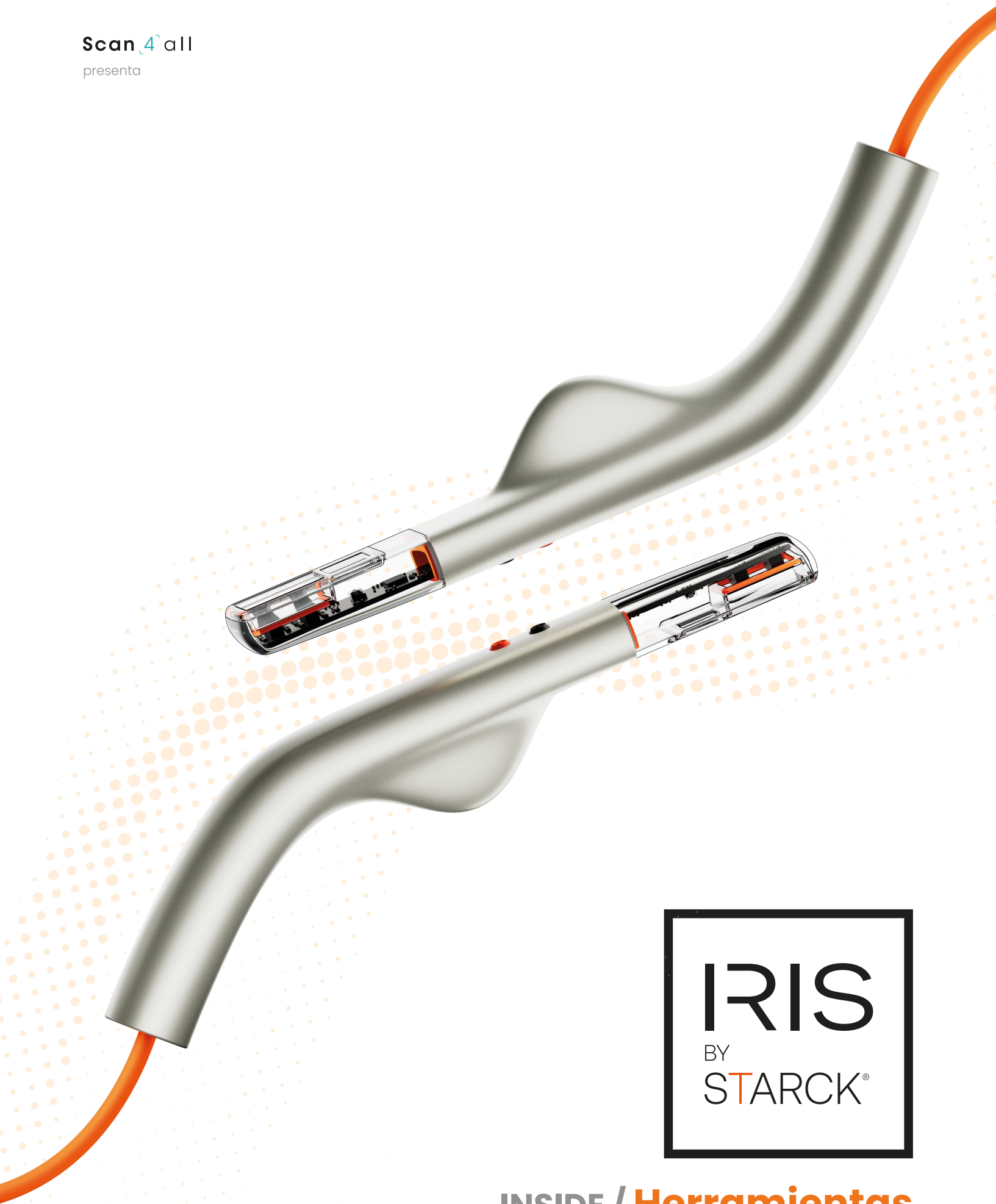

IRIS
BY
STARCK®


INSIDE / **Herramientas
relacionadas con el escaneado**

CONTROLE CADA DETALLE DE SU ESCANEO

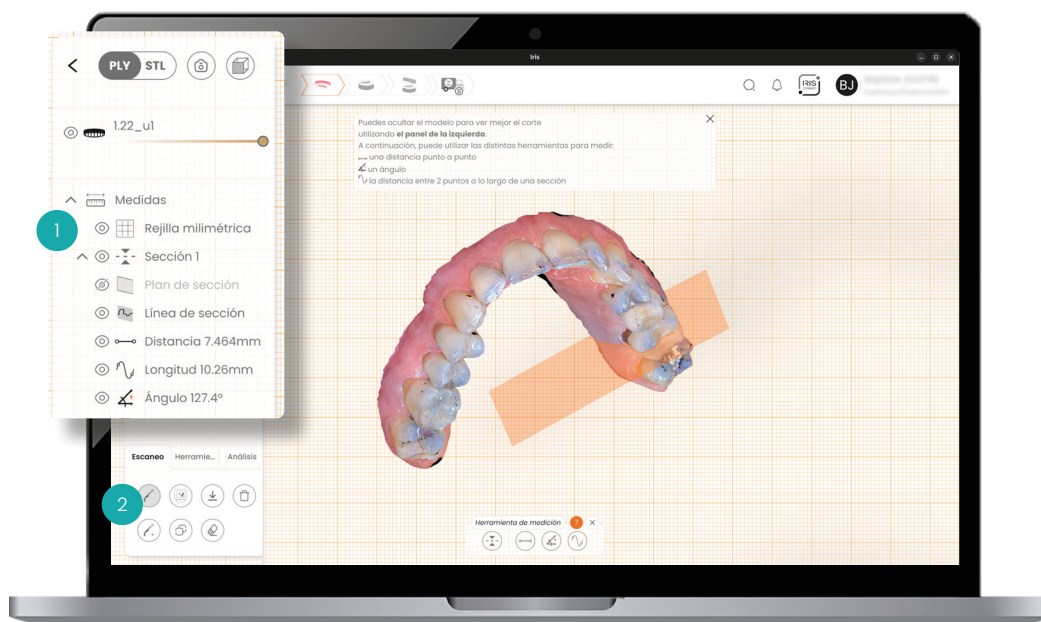

IRIS BY STARCK® le ofrece un conjunto de herramientas para controlar, ajustar, analizar y enriquecer sus escaneos. Aproveche las **funciones de visualización** 1 y acceda a **funciones avanzadas de análisis, retoque o personalización** 2 a través de tres pestañas complementarias: Escaneo, Herramientas y Análisis.


FUNCIONES DE VISUALIZACIÓN

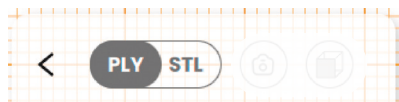


Cambiar el modo de renderizado : PLY o STL.



Capturar una imagen : Acceda a las funciones de captura con un solo clic en el icono (📷) congele el estado actual de su modelo 3D y/o descargue los archivos a la carpeta que desee en su ordenador.

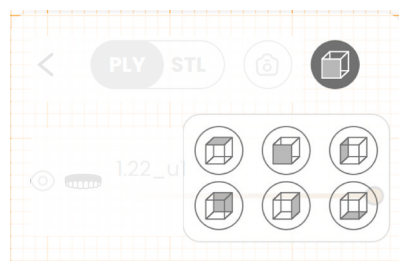

Punto de vista : Ajuste su escaneo más rápidamente. Elija entre las diferentes vistas para facilitar su análisis.

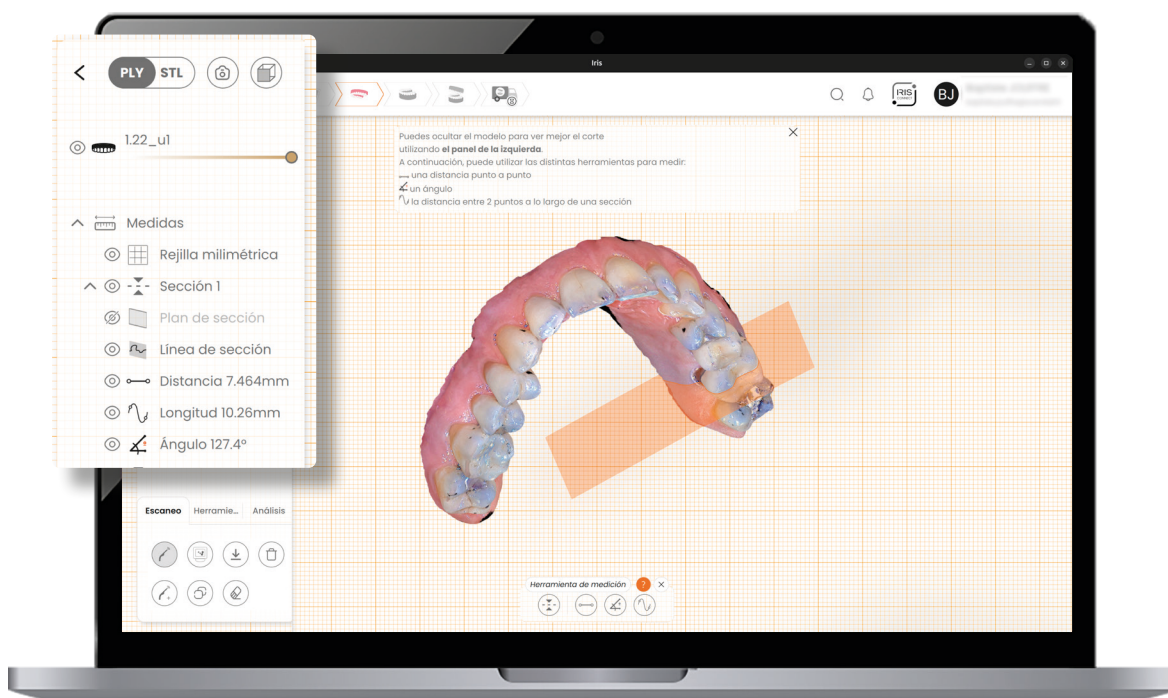

Ojo : Activa/desactiva la visualización del elemento

correspondiente para centrarse en lo esencial (escaneo, cuadrícula o medidas).



Visualización de tejidos blandos : Activa/desactiva la


segmentación automática de tejidos blandos y dientes, lo que permite hacer desaparecer la encía.



Transparencia : Gestione libremente la intensidad del elemento

correspondiente. Especialmente útil al comparar escaneos o mediciones.

PESTAÑA "ESCANEEO" : GESTIONAR Y MODIFICAR LA IMPRESIÓN

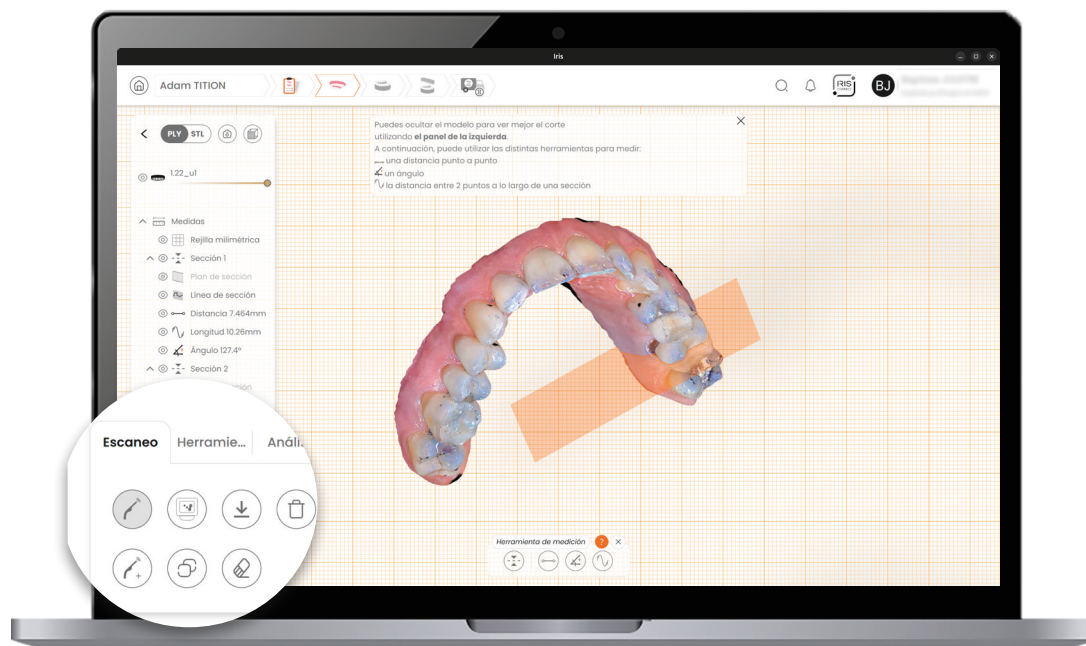

Gestione y modifique fácilmente sus escaneos para enriquecer el historial del paciente.



Reanudar el escaneo

Complete el escaneo o corrija una zona incompleta.



Añadir un escaneo

Enriquezca el historial de su paciente con un escaneo complementario (maxilar o mandíbula).



Fotogrametría

Combine un escaneo extraoral con su escaneo intraoral para obtener una correspondencia precisa y exacta entre la posición de los implantes dentales y la planificada mediante el software.



Copiar el escaneo

Duplique instantáneamente el escaneo.



Descargar el escaneo

Exporte directamente el archivo STL y PLY de su escaneo a la carpeta que desee en su PC.



Borrar el escaneo

Corrija la zona que desee borrando las imperfecciones con gomas de diferentes tamaños.

- › La goma 2D borra lo que se ve en la pantalla: manipule el modelo para ajustarlo.
- › La goma 3D borra en profundidad la zona seleccionada sin tener que manipular el modelo



Eliminar el escaneo

Seleccione el escaneo que desea eliminar en el workflow.

PESTAÑA "HERRAMIENTAS": PERFECCIONAMIENTO AUTÓNOMO



Personalice sus modelos con las funciones avanzadas de modelado y anotaciones.



Mostrar líneas de acabado

Actívelo para mostrar las líneas. De lo contrario, déjelo desactivado.



Crear una línea de acabado manual

Trace libremente sus líneas con el ratón, punto por punto.



Crear una línea de acabado automática

Se genera automáticamente y se puede modificar manualmente.



Modificar el tipo de base

Por arcada: hemicircular o completa.

Por tipo: simple, recta o sin base. Abierta o cerrada con grosor y altura ajustables.



Etiquetar


IRIS BY STARCK® calcula automáticamente la segmentación. A continuación, puede realizar ajustes manuales seleccionando su diente, GEN (encía), SB (scanbody) o PREP (preparación).



Añadir un scanbody

Simplifica el diseño del implante, incluso si no lo había previsto inicialmente. Rellene la ficha protésica, compruebe la posición y siga el procedimiento de escaneo necesario.

PESTAÑA "ANÁLISIS": EXPLORE Y ANALICE

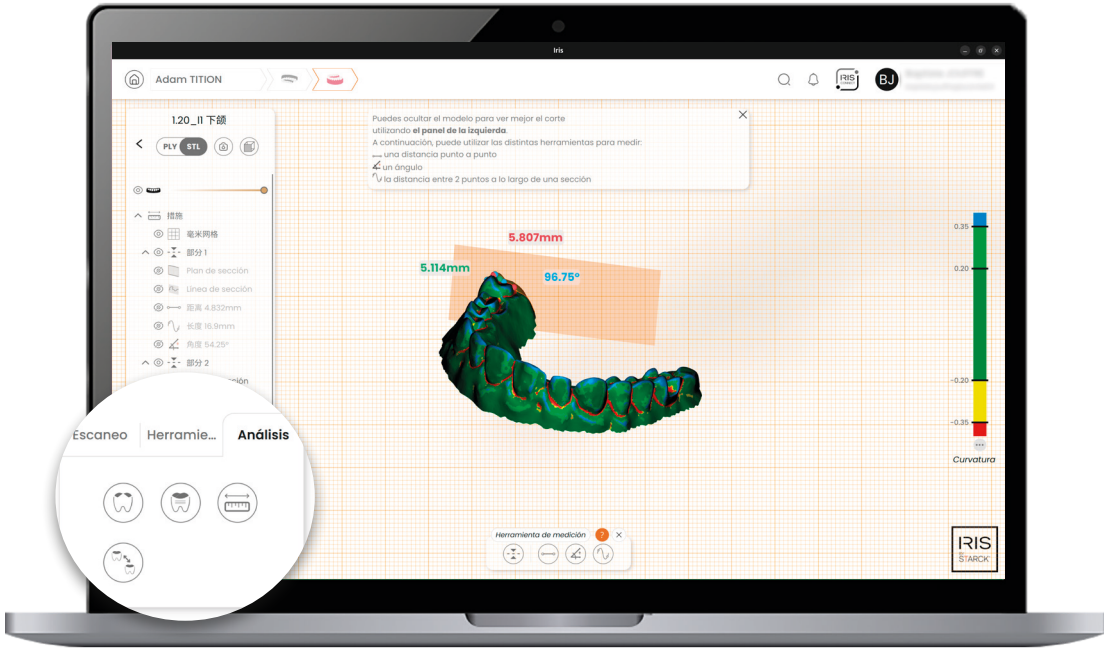

Explore sus escaneos en profundidad gracias a las herramientas de análisis.



Curvatura

Visualice las curvaturas según una escala de medición personalizable.



Rugosidad

Detecte las irregularidades de la superficie según una escala personalizable.



Medidas avanzadas

Mida una distancia punto por punto, desde un ángulo o una superficie.



Trace una sección en un plano 2D para facilitar la localización y muestre la cuadrícula milimetrada para una mayor precisión.




Comparación

En el historial de la ficha del paciente, seleccione dos modelos para comparar. Marque los puntos de correspondencia en cada uno de ellos. La superposición automática le permite analizar las diferencias y seguir la evolución del tratamiento.



Cada una de las funciones de análisis proyecta los resultados en la zona de visualización y permite mostrar o no los valores.

AÚN MÁS EXPERIENCIA EN OCLUSIÓN

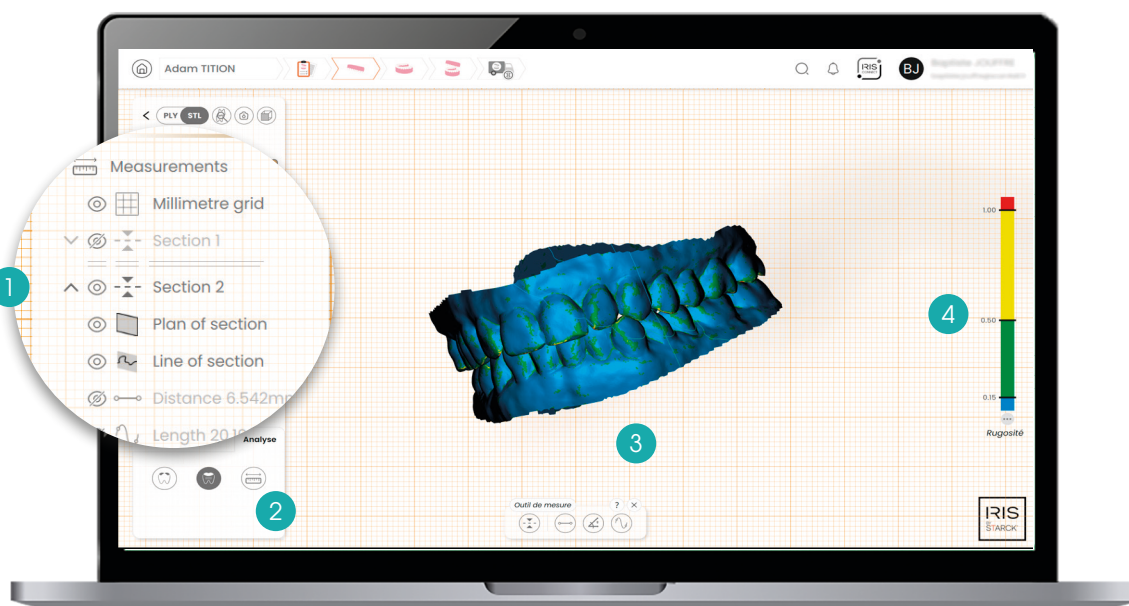

Encuentre **todas las funciones habituales de visualización** 1 y análisis, pero también funciones **adicionales específicas para la oclusión** 2 :

OCLUSION



Añadir un escaneo a la oclusión



Añadir una oclusión



Descargar la oclusión



Eliminar la oclusión

HERRAMIENTAS



Optimización de la intercuspales



Ajustar manualmente



Modificar el **tipo de base**



Cancelar último movimiento

ANÁLISIS



Curvatura



Rugosidad



Medidas avanzadas

3 Optimización de la intercuspales

Perfeccione automáticamente la intercuspales gracias a una alineación basada en las zonas de contacto previamente identificadas. Ajuste manualmente según su caso.

4 Personalice la escala de valores

Los códigos de colores le ayudan a localizar rápidamente las zonas críticas. Puede definir su propia colorimetría.

LLEGA MÁS LEJOS CON IRIS BY STARCK®.

Explora todos los recursos a tu disposición.

IRIS
BY STARCK®



Inside / **Guía de inicio**



Inside / **Mis ajustes**



Inside / **DIRECT SCAN**



Inside / **Mi cuenta**



Inside / **Información del sistema**



Inside / **Herramientas relacionadas con el escaneo**



Inside / **IRIS Connect**



Inside / **Servicio postventa**



Inside / **Mis pedidos**



Inside / **Escaneo in tiempo real**



Inside / **Mis notificaciones**



Inside / **Especificaciones técnicas del ordenador**



Inside / **Mis socios**




Inside / **Workflow guiado**



Inside / **Mis pacientes**



Inside / **Workflow libre**

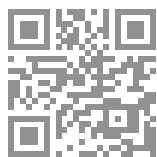

Acceder a toda la documentación.

Fabricante

Scan4all

Excelencia, para todos.

137 rue Garance 31670 Labège - FRANCE

N° SIRET 507 484 863 00059

www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®

Dispositivo médico de clase 1 (DM) destinado a la odontología digital. CE.

Solo para profesionales sanitarios.

© Scan4all - Version 1.0 - 2026