



Scan 4 all
présente

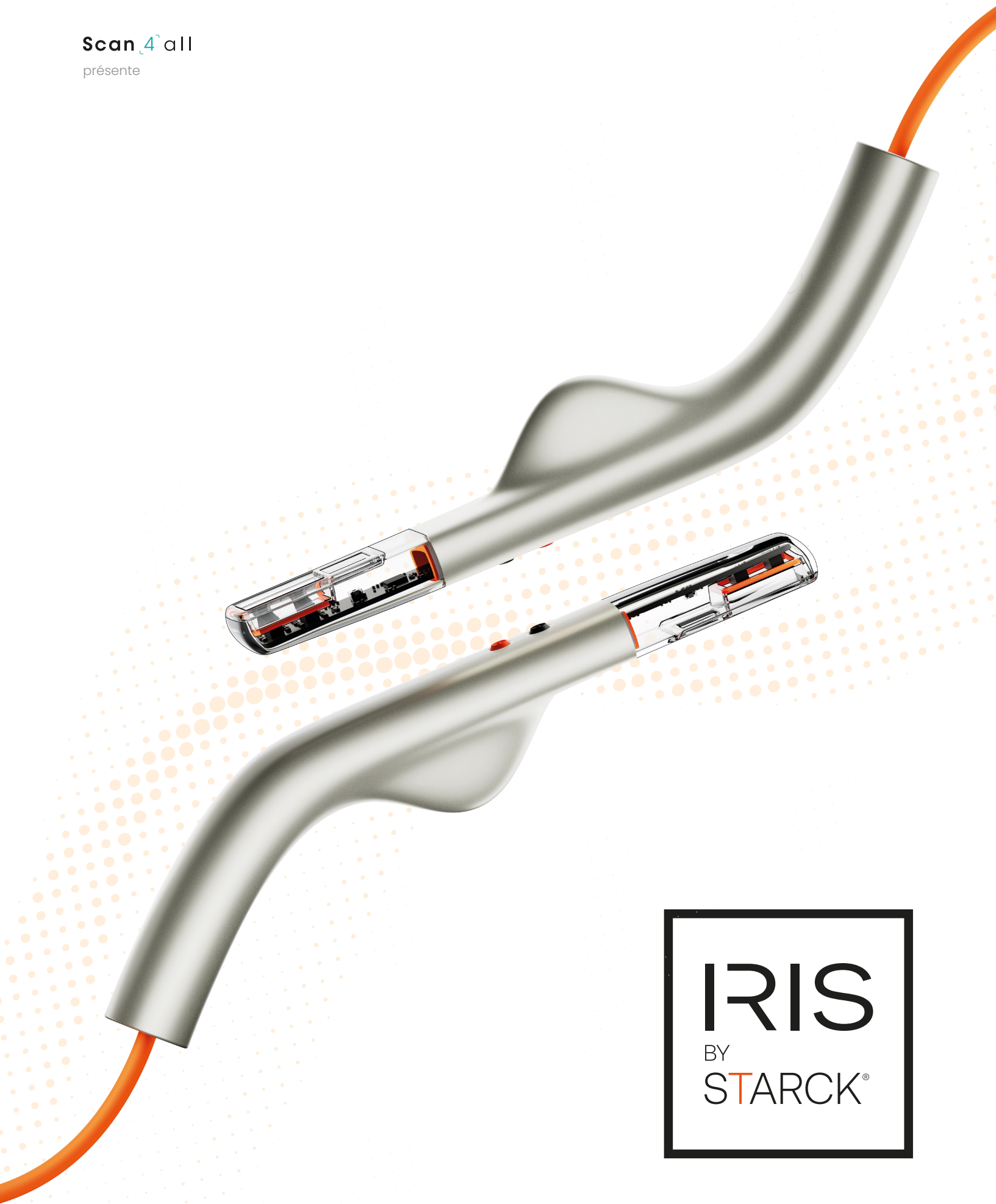

IRIS
BY
STARCK®

INSIDE / Outils autour du scan

MAÎTRISEZ CHAQUE DÉTAIL DE VOTRE SCAN

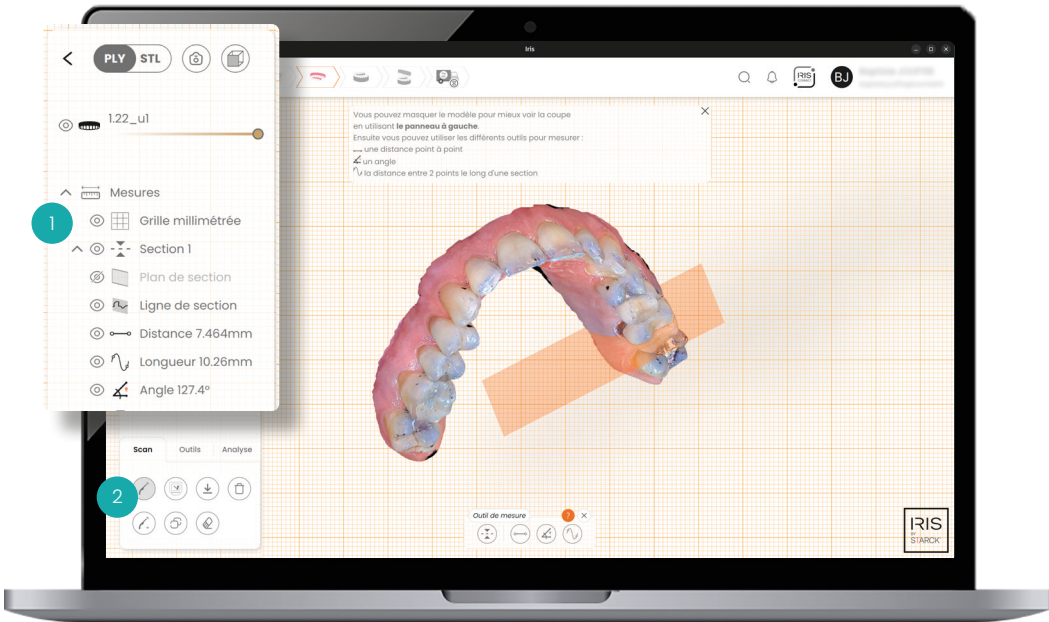

IRIS BY STARCK® vous offre une suite d'outils pour contrôler, ajuster, analyser et enrichir vos scans. Profitez des **fonctions de visualisation** 1 et accédez à des **fonctionnalités d'analyses avancées, de retouche ou de personnalisation** 2 à travers trois onglets complémentaires : Scan, Outils et Analyse.


FONCTIONS DE VISUALISATION




Changer le mode de rendu : PLY ou STL.



Capturer une image : Accéder aux fonctions de capture en un clic sur  : figez l'état actuel de votre modèle 3D et/ou télécharger les fichiers vers le dossier de votre choix sur votre ordinateur.

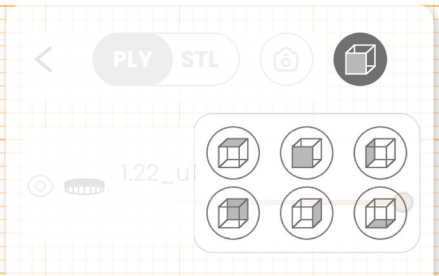

Point de vue : Ajustez plus rapidement votre scan. Choisissez entre les différentes vues pour faciliter votre analyse.

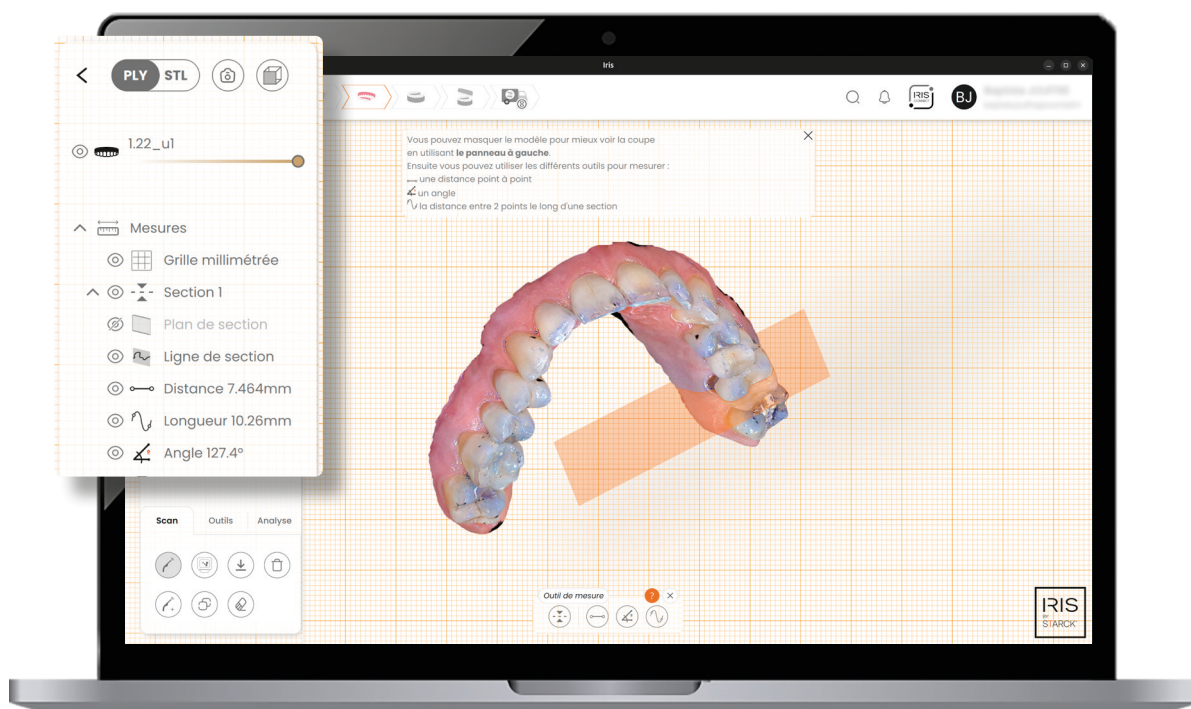

Oeil : Active/désactive l'affichage de l'élément correspondant (scan, grille ou mesures) pour se concentrer sur l'essentiel.




Affichage des tissus mous : Active/désactive la segmentation automatique des tissus mous et des dents, permettant de faire disparaître la gencive.



Transparence : Gérez librement son intensité. Particulièrement utile lors des comparaisons de scan ou de mesures.

ONGLET "SCAN": GÉRER ET MODIFIER L'EMPREINTE

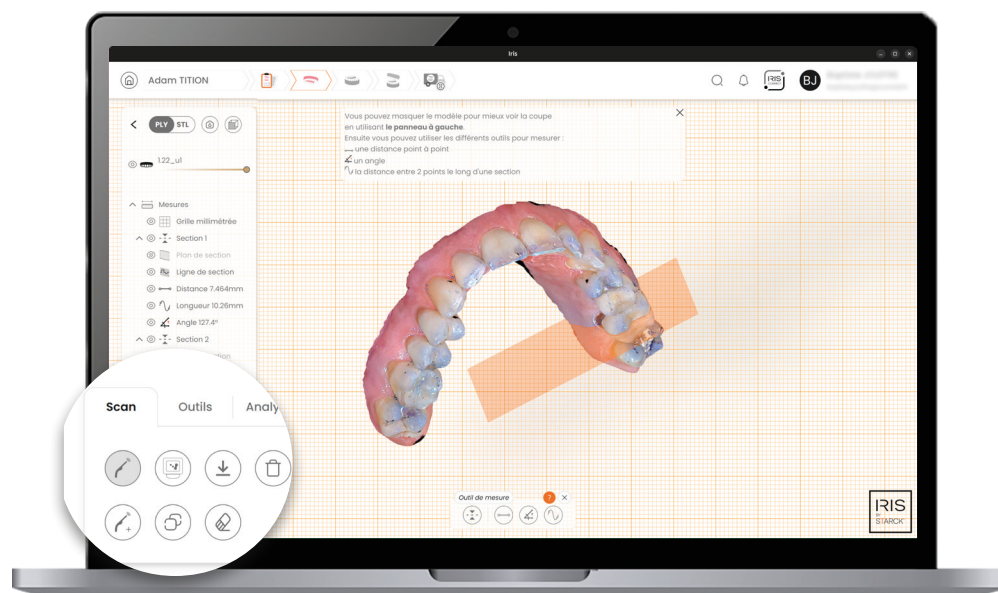

Gérez et modifiez facilement vos scans pour enrichir l'historique patient.



Reprendre le scan

Complétez le scan ou corrigez une zone incomplète.



Ajouter un scan

Enrichissez l'historique de votre patient avec un scan complémentaire (maxillaire ou mandibule).



Photogrammétrie

Associez un scan extra-oral à votre scan intra-oral pour une correspondance précise et exacte entre la position des implants dentaires et celles planifiées via le logiciel.



Copier le scan

Dupliquez instantanément le scan.



Gommer le scan

Rectifiez la zone que vous souhaitez en effaçant les imperfections à l'aide de gommes de différentes tailles.

- La gomme 2D efface ce qui est visible à l'écran – manipulez le modèle pour ajuster.
- La gomme 3D efface en profondeur la zone sélectionnée sans avoir à manipuler le modèle.



Télécharger le scan

Exportez directement le fichier STL et PLY de votre scan vers le dossier de votre choix sur votre PC.



Supprimer le scan

Sélectionnez le scan que vous souhaitez supprimer dans le workflow.

ONGLET "OUTILS": PERFECTIONNEMENT AUTONOME



Personnalisez vos modèles grâce aux fonctions avancées de modélisation et d'annotations.



Afficher les lignes de finitions

Activez pour afficher les lignes. Sinon, laissez désactivé.



Créer une ligne de finition manuel

Tracez librement vos lignes avec votre souris, point par point.



Créer une ligne de finition auto

Générée automatiquement, modifiable ensuite manuellement.



Modifier le type de socle

Par arcade : hémi ou complète.
Par type : simple, droit ou sans socle.
Ouvert ou fermé avec épaisseur et hauteur réglables.



Labéliser


IRIS BY STARCK® calcule automatiquement la segmentation. Vous pouvez ensuite effectuer des ajustements manuels en sélectionnant votre dent, GEN (gencive), SB (scanbody) ou PREP (préparation).



Ajouter un scanbody

Simplifie la conception implantaire même si vous ne l'aviez pas prévu au départ.
Remplissez la fiche prothétique, vérifiez le positionnement et suivez la procédure de scan nécessaire.

ONGLET "ANALYSE": EXPLOREZ ET ANALYSEZ

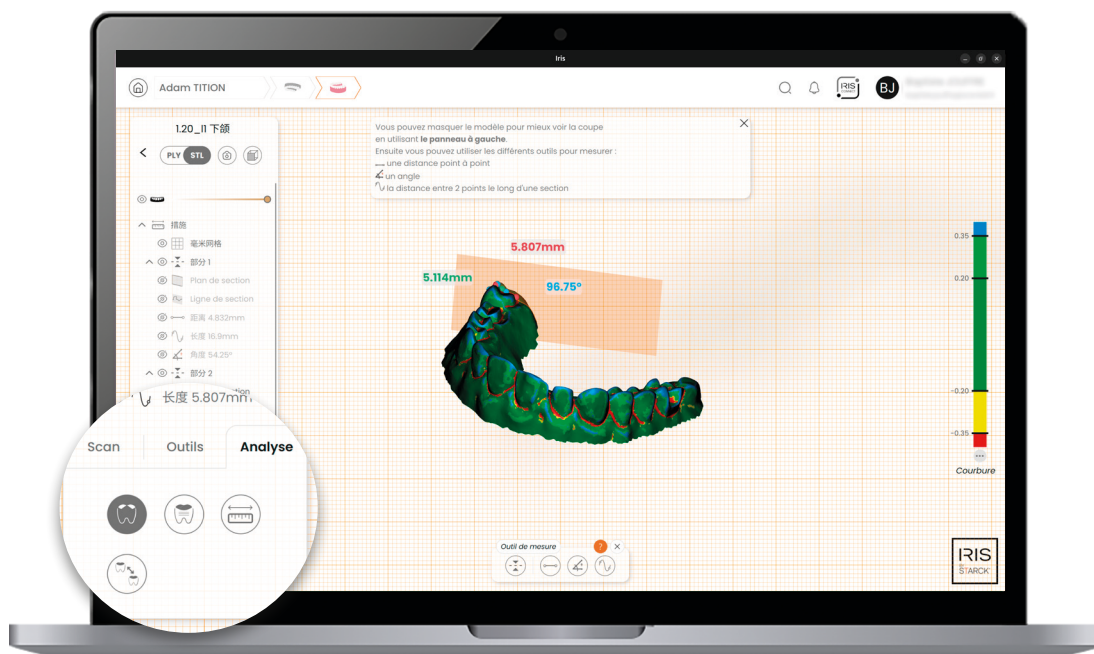

Explorez vos scans en profondeurs grâce aux outils d'analyse.



Courbure

Visualisez les courbures selon une échelle de mesure personnalisable.



Rugosité

Détectez les irrégularités de surface selon une échelle de mesure personnalisable.



Mesures avancées

Mesurez une distance point par point, d'un angle ou d'une surface.



Tracez une section sur un plan 2D afin de faciliter le repérage et affichez la grille millimétrée pour toujours plus de précision.




Comparaison

Dans l'historique de la fiche patient, sélectionnez deux modèles à comparer. Marquez des points de correspondance sur chacun d'eux. La superposition automatique vous permet d'analyser les écarts et suivre l'évolution du traitement.



Chacune des fonctionnalités d'analyse projette les résultats dans la zone de visualisation et permet d'afficher ou non les valeurs.

ENCORE PLUS D'EXPERTISE À L'OCCCLUSION

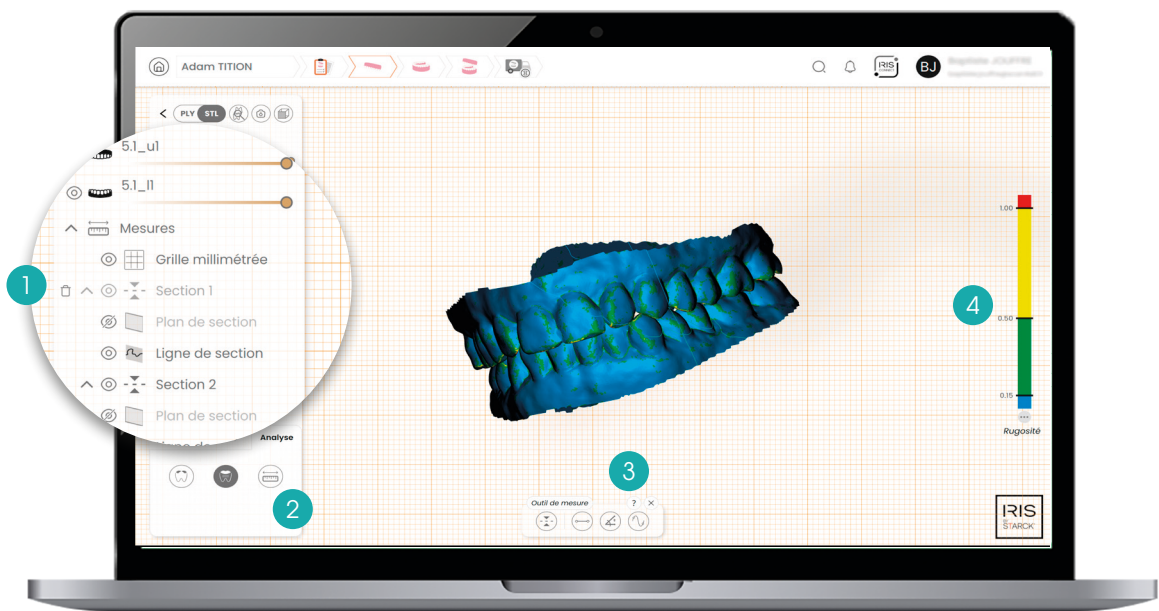

Retrouvez toutes les **fonctions de visualisation** 1 et les fonctionnalités d'analyses habituelles mais aussi **des fonctionnalités supplémentaires et spécifiques à l'occlusion** 2 :

OCCLUSION	OUTILS	ANALYSE
 Ajouter un scan à l'occlusion	 Optimisation de l'intercuspidie	 Courbure
 Ajouter une occlusion	 Ajuster manuellement	 Rugosité
 Télécharger l'occlusion	 Modifier le type de socle	 Mesures
 Supprimer l'occlusion	 Annuler dernier déplacement	

3 Optimisation de l'intercuspidie Perfectionnez automatiquement l'intercuspidie grâce à un alignement basé sur les zones de contacts préalablement identifiés. Ajustez manuellement selon votre cas.	4 Personnalisez l'échelle de valeur Les codes couleurs vous aident à localiser rapidement les zones critiques. Vous pouvez définir votre propre colorimétrie.
--	---

ALLER PLUS LOIN AVEC IRIS BY STARCK®.

Explorez l'ensemble des ressources mises à votre disposition.



Inside / [Guide de démarrage](#)



Inside / [Mes réglages](#)



Inside / [DIRECT SCAN](#)



Inside / [Mon compte](#)



Inside / [Informations système](#)



Inside / [Outils autour du scan](#)



Inside / [IRIS Connect](#)



Inside / [SAV](#)



Inside / [Mes commandes](#)



Inside / [Scan en temps réel](#)



Inside / [Mes notifications](#)



Inside / [Spécifications techniques ordinateur](#)



Inside / [Mes partenaires](#)




Inside / [Workflow guidé](#)



Inside / [Mes patients](#)



Inside / [Workflow libre](#)

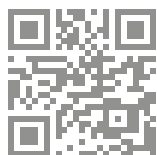

Accéder à toute la documentation.

Fabricant

Scan⁴all

L'excellence, pour tous.

137 rue Garance 31670 Labège - FRANCE

N° SIRET 507 484 863 00059

www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®

Dispositif médical de classe I (DM) destiné à la dentisterie numérique. CE.

Réservé aux professionnels de santé.

© Scan4all - Version 1.0 - 2026