



Scan 4 all
presenta

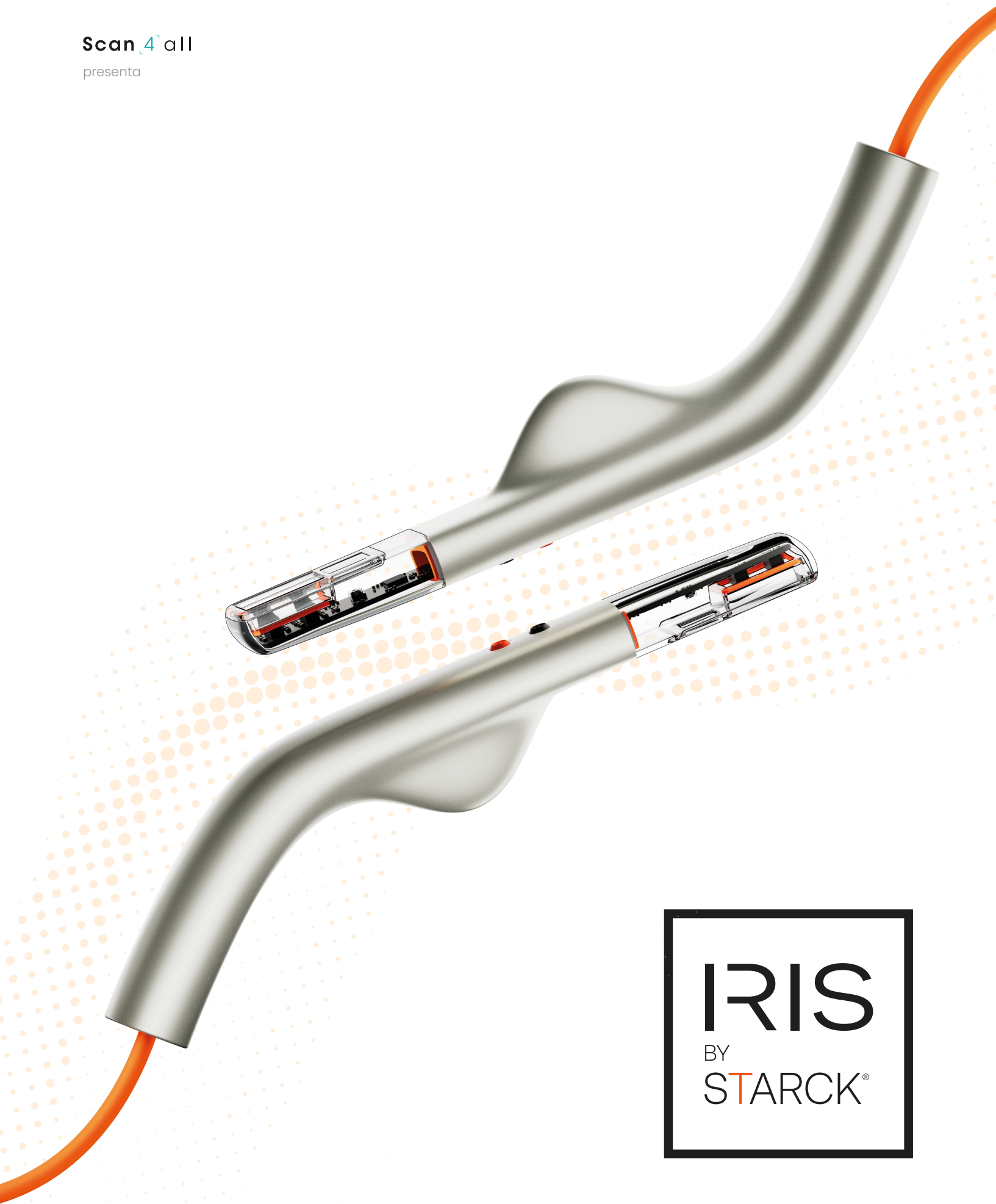


INSIDE / Strumenti relativi alla scansione

CONTROL EVERY DETAIL OF YOUR SCAN

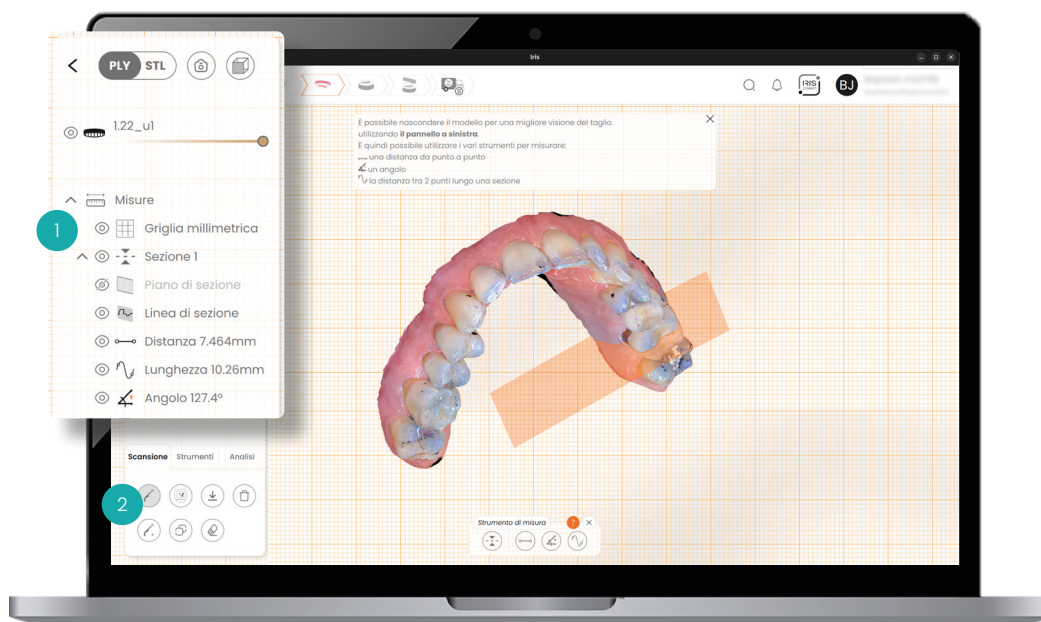

IRIS BY STARCK® offre una suite di strumenti per controllare, regolare, analizzare e arricchire le scansioni. Approfitta delle **funzioni di visualizzazione** 1 e accedi a **funzionalità avanzate di analisi, ritocco o personalizzazione** 2 attraverso tre schede complementari: Scansione, Strumenti e Analisi.

FUNZIONI DI VISUALIZZAZIONE

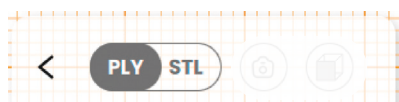




Cambia la modalità di rendering : PLY o STL.




Cattura un'immagine : Accedi alle funzioni di cattura con un clic sull'icona  fissa lo stato attuale del tuo modello 3D e/o carica i file nella cartella che preferisci sul tuo computer.



Punto di vista : Regola più rapidamente la tua scansione. Scegli tra le diverse viste per facilitare la tua analisi.

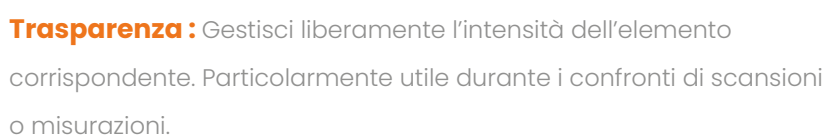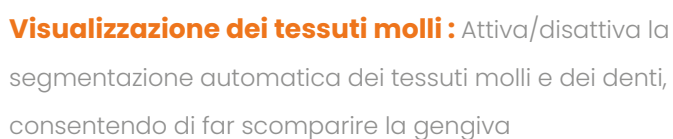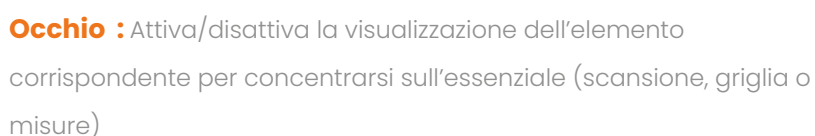

SCHEDA SCAN: GESTIRE E MODIFICARE L'IMPRONTA

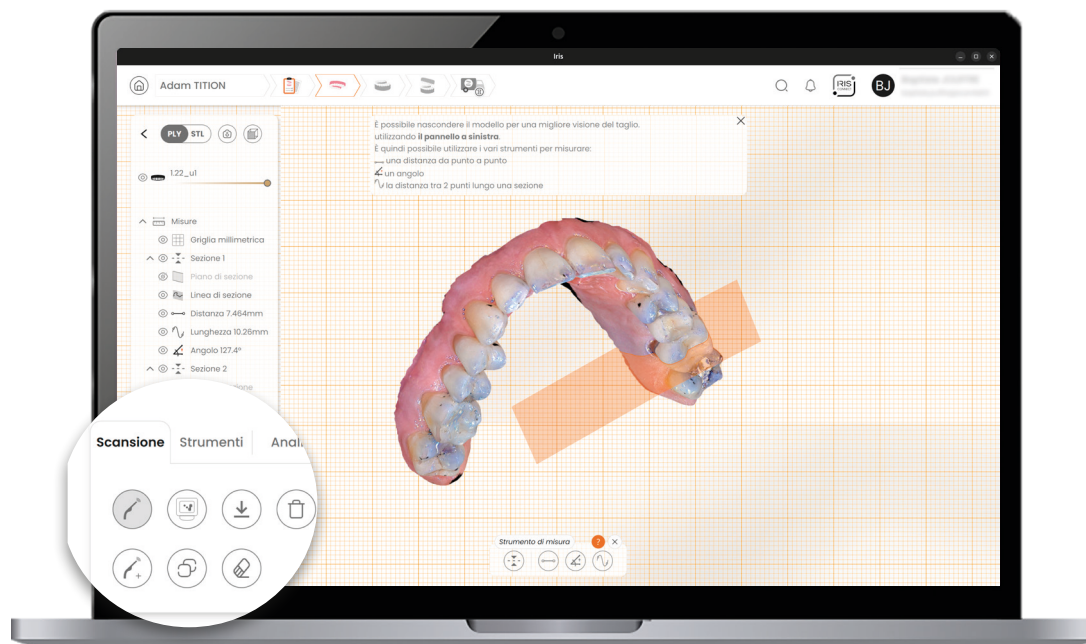

Gestisci e modifica facilmente le tue scansioni per arricchire la cronologia del paziente.



Riprendere la scansione

Completare la scansione o correggere un'area incompleta.



Aggiungere una scansione

Arricchite la storia clinica del vostro paziente con una scansione complementare (mascella o mandibola).



Fotogrammetria

Abbina una scansione extraorale alla tua scansione intraorale per ottenere una corrispondenza precisa ed esatta tra la posizione degli impianti dentali e quella pianificata tramite il software.



Copia la scansione

Duplica istantaneamente la scansione.



Scaricare la scansione

Esportare direttamente il file STL e PLY della scansione nella cartella desiderata sul PC.



Cancellare la scansione

Correggere l'area desiderata
cancellando le imperfezioni con gomme
di diverse dimensioni.

- › La gomma 2D cancella ciò che è visibile sullo schermo: manipolare il modello per regolarlo.
- › La gomma 3D cancella in profondità l'area selezionata senza dover manipolare il modello



Eliminare la scansione

Seleziona la scansione che desideri
eliminare nel flusso di lavoro.

SCHEDA STRUMENTI: PERFEZIONAMENTI AUTONOMI



Personalizza i tuoi modelli grazie alle funzioni avanzate di modellazione e annotazioni.



Visualizza le linee di finitura

Attiva per visualizzare le linee. Altrimenti, lascia disattivato.



Creare una linea di finitura manuale

Traccia liberamente le linee con il mouse, punto per punto.



Creare una linea di finitura automatica

Generata automaticamente, modificabile successivamente manualmente.



Modifica il tipo di base

Per arcata: emiportante o completa.
Per tipo: semplice, diritta o senza base.
Aperta o chiusa con spessore e altezza regolabili.




Etichettare

IRIS BY STARCK® calcola automaticamente la segmentazione. È quindi possibile effettuare regolazioni manuali selezionando il dente, GEN (gengiva), SB (scanbody) o PREP (preparazione).



Aggiungere uno scanbody

Semplifica la progettazione dell'impianto anche se non era prevista inizialmente. Compilare la scheda protesica, verificare il posizionamento e seguire la procedura di scansione necessaria.

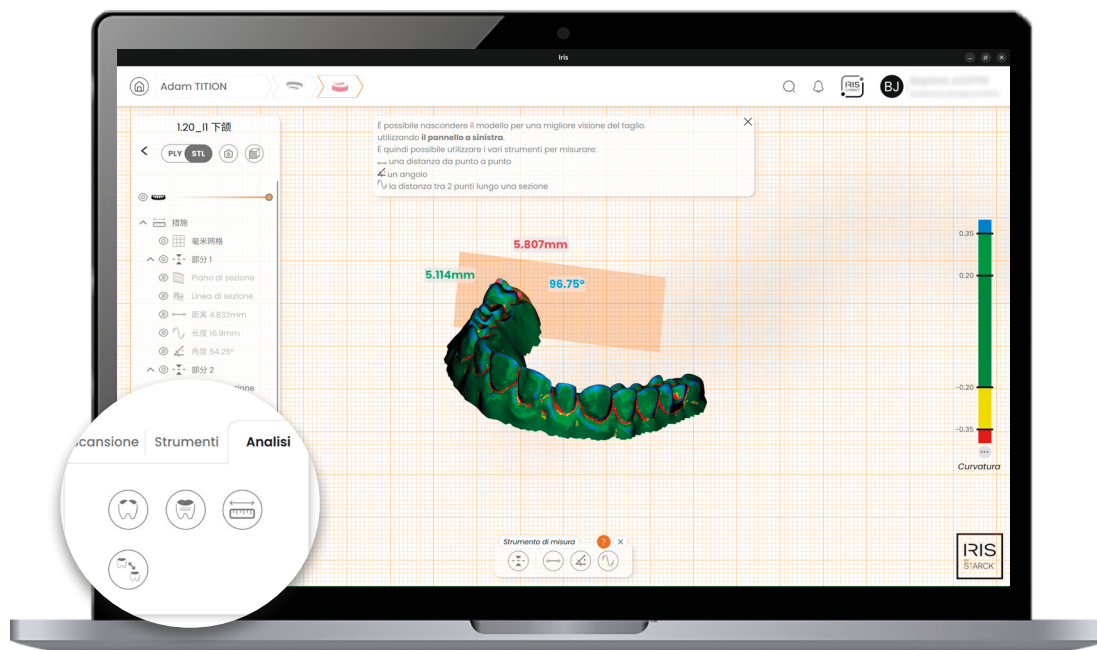

Esplora le tue scansioni in profondità grazie agli strumenti di analisi.



Curvatura

Visualizza le curvature secondo una scala di misurazione personalizzabile.



Rugosità

Rileva le irregolarità della superficie
secondo una scala personalizzabile.



Misure avanzate

Misurate una distanza punto per punto,
da un angolo o da una superficie.

💡 Traccia una sezione su un piano 2D per facilitare l'individuazione e visualizza la griglia millimetrata per una precisione ancora maggiore.




Confronto

Nella cronologia della scheda paziente, selezionare due modelli da confrontare. Contrassegnare i punti di corrispondenza su ciascuno di essi.

La sovrapposizione automatica consente di analizzare le differenze e monitorare l'evoluzione del trattamento.

💡 Ciascuna delle funzionalità di analisi proietta i risultati nell'area di visualizzazione e consente di visualizzare o meno i valori.

ANCORA PIÙ COMPETENZA NELL'OCCLUSIONE

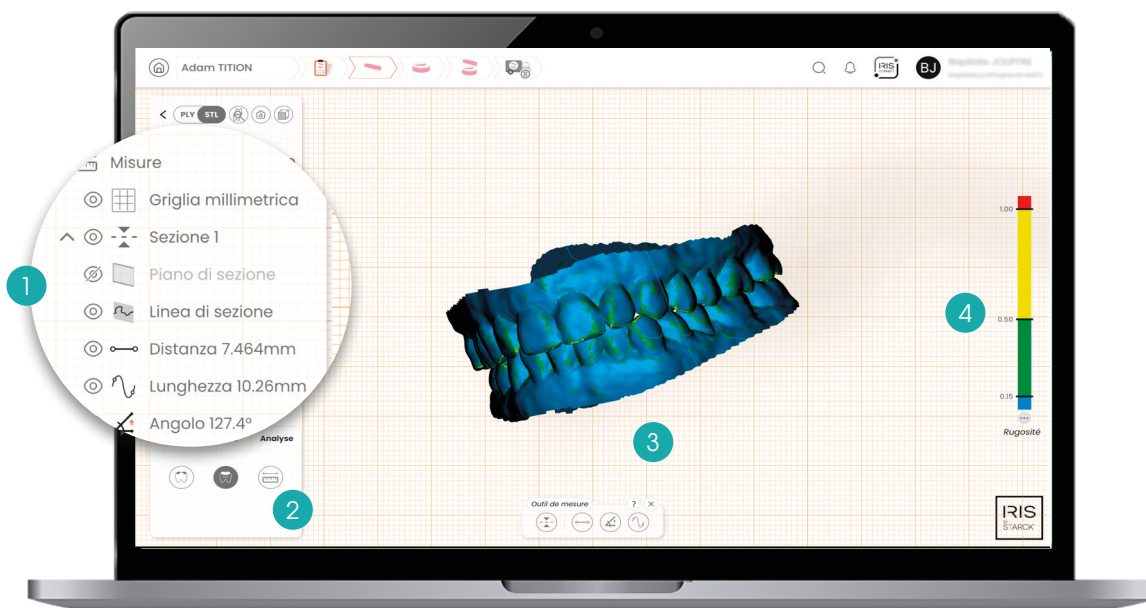

Troverete tutte le consuete **funzioni di visualizzazione** **1** e analisi, ma anche **funzionalità aggiuntive specifiche per l'occlusionen** **2** :

OCCLUSIONE



Aggiungere una scansione
all'occlusione



Aggiungere
un'occlusione



Scaricare
l'occlusione



Eliminare
l'occlusionen

STRUMENTI



Ottimizzazione
dell'intercuspédie



Regolare
manualmente



Modifica del **tipo**
de base



Annullare l'ultimo
spostamento

ANALISI



Curvatura



Rugosità



Misure avanzate

3 Ottimizzazione dell'intercuspédie

Perfeziona automaticamente l'intercuspédie grazie all'allineamento basato sulle zone di contatto precedentemente identificate. Regola manualmente in base alle tue esigenze.

4 Personalizza la scala dei valori

I codici colore aiutano a individuare rapidamente le zone critiche. È possibile definire la propria colorimetria.

VAI OLTRE CON IRIS BY STARCK®.

Scopri tutte le risorse a tua disposizione.

IRIS
BY STARCK®



Inside / Guida introduttiva



Inside / Le mie impostazioni



Inside / DIRECT SCAN



Inside / Il mio account



Inside / Informazioni di sistema



Inside / Strumenti relativi alla scansione



Inside / IRIS Connect



Inside / SAV



Inside / I miei ordini



Inside / Scansione in tempo reale



Inside / Le mie notifiche



Inside / Specifiche tecniche del computer



Inside / I miei partner




Inside / Workflow guidato



Inside / I miei pazienti



Inside / Workflow libero

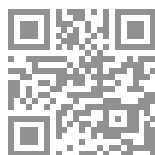

Accedere a tutta la documentazione.

Produttore

Scan4all

Eccellenza, per tutti.

137 rue Garance 31670 Labège - FRANCE

N° SIRET 507 484 863 00059

www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®

Dispositivo medico di classe I (DM) destinato all'odontoiatria digitale. CE.

Riservato esclusivamente agli operatori sanitari.

© Scan4all - Version 1.0 - 2026