


Scan 4 all

를 선보입니다

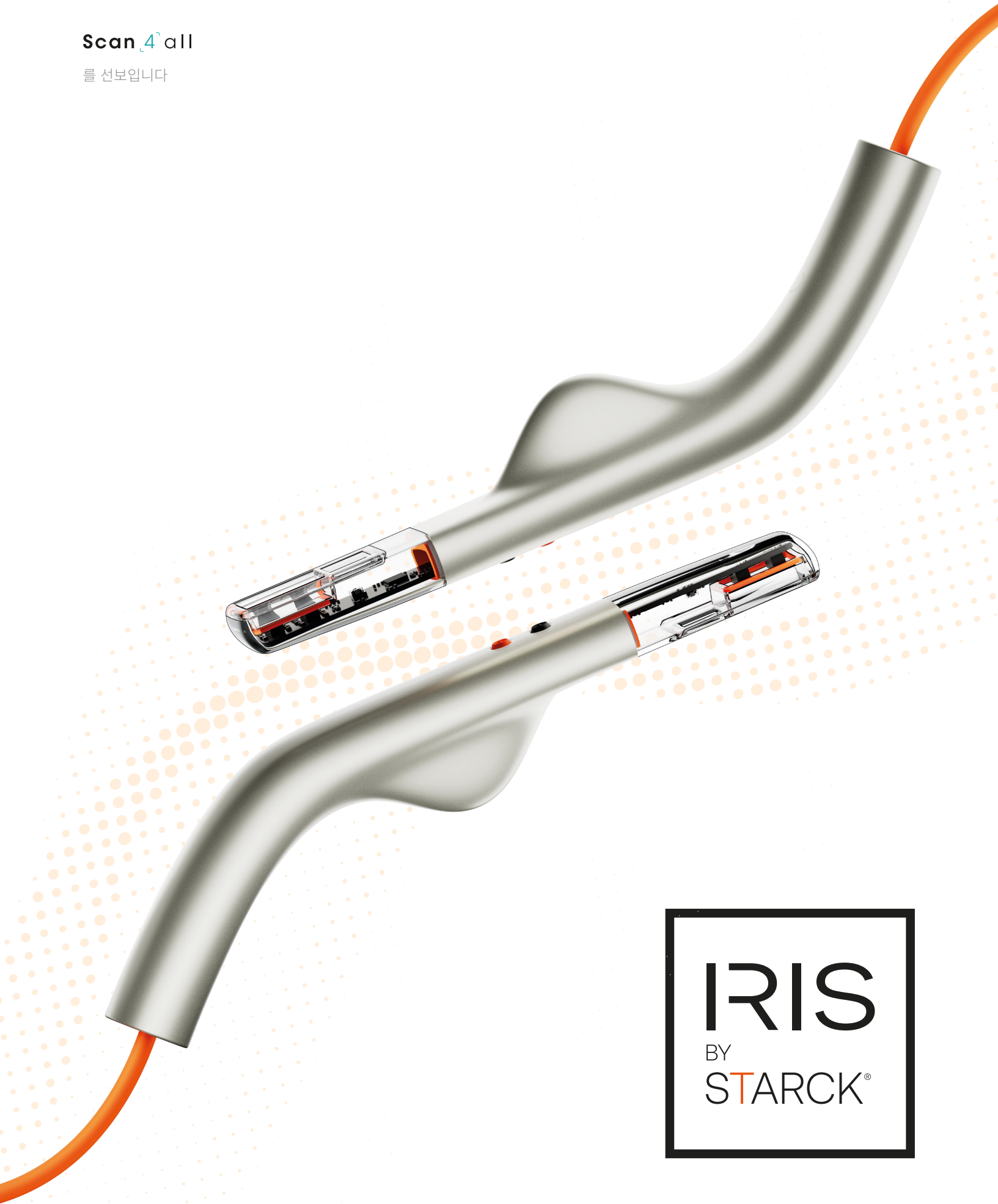

IRIS
BY
STARCK®


내부 / 스캔 관련 도구

스캔의 모든 세부 사항 제어



IRIS BY STARCK®는 스캔을 제어, 조정, 분석 및 향상시키는 다양한 도구를 제공합니다. 시각화 기능 ①을 활용하고, ‘스캔’, ‘도구’, ‘분석’이라는 세 가지 상호 보완적인 탭을 통해 ②.

시각화 기능

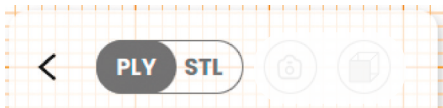

렌더링 모드 변경: PLY 또는 STL.



이미지 캡처: 한 번의 클릭으로 캡처 기능에 액세스하여 3D 모델의 현재 상태를 고정하거나 컴퓨터의 원하는 폴더로 파일을 다운로드할 수 있습니다.



보기: 스캔 화면을 더 빠르게 조정하세요. 분석을 용이하게 하기 위해 다양한 보기 모드 중에서 선택하세요.



아이 : 해당 요소(스캔, 그리드 또는 측정값)의 표시를 켜거나 끄고 핵심에 집중하세요.



투명도 : 해당 요소의 농도를 자유롭게 조절하세요. 스캔이나 측정값을 비교할 때 특히 유용합니다.



연조직 표시 : 연조직과 치아의 자동 분할을 활성화/비활성화하여 잇몸을 숨길 수 있습니다.

”스캔” 탭 : 인상 관리 및 수정 L'EMPREINTE



스캔을 손쉽게 관리 및 수정하여 환자 이력을 보강하십시오.



스캔 재개

스캔을 완료하거나 미완성된 영역을 수정합니다.



스캔 추가.

추가 스캔(상악 또는 하악)을 통해 환자의 진료 기록을 보완하세요.



Photogrammetry

구외 스캔을 구내 스캔과 결합하여, 실제 치과 임플란트 위치와 소프트웨어를 통해 계획된 위치 간의 정밀하고 정확한 정렬을 보장합니다.



스캔 복사

스캔을 즉시 복제합니다.



스캔 다운로드

스캔의 STL 및 PLY 파일을 PC의 원하는 폴더로 직접 내보내십시오.



스캔 지우기

다양한 크기의 지우개를 사용하여 불완전한 부분을 지우고 원하는 영역을 수정합니다.

- 2D 지우개는 화면에 보이는 부분을 지웁니다. 모델을 조작하여 조정하십시오.
- D 지우개는 모델을 조작할 필요 없이 선택한 영역을 깊이 있게 지웁니다.



스캔 삭제

워크플로우에서 삭제할 스캔을 선택하십시오.

”도구” 탭: 독립형 향상 기능



고급 모델링 및 주석 기능을 사용하여 모델을 맞춤 설정하십시오.



마무리 선 표시

선을 표시하려면 활성화하십시오. 그렇지 않으면 비활성화 상태로 두십시오.



수동 마감선 생성

마우스를 사용하여 점과 점을 연결하며 자유롭게 선을 그립니다.



자동 마감선 생성

자동으로 생성되며, 이후 수동으로 편집할 수 있습니다.



기초 유형 변경

아치 형태: 반원형 또는 전체 원형.
유형별: 단순, 직선 또는 베이스 없음. 두께와 높이를 조절할 수 있는 개방형 또는 폐쇄형.



라벨

IRIS BY STARCK®는 분할을 자동으로 계산합니다. 그런 다음 치아, GEN(잇몸), SB(스캔 바디) 또는 PREP(준비)를 선택하여 수동으로 조정할 수 있습니다.



스캔 바디 추가

처음에 계획하지 않았더라도 임플란트 설계를 간소화합니다. 보철 양식을 작성하고, 위치를 확인한 후 필요한 스캔 절차를 따르십시오.

“분석” 탭: 탐색 및 분석



분석 도구를 사용하여 스캔 데이터를 심층적으로 탐색하십시오.



곡률

사용자 정의 가능한 측정 척도를 사용하여 곡률을 시각화합니다.



거칠기

사용자 정의 가능한 측정 척도에 따라 표면 불규칙성을 감지합니다.



고급 측정

점별, 각도별 또는 표면으로부터 거리를 측정합니다.

💡 2D 평면도에 단면을 그려 식별을 용이하게 하고, 더 높은 정밀도를 위해 밀리미터 격자를 표시합니다.




비교

환자 기록 내역에서 비교할 두 모델을 선택합니다. 각 모델에서 대응되는 지점을 표시합니다. 자동 중첩 기능을 통해 차이점을 분석하고 치료 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.

💡 각 분석 기능은 결과를 뷰잉 영역에 투영하며, 값을 표시하거나 숨길 수 있습니다.

교합에 대한 더욱 전문적인 기능

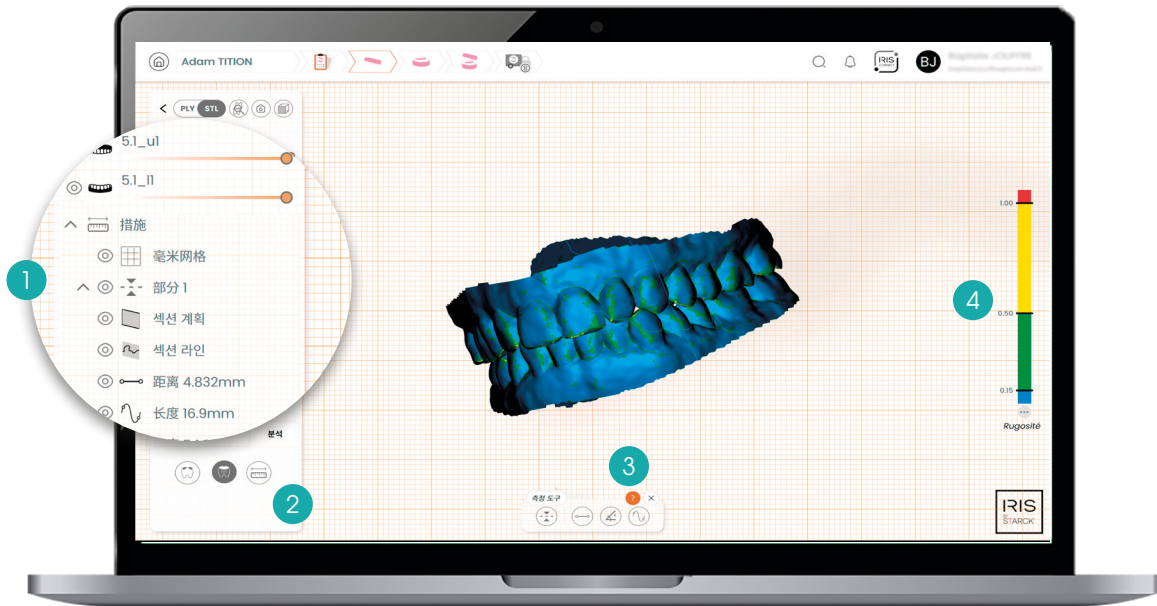

익숙한 모든 기본 보기 ① 및 분석 기능과 더불어 교합에 특화된 추가 기능 ②을 확인하십시오:

교합	도구	분석
 교합에 스캔 추가	 인터스큐피드 최적화	 곡률
 오클루전 추가	 수동으로 조정	 거칠기
 교합 데이터 다운로드	 기본 유형 변경	 고급 측정
 오클루전 삭제	 마지막 작업 취소	

③ 인터스큐피드 최적화

사전 식별된 접촉 영역을 기반으로 정렬하여 인터스큐피드를 자동으로 최적화합니다. 필요에 따라 수동으로 조정하십시오.

④ 값 척도 사용자 지정

색상 코드를 통해 중요한 영역을 빠르게 파악할 수 있습니다. 사용자 정의 색상 체계를 설정할 수 있습니다.

IRIS BY STARCK®와 함께 더 많은 기능을 경험해 보세요.

이용 가능한 모든 리소스를 살펴보세요.

 내부 / 시작 가이드

 내부 / 내 설정

 내부 / DIRECT SCAN

 내부 / 내 계정

 내부 / 시스템 정보

 내부 / 스캔 관련 도구

 내부 / IRIS Connect

 내부 / SAV

 내부 / 내 주문

 내부 / 실시간 스캔

 내부 / 내 알림

 내부 / 컴퓨터 기술 사양

 내부 / 내 파트너

 내부 / 가이드형 워크플로우

 내부 / 내 환자

 내부 / 자유형 워크플로우



전체 문서를 확인하십시오.

제조업체

Scan4all

모두를 위한 탁월함.

137 rue Garance 31670 Labège - 프랑스

N° SIRET 507 484 863 00059

www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®
디지털 치과용 1등급 의료기기(MD).
의료 전문가 전용.
© Scan4all - 버전 1.0 - 2026