


Scan 4 all
präsentiert

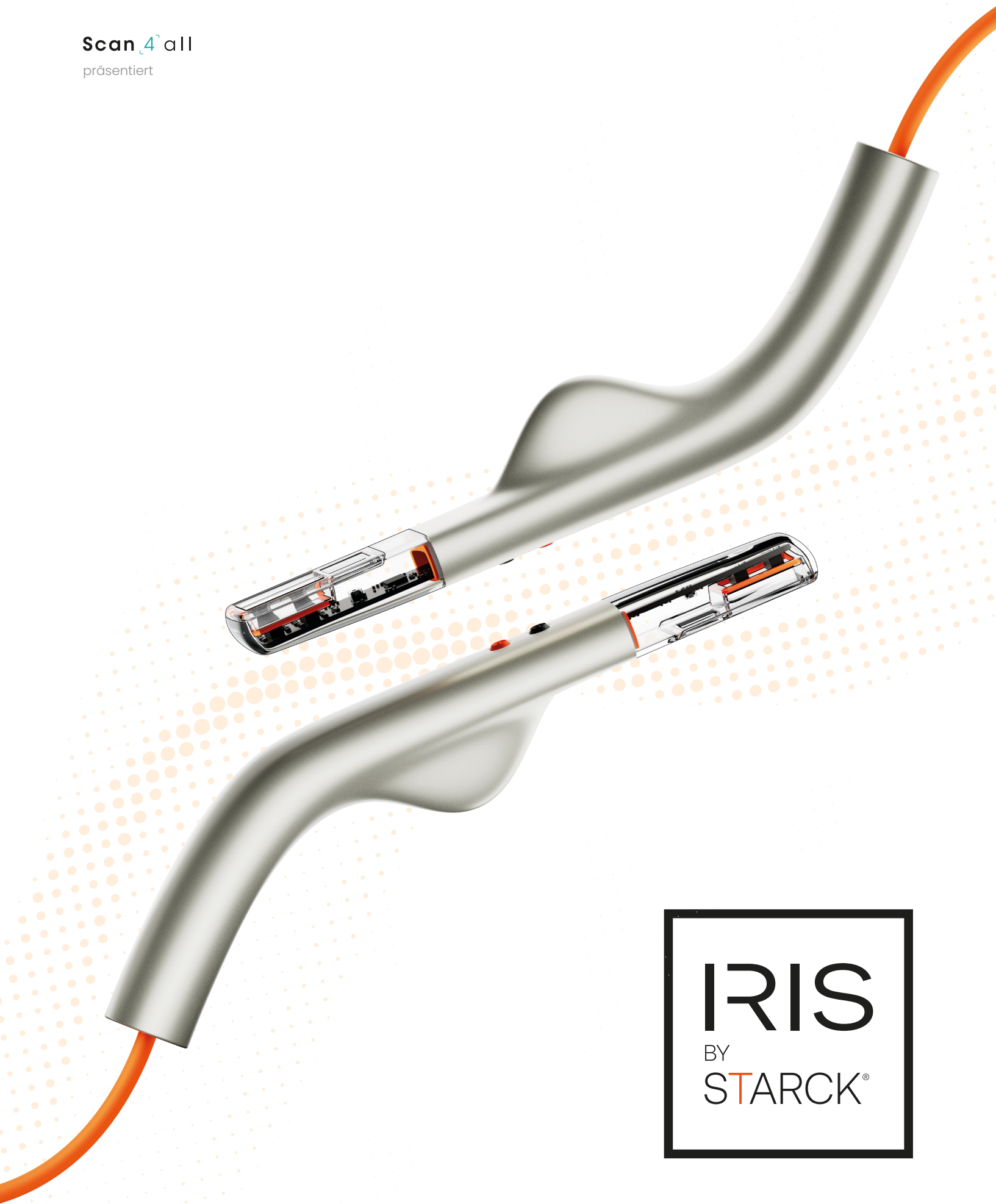

IRIS
BY
STARCK®

INSIDE / **Echtzeit-scan**

DIE VORBEREITUNG : DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG

Mit IRIS BY STARCK® können Sie 3D-Fingerabdrücke mit einem einzigen Handgriff erfassen.



Der Computer muss während jedes Scans an eine Steckdose angeschlossen bleiben.



Vermeiden Sie direktes Licht auf den zu scannenden Bereich, da dies die Kalibrierung der Beleuchtung des Scanners beeinträchtigen und dessen Funktion stören kann.



Tragen Sie schwarze Handschuhe, um störende Reflexionen auf ein Minimum zu reduzieren.




Trocknen Sie Mund und Zähne sorgfältig ab, um eine optimale Erfassungsqualität zu erzielen.



Positionieren Sie das Handstück gemäß den Anweisungen auf der folgenden Seite. Dies sind die empfohlenen Ausgangspunkte.

FÜHREN SIE WÄHREND DES SCANS DIE RICHTIGE BEWEGUNG AUS

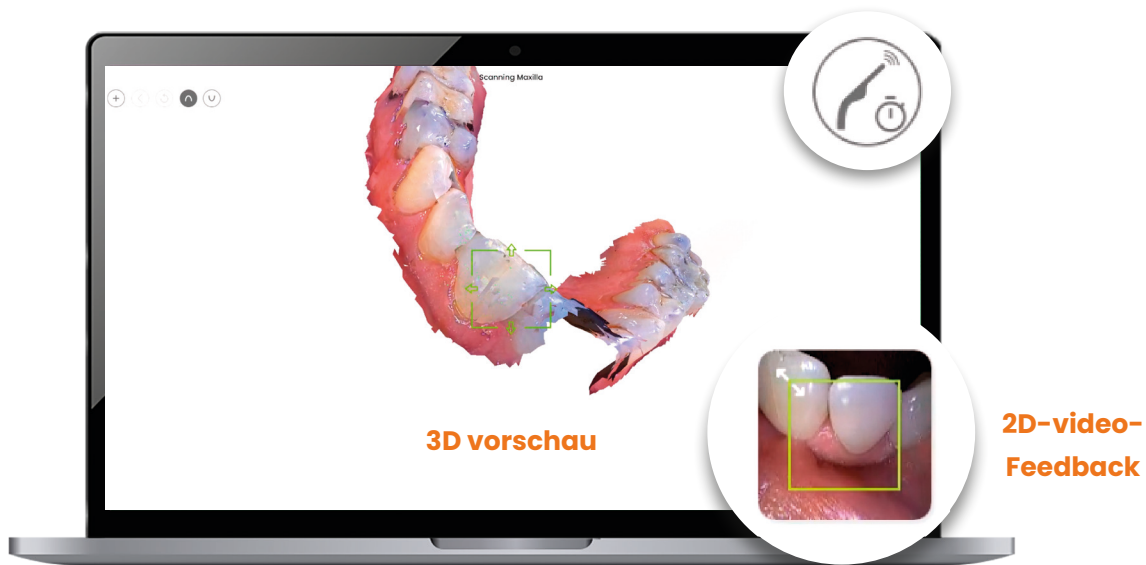

Verfolgen Sie Ihren Scan live und dank der 3D Echtzeit-Vorschau.


Scannen Sie mit gleichmäßiger Geschwindigkeit.

Wählen Sie eine konstante Geschwindigkeit und achten Sie auf gleichmäßige Bewegungen, **wie beim Streichen mit einem Pinsel über eine Leinwand**. Weder zu langsam noch zu schnell.



Zu Beginn des Scans wird ein Zähler aktiviert, der gelb und dann rot wird, wenn die Erfassungszeit zu lang ist.


Visuelle Hilfen in Echtzeit

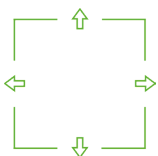

Alles in Ordnung.



Verlangsamen Sie, der Scan stabilisiert sich.

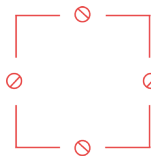

Die Verfolgung ist verloren gegangen, kehren Sie zu einem bereits erfassten Bereich zurück

Bewegen Sie sich flüssig

Der IRIS BY STARCK®-Scanner gleitet sanft und ohne Eile über die Zähne. Setzen Sie die Spitze gegen die Zähne, um den richtigen Abstand für einen präzisen Scan zu gewährleisten.



Um mit dem Scan zu beginnen, können Sie mit der Okklusalfase beginnen, dann zur Lingual- oder Palatinalfase übergehen und mit der Vestibulalfase abschließen.



Bei den Schneidezähnen, führen Sie eine Kippbewegung auf der Okklusalachse von innen nach außen aus und beenden Sie den Scan mit einer leichten Gleitbewegung auf der Vorderseite.

SCANNEN SIE GANZ NACH BELIEBEN

Sie können jederzeit pausieren, um Ihre 3D-Vorschau zu überprüfen oder zu bearbeiten und zu sehen, ob der Scan Ihren Anforderungen entspricht. Schwarze Bereiche weisen auf fehlende Daten hin. Ergänzen Sie diese gegebenenfalls.

Leuchtanzeige

Ein oder aus: Weiß – die Kamera ist eingeschaltet.

Tracking-Status: entspricht der Scan-Ansicht.

Grün: Tracking läuft.

Gelb: Verlangsamen Sie die Bewegung, der Scan stabilisiert sich.

Rot: Tracking-Verlust.

Scan starten.

Pause.

Fortsetzen.

Bestätigen

und starten Sie

die endgültige

Rekonstruktion.







 **Um ein gutes Scan-Erlebnis zu gewährleisten:** Verwenden Sie das Uhrensymbol (oben rechts in Ihrer Echtzeit-Scanansicht).


Grau: Sie können fortfahren.

Gelb: Verlangsamtes Scan-Erlebnis.

Rot: Starten Sie vorzugsweise die endgültige Rekonstruktion. Eine Wiederaufnahme des Scans ist mit dem Werkzeug "Scan fortsetzen" möglich.

Verwenden Sie nach dem Scan **die richtigen Tools**

Nutzen Sie die Funktionen zur Verwaltung des Scans, die Tools zur Unterstützung Ihrer Klinik und die Möglichkeiten für Vergleichsanalysen und Messungen (weitere Informationen finden Sie im INSIDE / Tools rund um den scan).

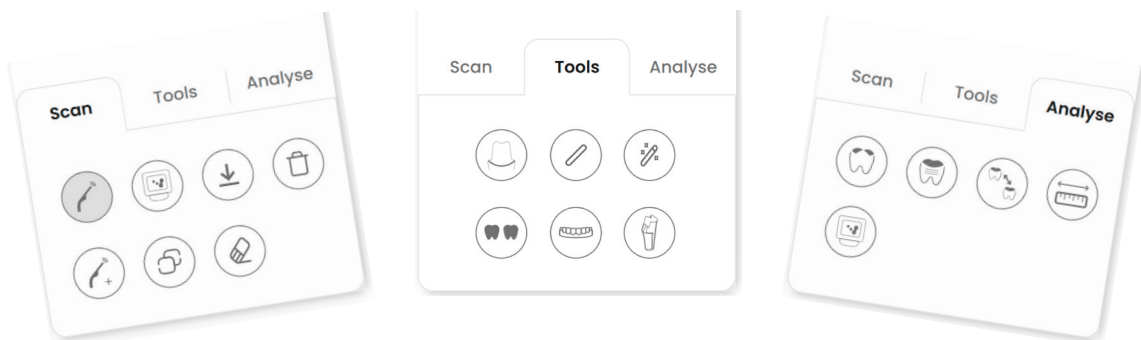

Befolgen Sie nach dem Scanvorgang Ihren bevorzugten Workflow bis zur Fertigstellung der Bestellungen (siehe Datenblätter INSIDE / Meine Bestellungen ; INSIDE / Freier Workflow oder INSIDE / Geführter Workflow).

MIT IRIS BY STARCK® NOCH WEITER KÖNNEN.

Entdecken Sie alle Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen.



Inside / **Einführungshandbuch**



Inside / **Meine Einstellungen**



Inside / **DIRECT SCAN**



Inside / **Mein Konto**



Inside / **Systeminformationen**



Inside / **Tools rund um den Scan**



Inside / **IRIS Connect**



Inside / **Kundendienst**



Inside / **Meine Bestellungen**



Inside / **Echtzeit-Scan**



Inside / **Meine Benachrichtigungen**



Inside / **Computerspezifikationen**



Inside / **Mein Partner**




Inside / **Geführter Workflow**



Inside / **Meine Patienten**



Inside / **Offener workflow**

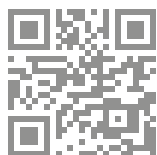

Auf die gesamte
Dokumentation
zugreifen.

Hersteller

Scan4all

Exzellenz, für alle.

137 rue Garance 31670 Labège - FRANCE

N° SIRET 507 484 863 00059

www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®

Medizinisches Gerät der Klasse I (MD) für die digitale Zahnmedizin. CE.

Nur für medizinisches Fachpersonal.

© Scan4all - Version 1.0 - 2026