


Scan⁴all
presenta

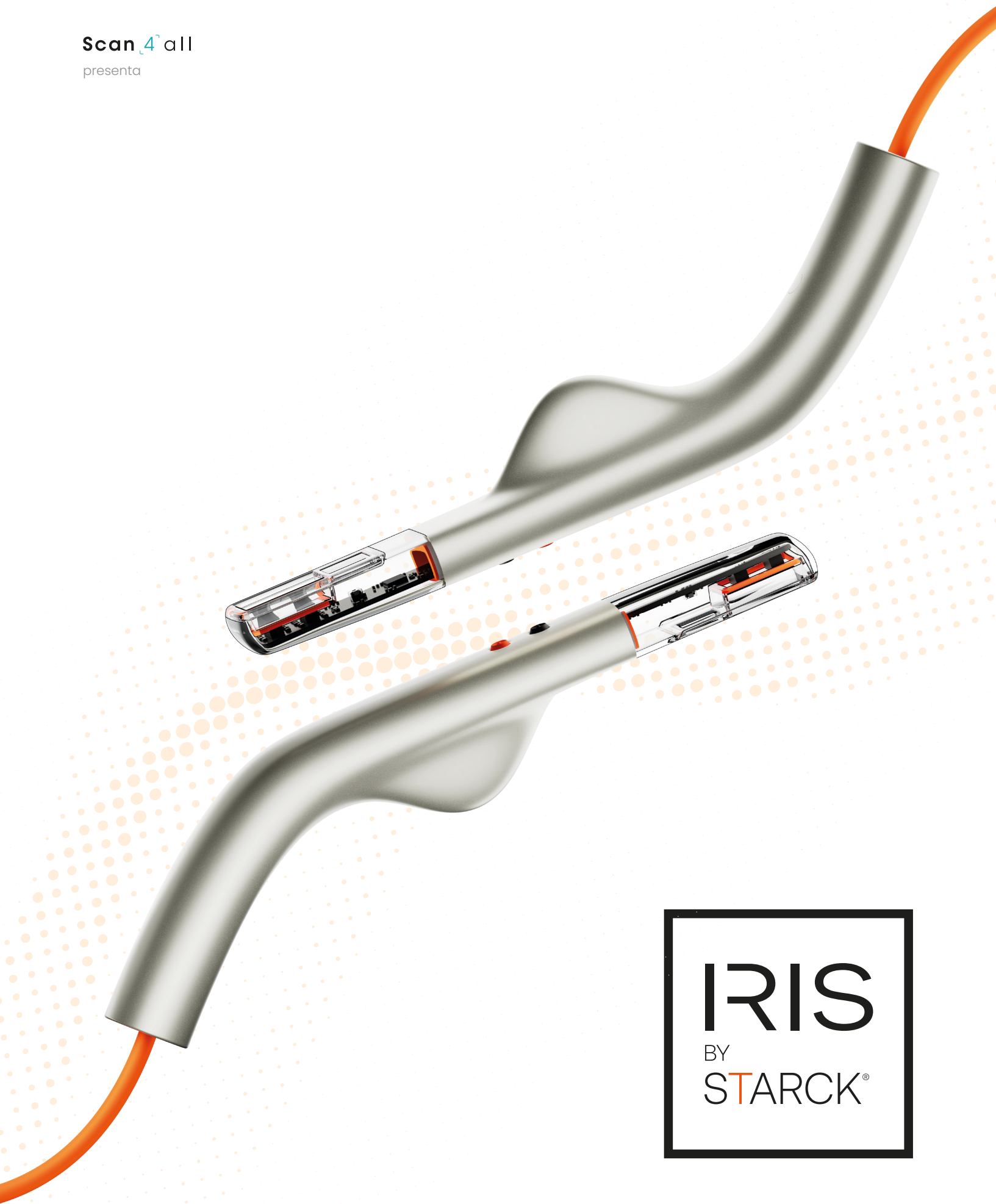

IRIS
BY
STARCK®

INSIDE / **Escaneo en tiempo real**

LA PREPARACIÓN: LA CLAVE DEL ÉXITO

IRIS BY STARCK® le permite capturar huellas 3D con un solo gesto.

IRIS
BY STARCK®



El ordenador debe permanecer conectado a una toma de corriente durante cada escaneo.



Evite la luz directa sobre la zona que se va a escanear, ya que puede interferir con la calibración de la iluminación del escáner y dificultar su funcionamiento.



Seque cuidadosamente la boca y los dientes para obtener una calidad de captura óptima.



Utilice guantes negros para garantizar un mínimo de reflejos parásitos.



Coloque la pieza de mano según las indicaciones de la página siguiente. Estos son los puntos de partida recomendados.

DURANTE EL ESCANEO, REALICE EL MOVIMIENTO CORRECTO



Siga su escaneo en directo y gracias a la vista previa en 3D en tiempo real.


Escanee a un ritmo constante

Adopte una velocidad constante y priorice la estabilidad del movimiento, **como un pincel sobre un lienzo**. Ni demasiado lento, ni demasiado rápido.



Al inicio del escaneo se activa un contador que se vuelve amarillo y luego rojo si el tiempo de captura es demasiado largo (véase la página siguiente).


Ayudas visuales en tiempo real

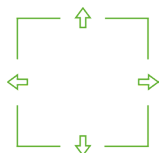

Todo va bien.



Reduzca la velocidad, el escaneo se está estabilizando.

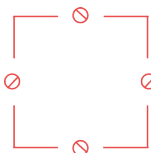

Se ha perdido el seguimiento, vuelva a una zona ya escaneada.

Mantenga un movimiento fluido

El escáner IRIS BY STARCK® se desliza sobre la dentadura, sin sacudidas ni prisas. Colocar la punta contra la dentadura garantiza la distancia adecuada para un escaneo preciso.

Para comenzar el escaneo, puede empezar por la cara oclusal, luego la lingual o palatina y terminar por la cara vestibular.

Para los incisivos, realice un movimiento de balanceo sobre el eje oclusal desde el interior hacia el exterior y termine deslizándose ligeramente por la cara anterior.

ESCANEE CON TOTAL LIBERTAD

Pause en cualquier momento para inspeccionar o manipular su vista previa en 3D y compruebe si el escaneo le conviene. Las zonas negras indican una falta de datos, recuerde completarlas si es necesario.

Indicador luminoso

Encendido o apagado: blanco, la cámara está encendida.

Estado del seguimiento: idéntico al de la vista de escaneo.

Verde: seguimiento en curso.

Amarillo: reduce la velocidad, el escaneo se está estabilizando.

Rojo: pérdida de seguimiento.

Iniciar el escaneo.

Pausar.

Reanudar.

**Validar e iniciar la
reconstrucción 3D
final.**



Para garantizar una buena experiencia de escaneo: utiliza el icono del cronómetro (en la parte superior derecha de la vista de escaneo en tiempo real).


Gris: puedes continuar.

Amarillo: la experiencia de escaneo se ha ralentizado.

Rojo: es preferible iniciar la reconstrucción final. Podrás reanudar el escaneo mediante la herramienta "Reanudar el escaneo".

Utilice las herramientas adecuadas después del escaneo

Aproveche las funciones relacionadas con la gestión del escaneo, las herramientas para ayudarle en su clínica y las posibilidades de análisis comparativos y mediciones (más información en la ficha [INSIDE / Mis herramientas para el escaneo](#)).

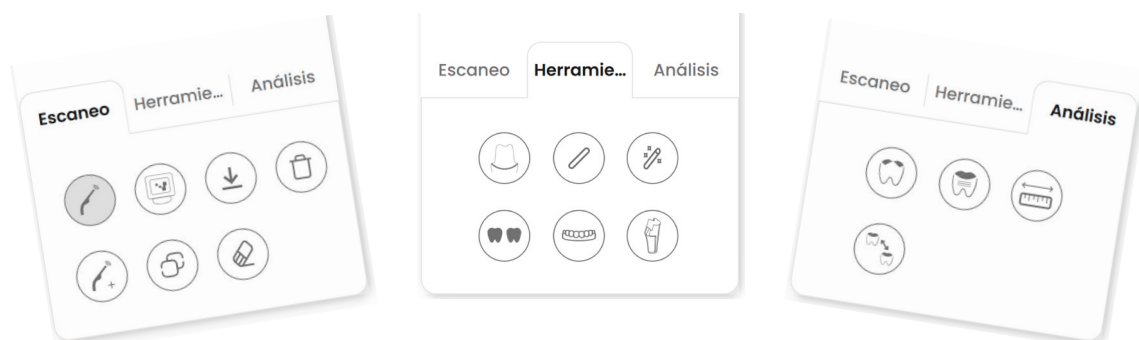

Después del proceso de escaneo, siga su workflow preferido hasta la finalización de los pedidos (consulte las fichas [INSIDE / Mis pedidos](#) ; [INSIDE / Workflow libre](#) ; [INSIDE / Workflow guiado](#)).

LLEGA MÁS LEJOS CON IRIS BY STARCK®.

Explora todos los recursos a tu disposición.

-  Inside / **Guía de inicio**
-  Inside / **Mis ajustes**
-  Inside / **DIRECT SCAN**
-  Inside / **Mi cuenta**
-  Inside / **Información del sistema**
-  Inside / **Herramientas relacionadas con el escaneo**
-  Inside / **IRIS Connect**
-  Inside / **Servicio postventa**
-  Inside / **Mis pedidos**
-  Inside / **Escaneo in tiempo real**
-  Inside / **Mis notificaciones**
-  Inside / **Especificaciones técnicas del ordenador**
-  Inside / **Mis socios**
-  Inside / **Workflow guiado**
-  Inside / **Mis pacientes**
-  Inside / **Workflow libre**



Acceder a toda la documentación.

Fabricante

Scan4all

Excelencia, para todos.

137 rue Garance 31670 Labège - FRANCE

N° SIRET 507 484 863 00059

 www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®

Dispositivo médico de clase 1 (DM) destinado a la odontología digital. CE.

Solo para profesionales sanitarios.

© Scan4all - Version 1.0 - 2026