


Scan⁴all
présente

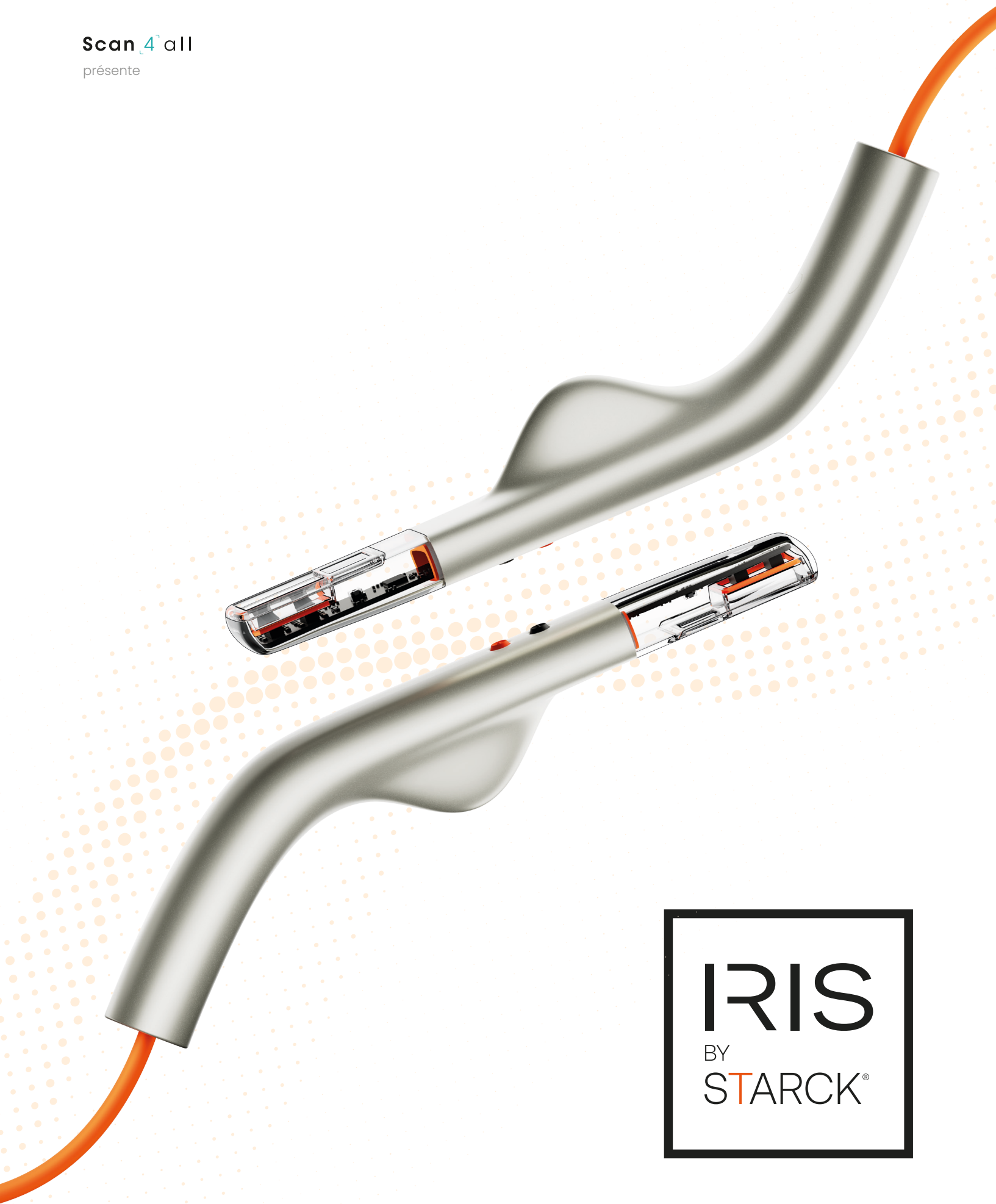

INSIDE / **Scan en temps réel**

LA PRÉPARATION : LA CLÉ DU SUCCÈS

IRIS BY STARCK® vous permet de capturer des empreintes 3D en un seul geste.



L'ordinateur doit rester branché sur une prise secteur pendant chaque scan.



Éviter toute lumière directe sur la zone à scanner car cela peut entrer en concurrence avec la calibration de l'éclairage du scanner et gêner son fonctionnement.



Utiliser des gants noirs afin de garantir un minimum de reflets parasites.



Sécher soigneusement la bouche et les dents pour une qualité de capture optimal.



Positionner la pièce à main selon les indications de la page suivante. Ce sont vos points de départ recommandés.

PENDANT LE SCAN: ADOPTEZ LE BON MOUVEMENT



Suivez votre scan en direct et grâce à la prévisualisation 3D en temps réel.

Scannez à une allure régulière

Adoptez une vitesse constante et privilégiez la stabilité du mouvement **tel un pinceau le long d'une toile**. Ni trop lent, ni trop rapide.



Un compteur se déclenche au début du scan et devient jaune puis rouge si le temps de capture est trop long (voir page suivante).


Gardez un geste fluide

Le scanner IRIS BY STARCK® glisse sur la dentition, sans à-coup, ni précipitation. Placer l'embout contre la dentition garantit la bonne distance pour un scan précis.

Pour débuter votre scan, vous pouvez commencer par la face occlusale, puis linguale ou palatine pour terminer par la face vestibulaire.

Pour les incisives, effectuez un mouvement de bascule sur l'axe occlusale et finissez en glissant légèrement sur la face avant.


Aides visuelles en temps réel

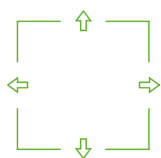

Tout va bien.



Ralentissez, le scan se stabilise.

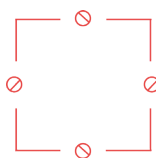

Le tracking est perdu, revenez sur une zone déjà acquise.

SCANNEZ EN TOUTE LIBERTÉ

Mettez en pause à tout instant pour inspecter ou manipuler votre prévisualisation 3D et vérifiez si le scan vous convient. Les zones noires indiquent un manque de données, pensez à compléter si nécessaire.

Signal lumineux

Allumé ou éteint : blanc, la caméra est allumée.

Etat de tracking : identique à la vue de scan.

Vert : tracking en cours.

Jaune : ralentissez, le scan se stabilise.

Rouge : perte de tracking.

Démarrer le scan.

Mettre en pause.

Reprendre.

Valider et lancer la reconstruction finale.



💡 Pour maintenir une bonne expérience de scan : utiliser l'icône chrono (en haut à droite de votre vue de scan en temps réel).


Gris : vous pouvez continuer.

Jaune : expérience de scan ralentie.

Rouge : privilégiez le lancement de la reconstruction finale. Une reprise de scan sera possible grâce à l'outil "Reprendre le scan".

Utilisez les bons outils après le scan

Exploitez les fonctionnalités liées à la gestion du scan, des outils pour vous accompagner dans votre clinique et des possibilités d'analyses comparatives et de mesures (plus d'informations sur la fiche [INSIDE / Mes outils autour du scan](#)).

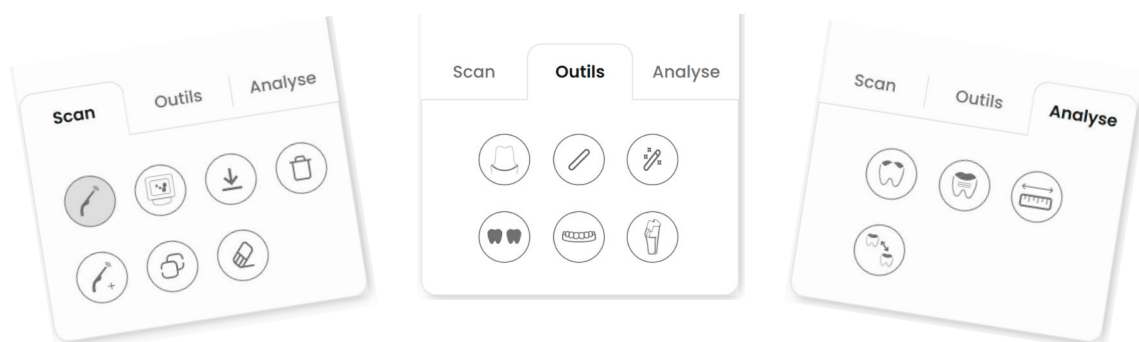

Après votre processus de scan, suivez votre workflow privilégié jusqu'à la finalisation des commandes (voir les fiches [Inside / Mes commandes](#) ; [Inside / Workflow libre](#) ; [Inside / Workflow guidé](#)).

ALLER PLUS LOIN AVEC IRIS BY STARCK®.

Explorez l'ensemble des ressources mises à votre disposition.



Inside / [Guide de démarrage](#)



Inside / [Mes réglages](#)



Inside / [DIRECT SCAN](#)



Inside / [Mon compte](#)



Inside / [Informations système](#)



Inside / [Outils autour du scan](#)



Inside / [IRIS Connect](#)



Inside / [SAV](#)



Inside / [Mes commandes](#)



Inside / [Scan en temps réel](#)



Inside / [Mes notifications](#)



Inside / [Spécifications techniques ordinateur](#)



Inside / [Mes partenaires](#)




Inside / [Workflow guidé](#)



Inside / [Mes patients](#)



Inside / [Workflow libre](#)

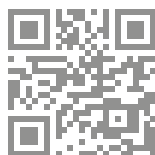

Accéder à toute la documentation.

Fabricant

Scan⁴all

L'excellence, pour tous.

137 rue Garance 31670 Labège - FRANCE

N° SIRET 507 484 863 00059

www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®

Dispositif médical de classe I (DM) destiné à la dentisterie numérique. CE.

Réservé aux professionnels de santé.

© Scan4all - Version 1.0 - 2026