


Scan⁴all
presenta

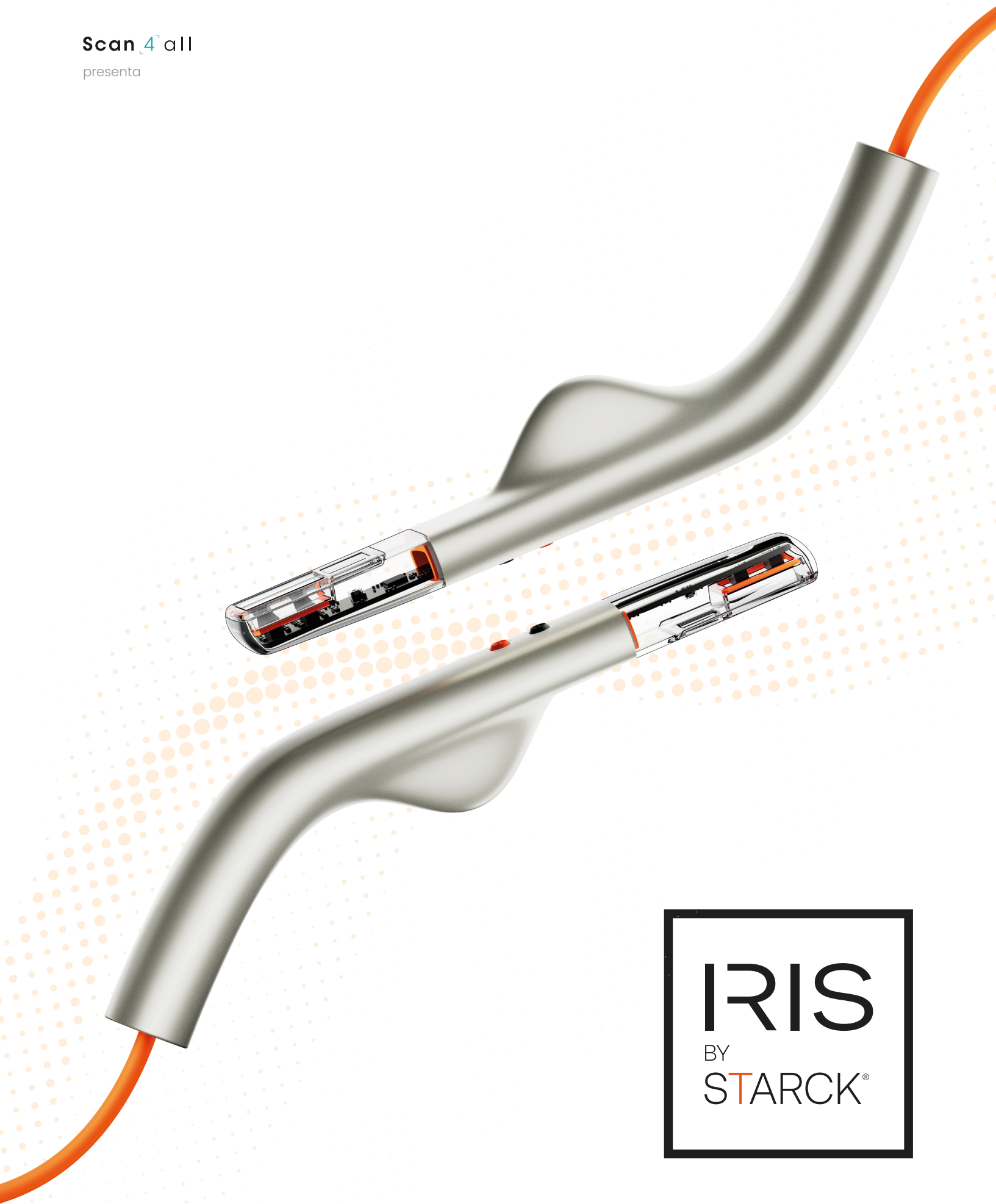

IRIS
BY
STARCK®

INSIDE / **Scansione in tempo reale**

LA PREPARAZIONE: LA CHIAVE DEL SUCCESSO

IRIS BY STARCK® consente di acquisire impronte digitali 3D con un solo gesto.

IRIS
BY STARCK®



Il computer deve rimanere collegato a una presa di corrente durante ogni scansione.



Evitare qualsiasi luce diretta sulla zona da scansionare, poiché potrebbe interferire con la calibrazione dell'illuminazione dello scanner e comprometterne il funzionamento.



Asciugare accuratamente la bocca e i denti per ottenere una qualità di acquisizione ottimale.



Utilizzare guanti neri per garantire un minimo di riflessi parassiti.



Posizionare il manipolo secondo le indicazioni riportate nella pagina seguente. Questi sono i punti di partenza consigliati.

DURANTE LA SCANSIONE, ESEGUIRE IL MOVIMENTO CORRETTO



Seguite la scansione in diretta grazie all'anteprima 3D in tempo reale.


Scansionate a velocità costante

Adotta una velocità costante e privilegia la stabilità del movimento, **come un pennello che scorre lungo una tela**. Né troppo lento, né troppo veloce.



All'inizio della scansione si attiva un contatore che diventa giallo e poi rosso se il tempo di acquisizione è troppo lungo (vedi pagina seguente).


Aiuti visivi in tempo reale

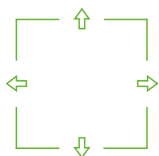

Tutto bene.



Rallentare, la scansione si sta stabilizzando.

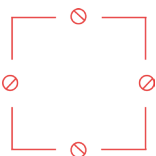

Il tracciamento è stato perso, tornare su un'area già acquisita.

Mantenete un movimento fluido

Lo scanner IRIS BY STARCK® scivola sulla dentatura senza scatti né fretta. Posizionare la punta contro la dentatura garantisce la giusta distanza per una scansione precisa.

Per iniziare la scansione, potete partire dalla faccia oclusale, poi passare a quella linguale o palatina e terminare con la faccia vestibolare.

Per gli incisivi, resequire un movimento oscillatorio sull'asse oclusale dall'interno verso l'esterno e terminare scivolando leggermente sulla faccia anteriore.

SCANSIONA IN TUTTA LIBERTÀ

È possibile mettere in pausa in qualsiasi momento per ispezionare o manipolare l'anteprima 3D e verificare che la scansione sia soddisfacente. Le aree nere indicano una mancanza di dati, quindi ricordarsi di completare la scansione se necessario.

Indicator luminoso

Acceso o spento: bianca, la telecamera è accesa.

Stato del tracciamento: identico a quello visualizzato nella schermata di scansione.

Verde: tracciamento in corso.

Giallo: rallentare, la scansione si sta stabilizzando.

Rosso: perdita di tracciamento.

Avviare la scansione.

Mettere in pausa.

Riprendere.

Convalidare e avviare la
ricostruzione 3D finale.



Per garantire una buona esperienza di scansione: utilizzare l'icona del cronometro (in alto a destra nella vista di scansione in tempo reale).

Grigio: è possibile continuare.

Giallo: esperienza di scansione rallentata.

Rosso: è preferibile avviare la ricostruzione finale. Sarà possibile riprendere la scansione utilizzando lo strumento "Riprendi la scansione".

Utilizza gli strumenti giusti dopo la scansione

Sfruttate le funzionalità relative alla gestione della scansione, gli strumenti per assistervi nella vostra clinica e le possibilità di analisi comparative e misurazioni (maggiori informazioni nella scheda [INSIDE / I miei strumenti per la scansione](#)).



Dopo il processo di scansione, segui il tuo flusso di lavoro preferito fino al completamento degli ordini (vedi le schede [INSIDE / I miei ordini](#); [INSIDE / Flusso di lavoro libero](#); [INSIDE / Flusso di lavoro guidato](#)).

VAI OLTRE CON IRIS BY STARCK®.

Scopri tutte le risorse a tua disposizione.

IRIS
BY STARCK®



Inside / Guida introduttiva



Inside / Le mie impostazioni



Inside / DIRECT SCAN



Inside / Il mio account



Inside / Informazioni di sistema



Inside / Strumenti relativi alla scansione



Inside / IRIS Connect



Inside / SAV



Inside / I miei ordini



Inside / Scansione in tempo reale



Inside / Le mie notifiche



Inside / Specifiche tecniche del computer



Inside / I miei partner




Inside / Workflow guidato



Inside / I miei pazienti



Inside / Workflow libero

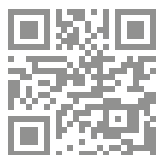

Accedere a tutta la documentazione.

Produttore

Scan4all

Eccellenza, per tutti.

137 rue Garance 31670 Labège - FRANCE

N° SIRET 507 484 863 00059

www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®

Dispositivo medico di classe I (DM) destinato all'odontoiatria digitale. CE.

Riservato esclusivamente agli operatori sanitari.

© Scan4all - Version 1.0 - 2026

INS.R&D-INSIDE_12_IT_real_time_scan_20260831

Scan4all SAS - 131 rue Garance 31670 LABEGE - N° SIRET 507 484 863 00059