


Scan 4 all

를 선보입니다

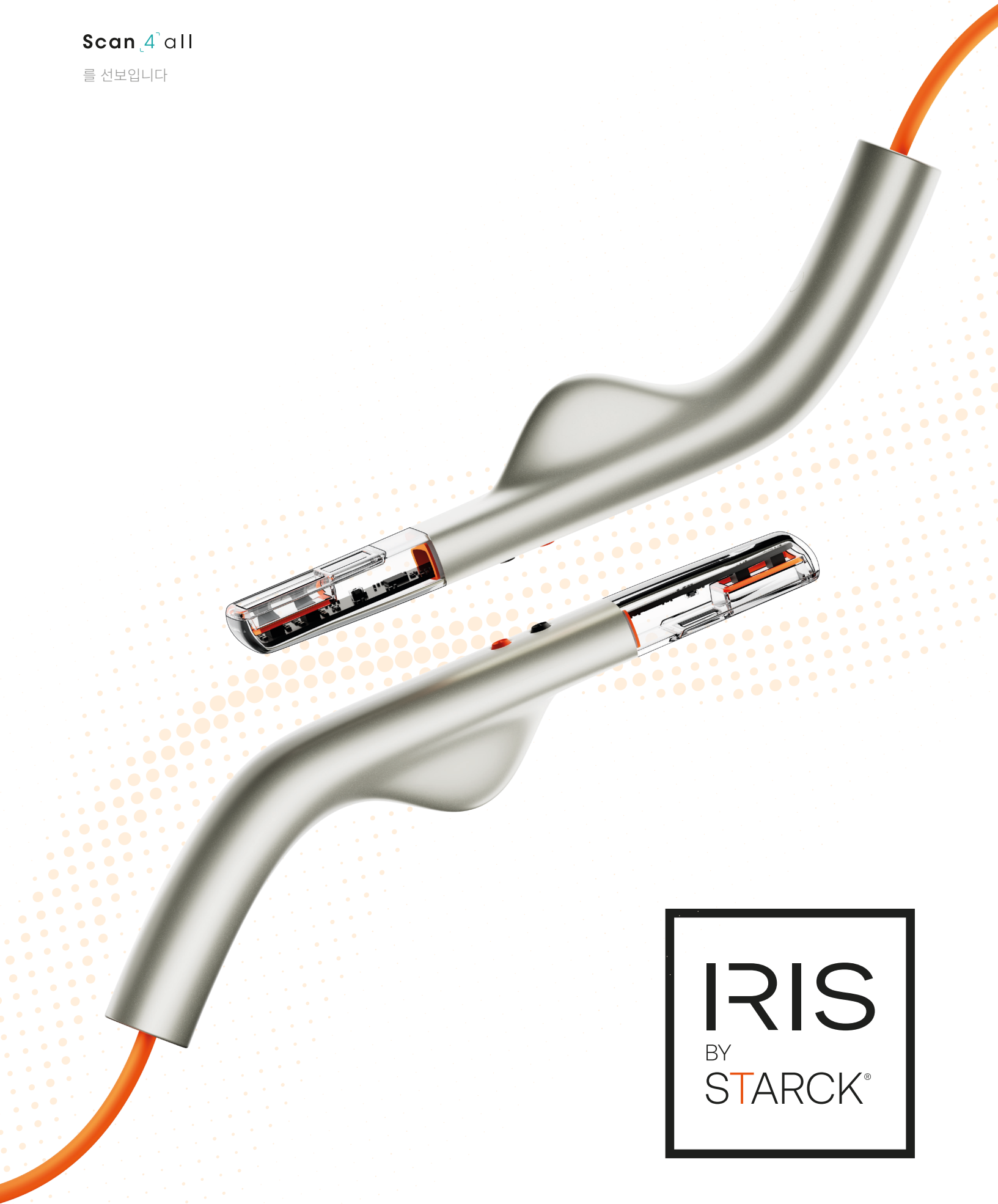

IRIS
BY
STARCK®

내부 / 실시간 스캔

준비: 성공의 열쇠

IRIS BY STARCK®을 사용하면 한 번의 단계로 3D 지문을 캡처할 수 있습니다.



스캔 중에는 컴퓨터를 전원 콘센트에 계속 연결해 두어야 합니다.



스캔할 부위에 직사광선이 닿지 않도록 하십시오.
직사광선은 스캐너의 조명 보정에 방해가 되어
작동에 영향을 줄 수 있습니다.



원치 않는 반사를 최소화하기 위해 검은색 장갑을
착용하십시오.



최적의 캡처 품질을 위해 입과 치아를 완전히 말리십시오.



다음 페이지에 표시된 대로 핸드피스를 배치하십시오. 이는
권장되는 시작점입니다.

스캔 시 올바른 동작을 취하십시오



실시간 미리보기를 통해 스캔 과정을 실시간으로 확인하십시오.

일정한 속도로 스캔하십시오.

일정한 속도를 유지하고 캔버스 위의 붓처럼 안정된 움직임에 집중하십시오. 너무 느리지도, 너무 빠르지도 않게 하십시오.




스캔 시작 시 타이머가 작동하며, 캡처 시간이 너무 길어지면 노란색으로, 그 다음에는 빨간색으로 바뀝니다.

움직임을 유연하게 유지하세요

IRIS BY STARCK® 스캐너는 서두르지 않고 치아 위를 부드럽게 미끄러지듯 이동합니다. 팁을 치아에 대면 정확한 스캔을 위한 적절한 거리가 유지됩니다.

💡 스캔을 시작하려면 교합면에서 시작하여 설측 또는 구개면으로 이동한 다음, 구강면으로 마무리할 수 있습니다.


실시간 시각적 안내

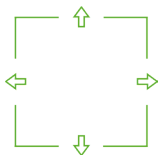

모든 것이
정상입니다.



속도를 늦추세요.
스캔이 안정화되고
있습니다.

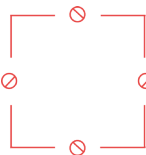

추적이 끊어졌습니다.
이미 스캔한 영역으로
돌아가세요.

💡 전치의 경우, 스캐너를 교합축을 따라 안쪽에서 바깥쪽으로 흔들듯이 움직인 다음, 앞면을 가볍게 미끄러지듯 스캔하여 마무리합니다.

자유롭게 스캔하기

언제든지 일시 정지하여 3D 미리보기를 확인하거나 조정하고, 스캔 결과가 만족스러운지 확인하십시오. 검은색 영역은 데이터가 부족한 부분을 나타내므로, 필요한 경우 스캔을 완료하십시오.

표시등

전원 켜짐/꺼짐: 흰색일 때, 카메라가 켜져 있습니다.

추적 상태: 스캔 화면과 동일합니다.

녹색: 추적 중.

노란색: 속도를 줄이세요. 스캔이 안정화되고 있습니다.

빨간색: 트래킹 손실.

스캔 시작.

일시 정지.

재개.

확인 후 실행

최종 재구성.



원활한 스캔 경험을 유지하려면: 시계 아이콘(실시간 스캔 화면 우측 상단)을 사용하세요.

회색: 계속 진행할 수 있습니다.

노란색: 스캔 속도가 느려졌습니다.

빨간색: 최종 재구성을 우선적으로 실행하십시오. “스캔 재개” 도구를 사용하여 스캔을 다시 시작할 수 있습니다.

스캔 후 적절한 도구를 활용하세요

스캔 관리 기능, 진료실 업무를 지원하는 도구, 비교 분석 및 측정 옵션을 활용하십시오 (내부 / 스캔 관련 도구).



스캔 과정이 끝나면 주문이 완료될 때까지 선호하는 워크플로를 따르십시오 (내부 / 내 주문; 내부 / 내부 / 자유형 워크플로우; 내부 / 가이드형 워크플로우).

IRIS BY STARCK®와 함께 더 많은 기능을 경험해 보세요.

이용 가능한 모든 리소스를 살펴보세요.

 내부 / 시작 가이드

 내부 / 내 설정

 내부 / DIRECT SCAN

 내부 / 내 계정

 내부 / 시스템 정보

 내부 / 스캔 관련 도구

 내부 / IRIS Connect

 내부 / SAV

 내부 / 내 주문

 내부 / 실시간 스캔

 내부 / 내 알림

 내부 / 컴퓨터 기술 사양

 내부 / 내 파트너

 내부 / 가이드형 워크플로우

 내부 / 내 환자

 내부 / 자유형 워크플로우



전체 문서를 확인하십시오.

제조업체

Scan4all

모두를 위한 탁월함.

137 rue Garance 31670 Labège - 프랑스

N° SIRET 507 484 863 00059

www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®
디지털 치과용 1등급 의료기기(MD).
의료 전문가 전용.
© Scan4all - 버전 1.0 - 2026