


Scan 4 all


를 선보입니다

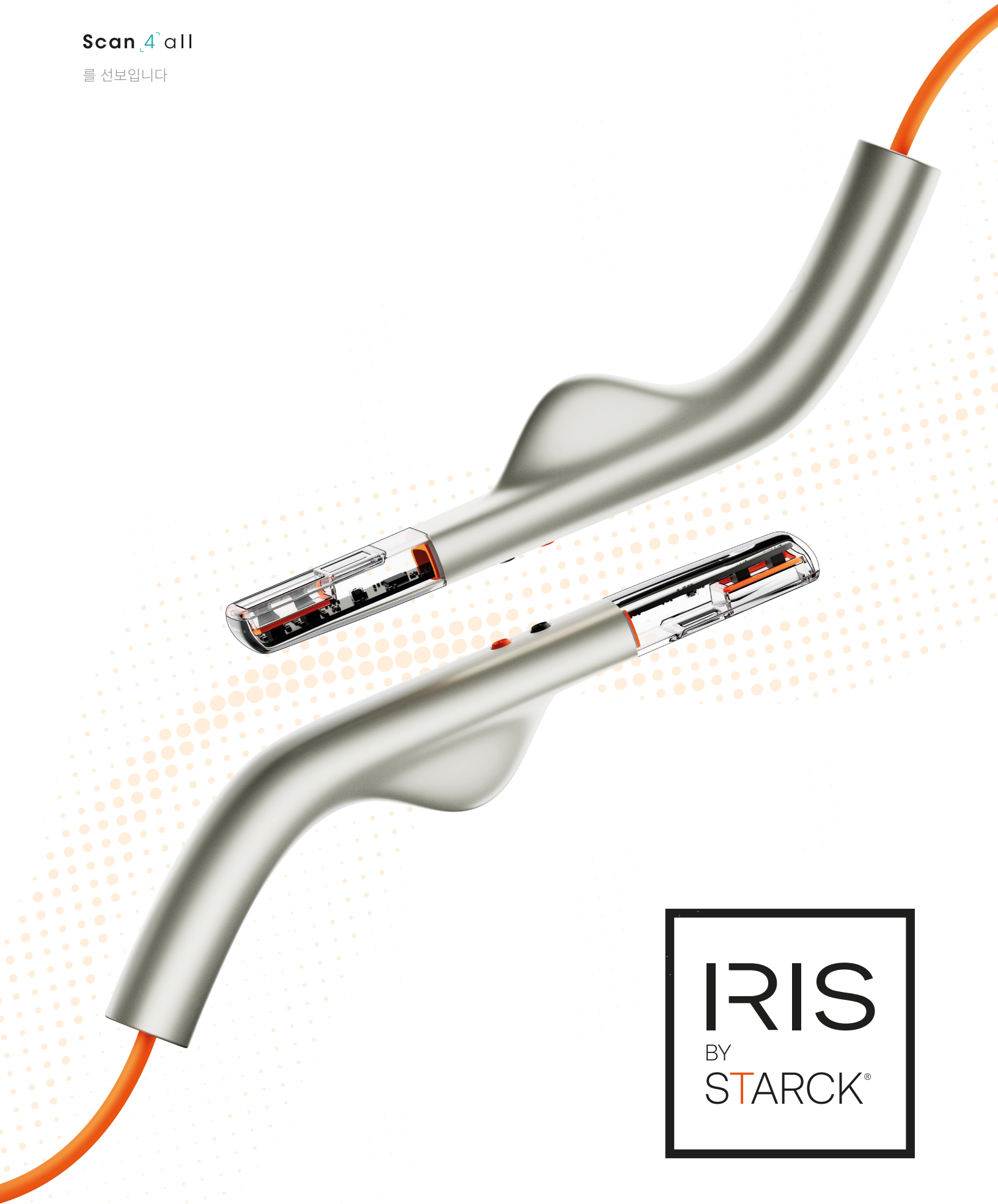

IRIS
BY
STARCK®

내부 / 가이드 워크플로우

워크플로우, 맞춤형 프로세스

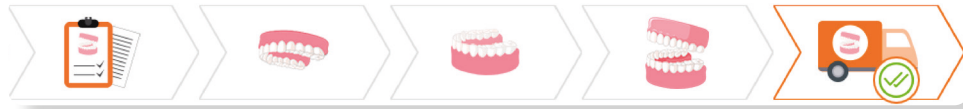


보철 파일 편집 > 상악 스캔 > 하악 스캔 > 교합 스캔 > 주문 전송.

이 워크플로는 주문 전송에 필요한 여러 단계를 반영합니다: 보철 파일 생성부터 파일 생성부터 선택한 스캔 전송까지의 과정을 따릅니다.

지능형 안내

가이드 워크플로는 보철 파일에서 선택한 치료에 따라 자동으로 지원합니다. 각 시술 유형에 따라 주문에 필요한 스캔 단계가 시작되므로, 사용자는 단순히 프로세스를 따르기만 하면 됩니다.

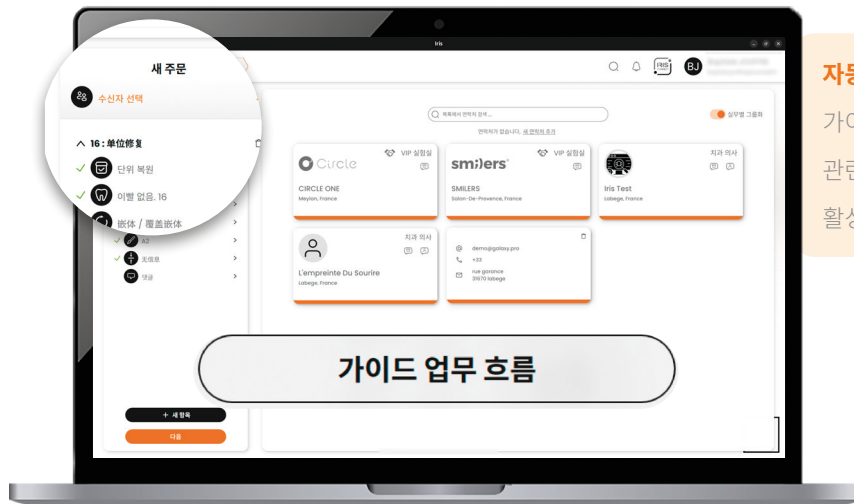

자동 AI 임플란트

가이드 워크플로우에서 AI 임플란트 기능은 관련 임플란트 및 치아에 대해 자동으로 활성화됩니다.



가이드 워크플로우를 사용해야
하는 이유는 무엇일까요?

시간 절약

각 단계는 임상적 필요에 따라 미리 정의되어 있습니다.


✓ 기본적인 신뢰성

중단이나 누락 없이 치료의 논리적 흐름을 따릅니다.

+ 사용자 정의 가능

언제든지 스캔을 추가할 수 있습니다.

가이드 주문 생성

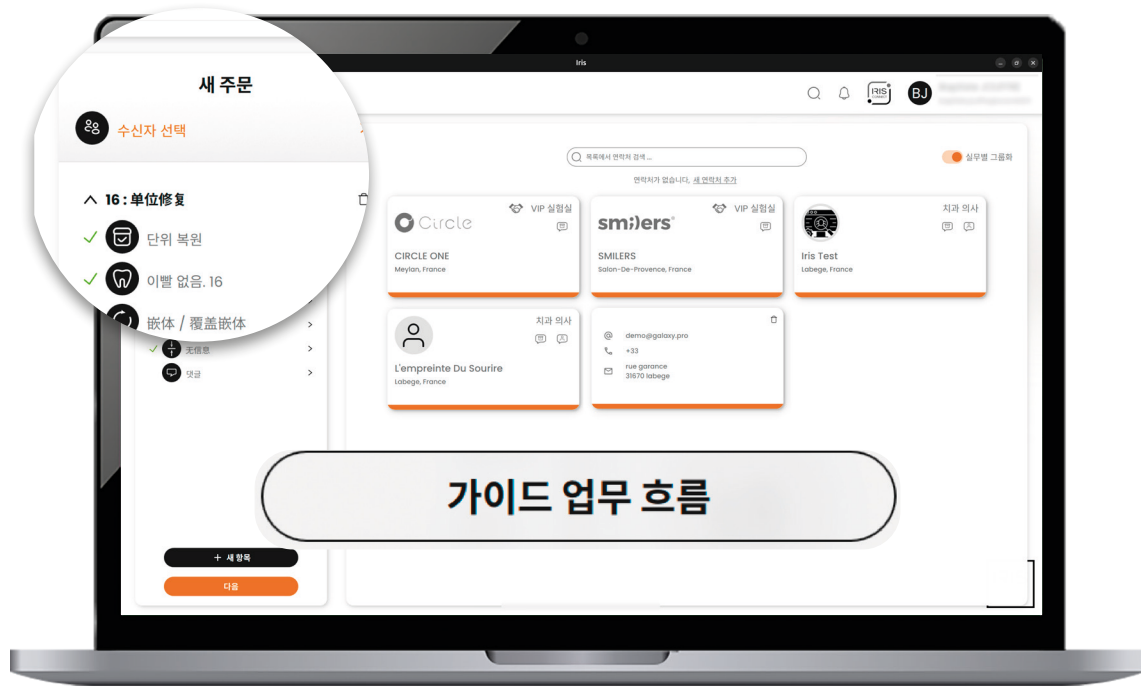

환자 파일 또는 "주문" 탭에서 "새 주문"을 클릭하십시오.

원하는 실험실*을 선택하고, 보철 양식을 작성하고, 가이드 워크플로를 선택한 다음, 자동으로 제안되는 모든 필수 스캔을 수행하십시오. 주문이 완료될 때까지 단계별로 안내를 받게 됩니다.



IRIS CONNECT가 최신 정보를 제공합니다.

날짜, 교환, 추적: 모든 정보가 중앙 집중화되어 즉시 업데이트됩니다. IRIS BY STARCK[®] CONNECT 인터페이스에서 실험실과 직접 채팅하세요. 스마트 알림을 통해 주문 진행 상황을 실시간으로 확인하세요.

IRIS BY STARCK®와 함께 더 많은 기능을 경험해 보세요.

이용 가능한 모든 리소스를 살펴보세요.

 내부 / 시작 가이드

 내부 / 내 설정

 내부 / DIRECT SCAN

 내부 / 내 계정

 내부 / 시스템 정보

 내부 / 스캔 관련 도구

 내부 / IRIS Connect

 내부 / SAV

 내부 / 내 주문

 내부 / 실시간 스캔

 내부 / 내 알림

 내부 / 컴퓨터 기술 사양

 내부 / 내 파트너

 내부 / 가이드형 워크플로우

 내부 / 내 환자

 내부 / 자유형 워크플로우



전체 문서를 확인하십시오.

제조업체

Scan4all

모두를 위한 탁월함.

137 rue Garance 31670 Labège - 프랑스

N° SIRET 507 484 863 00059

www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®
디지털 치과용 1등급 의료기기(MD).
의료 전문가 전용.
© Scan4all - 버전 1.0 - 2026