



Scan⁴all
präsentiert

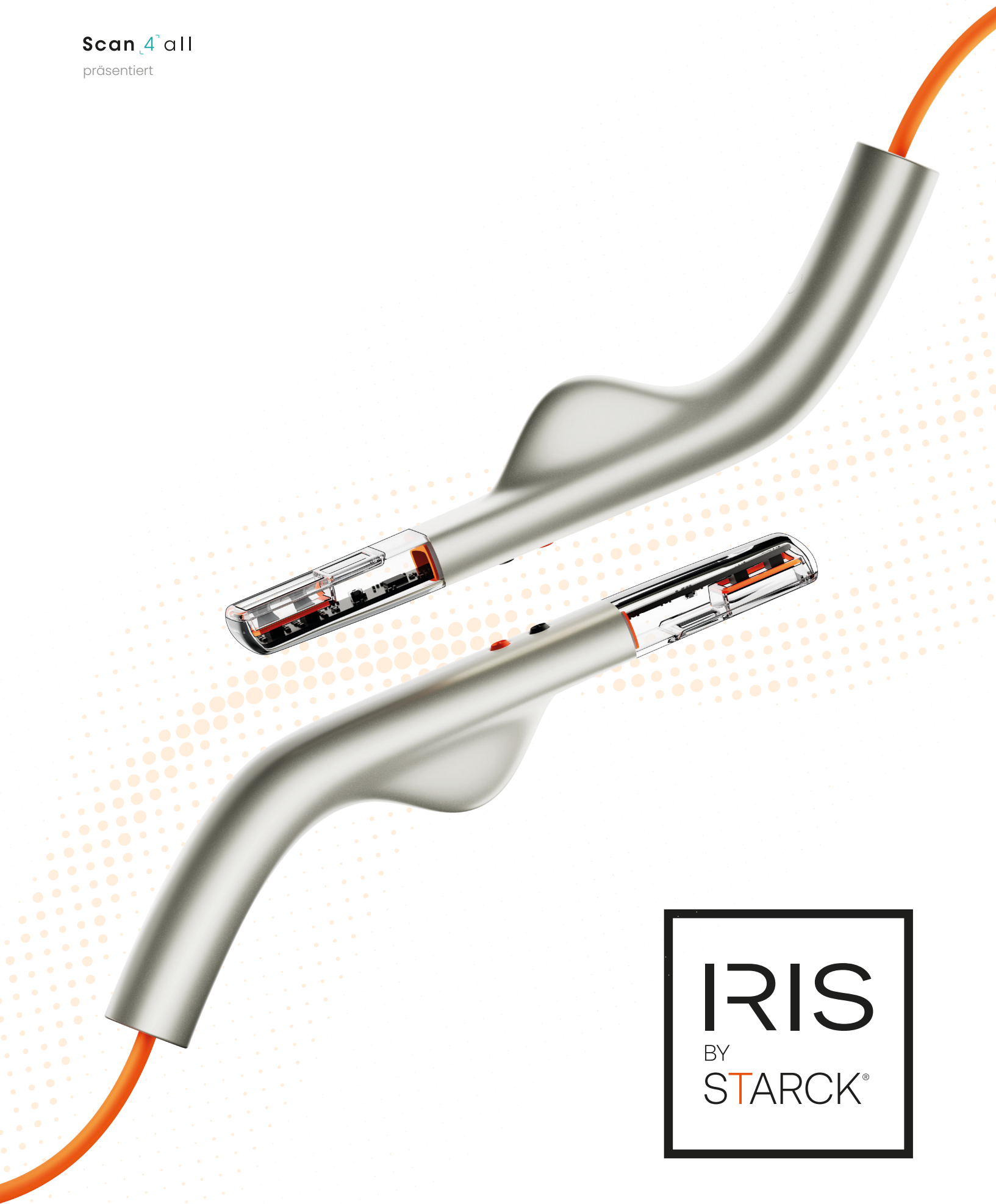

IRIS
BY
STARCK®

INSIDE / **Offener workflow**

DER WORKFLOW, EIN ANGEPASSTER ABLAUF

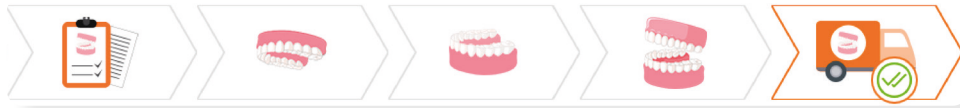


Prothetikblatt bearbeiten > Oberkiefer-Scan > Unterkiefer-Scan > Okklusions-Scan > Bestellung absenden.

Der workflow entspricht **den verschiedenen Schritten**, die zum Absenden einer Bestellung erforderlich sind: von der Erstellung der Prothesenakte bis zum Versand der ausgewählten Scans.

IHR ABLAUF, IHRE UNABHÄNGIGKEIT

Im offener Arbeitsablauf ist jeder Schritt unabhängig (per Klick auf die Leiste). **Sie sind dafür verantwortlich, die für eine vollständige Bestellung erforderlichen Scans durchzuführen**, nachdem Sie ein Prothesenblatt ausgefüllt haben.

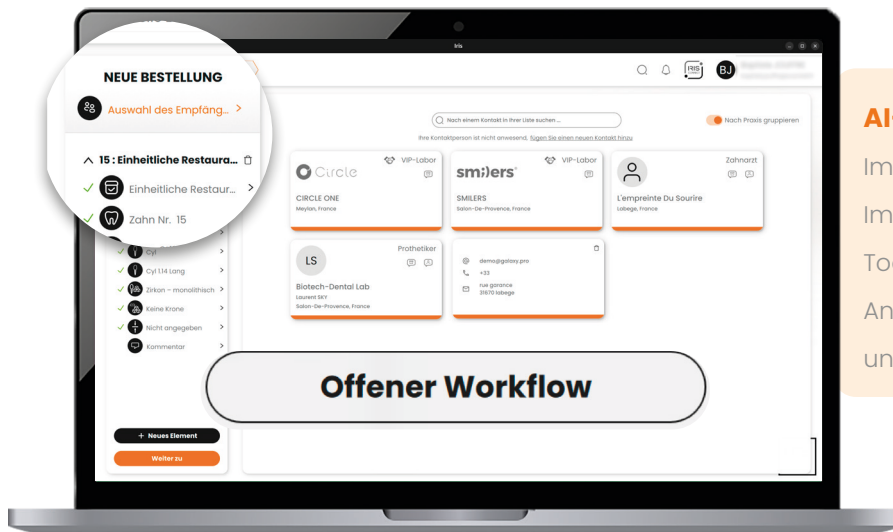

AI-Implantat verfügbar

Im offener Workflow ist die KI-Implantatfunktion über die Scan-Tools verfügbar und erfordert die Angabe der betroffenen Implantate und Zähne.



Warum den geführten Workflow verwenden ?

Sie wissen, welche Scans Sie benötigen.

- › Sie haben ein Prothesenformular ausgefüllt und möchten die zu scannenden Zahnbögen selbst auswählen.

Sie haben bereits die erforderlichen Abdrücke.

- › Sie starten Ihren Auftrag direkt anhand der Scans aus der Patientenhistorie.
- › Sie möchten einen zusätzlichen Zahnbogen scannen.
- › Sie benötigen nur eine Okklusion und möchten den Biss nehmen.

OPTIMALIERT FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT

Die Funktion **DIRECT SCAN** ist eine freie Workflow-Funktion, mit der Sie sofort einen Scan starten können, ohne dass ein Auftrag vorliegen muss.

DIRECT SCAN →



Oberkiefer-Scan > Unterkiefer-Scan > Okklusions-Scan



Maximale Zeitersparnis


Die Scans werden anschließend der Patientenakte hinzugefügt. Der Zahnarzt kann die Prothesenakte vervollständigen und die Bestellung später abschließen.




Für die Teamarbeit konzipiert

Zahnarzthelferinnen können selbstständig scannen. Wählen Sie einfach den oder die zu scannenden Zahnbögen aus.

EINE BESTELLUNG ABSCHLIESSEN

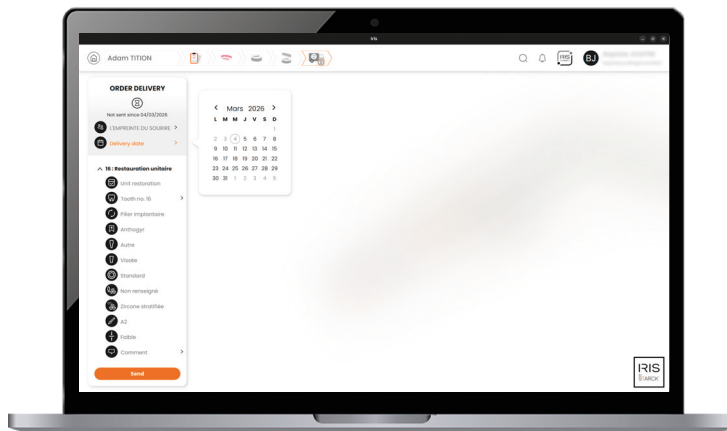

Nachdem Sie den Scan in der Patientenakte gespeichert haben, wählen Sie die Patientenakte aus und klicken Sie in der Historie auf den Eintrag **DIRECT SCAN**.

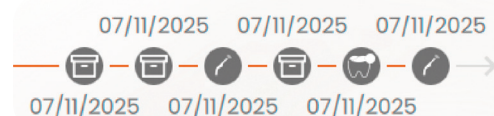

Wählen Sie das Labor Ihrer Wahl, füllen Sie das Prothesenblatt aus und bestätigen Sie. Klicken Sie abschließend auf den Schritt "Bestellung liefern" und wählen Sie Ihr Lieferdatum.



IRIS CONNECT hält Sie auf dem Laufenden.

Termine, Austausch, Nachverfolgung: Alles ist zentralisiert und wird sofort aktualisiert. Kommunizieren Sie direkt mit den Labors über die IRIS CONNECT-Schnittstelle. Intelligente Benachrichtigungen halten Sie über den Fortschritt Ihrer Bestellungen auf dem Laufenden.

MIT IRIS BY STARCK® NOCH WEITER KONNEN.

Entdecken Sie alle Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen.



Inside / **Einführungshandbuch**



Inside / **Meine Einstellungen**



Inside / **DIRECT SCAN**



Inside / **Mein Konto**



Inside / **Systeminformationen**



Inside / **Tools rund um den Scan**



Inside / **IRIS Connect**



Inside / **Kundendienst**



Inside / **Meine Bestellungen**



Inside / **Echtzeit-Scan**



Inside / **Meine Benachrichtigungen**



Inside / **Computerspezifikationen**



Inside / **Mein Partner**




Inside / **Geführter Workflow**



Inside / **Meine Patienten**



Inside / **Offener workflow**

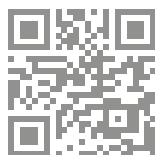

Auf die gesamte
Dokumentation
zugreifen.

Hersteller

Scan⁴all

Exzellenz, für alle.

137 rue Garance 31670 Labège - FRANCE

N° SIRET 507 484 863 00059

www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®

Medizinisches Gerät der Klasse I (MD) für die digitale Zahnmedizin. CE.

Nur für medizinisches Fachpersonal.

© Scan4all - Version 1.0 - 2026