


Scan 4 all
presenta

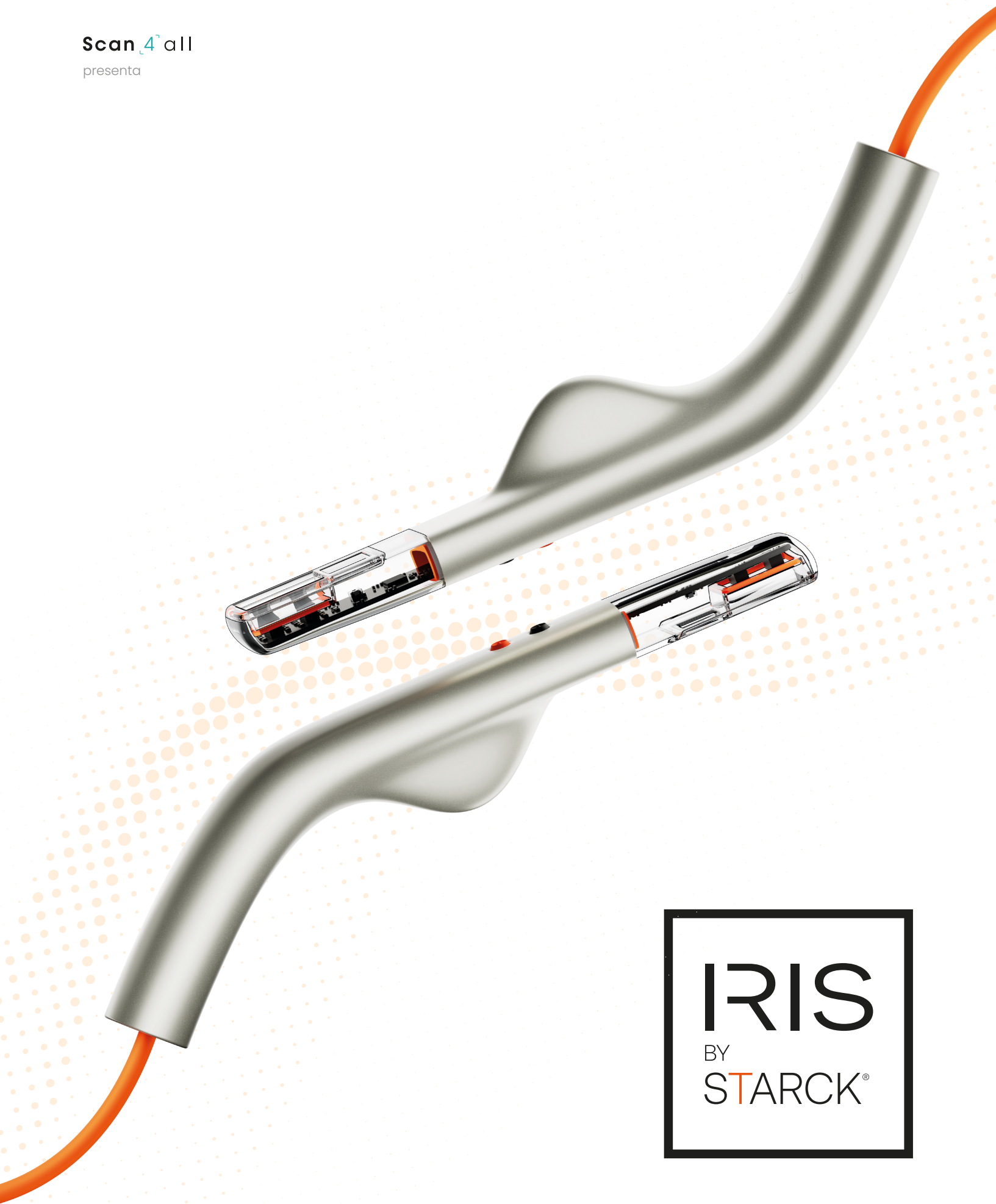

IRIS
BY
STARCK®

INSIDE / **Workflow libre**

EL WORKFLOW, UN RECORRIDO ADAPTADO



Editar la ficha protésica > Escaneo **maxilar** > Escaneo **mandibular** > Escaneo de **oclusión** > Envío del **pedido**.

El workflow corresponde a las diferentes etapas necesarias para enviar un pedido : desde la creación de la ficha protésica hasta el envío de los escaneos seleccionados.

SU TRAYECTORIA, SU AUTONOMÍA

En el workflow libre, cada etapa es independiente (al hacer clic en la franja). Usted es responsable de realizar los escaneos necesarios para completar un pedido después de haber rellenado una ficha protésica.



Implante IA disponible

En el workflow libre, la función de implante IA está disponible a través de las herramientas de escaneo y requiere introducir los implantes y los dientes afectados.



¿Por qué utilizar el workflow libre?

Usted sabe qué escaneos necesita.

- › Ha rellenado una ficha protésica y desea seleccionar usted mismo las arcadas que desea escanear.

Ya dispone de las impresiones necesarias.

- › Va a iniciar directamente su pedido gracias a los escaneos del historial del paciente.
- › Desea escanear una arcada adicional.
- › Solo necesita una oclusión y desea realizar la mordida.

OPTIMIZADO PARA EL TRABAJO COLABORATIVO

La función **DIRECT SCAN** es una función de workflow libre que permite iniciar un escaneo inmediatamente, sin necesidad de tener un pedido en curso.

DIRECT SCAN →



Escaneo **maxilar** > Escaneo **mandibular** > Escaneo de **oclusión**



Máximo ahorro de tiempo


A continuación, los escaneos se adjuntan a la ficha del paciente. El odontólogo puede completar la ficha protésica y finalizar el pedido más tarde.




Diseñado para el trabajo en equipo

Los asistentes dentales pueden escanear de forma totalmente autónoma. Solo hay que seleccionar la arcada o arcadas que se desean escanear.

FINALIZAR UN PEDIDO

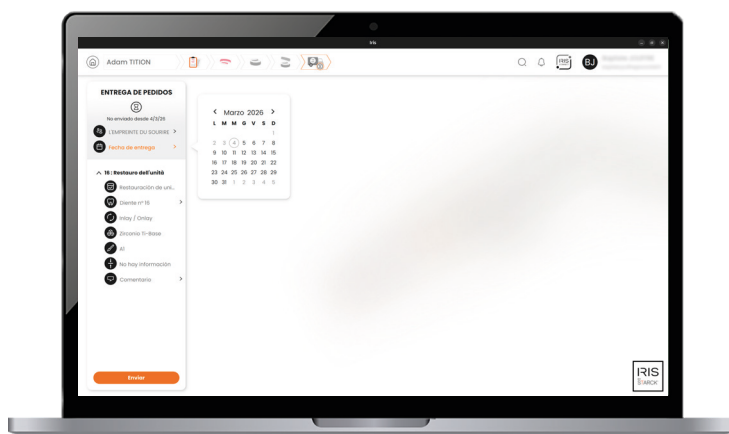

Después de guardar el escaneo en la ficha del paciente, seleccione la ficha del paciente y haga clic en la acción **DIRECT SCAN** en su historial.

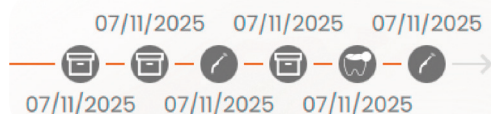

Elija el laboratorio que desee, rellene la ficha protésica y valide. Por último, haga clic en el paso "Entrega del pedido" y elija la fecha de entrega.



IRIS CONNECT le mantiene informado.

Fechas, intercambios, seguimiento: todo está centralizado y se actualiza al instante. Chatee directamente con los laboratorios desde la interfaz de IRIS CONNECT. Las notificaciones inteligentes le mantienen informado del progreso de los pedidos.

LLEGA MÁS LEJOS CON IRIS BY STARCK®.

Explora todos los recursos a tu disposición.

-  Inside / **Guía de inicio**
-  Inside / **Mis ajustes**
-  Inside / **DIRECT SCAN**
-  Inside / **Mi cuenta**
-  Inside / **Información del sistema**
-  Inside / **Herramientas relacionadas con el escaneo**
-  Inside / **IRIS Connect**
-  Inside / **Servicio postventa**
-  Inside / **Mis pedidos**
-  Inside / **Escaneo in tiempo real**
-  Inside / **Mis notificaciones**
-  Inside / **Especificaciones técnicas del ordenador**
-  Inside / **Mis socios**
-  Inside / **Workflow guiado**
-  Inside / **Mis pacientes**
-  Inside / **Workflow libre**



Acceder a toda la documentación.

Fabricante

Scan4all

Excelencia, para todos.

137 rue Garance 31670 Labège - FRANCE

N° SIRET 507 484 863 00059

 www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®

Dispositivo médico de clase 1 (DM) destinado a la odontología digital. CE.

Solo para profesionales sanitarios.

© Scan4all - Version 1.0 - 2026