


Scan 4 all
presenta

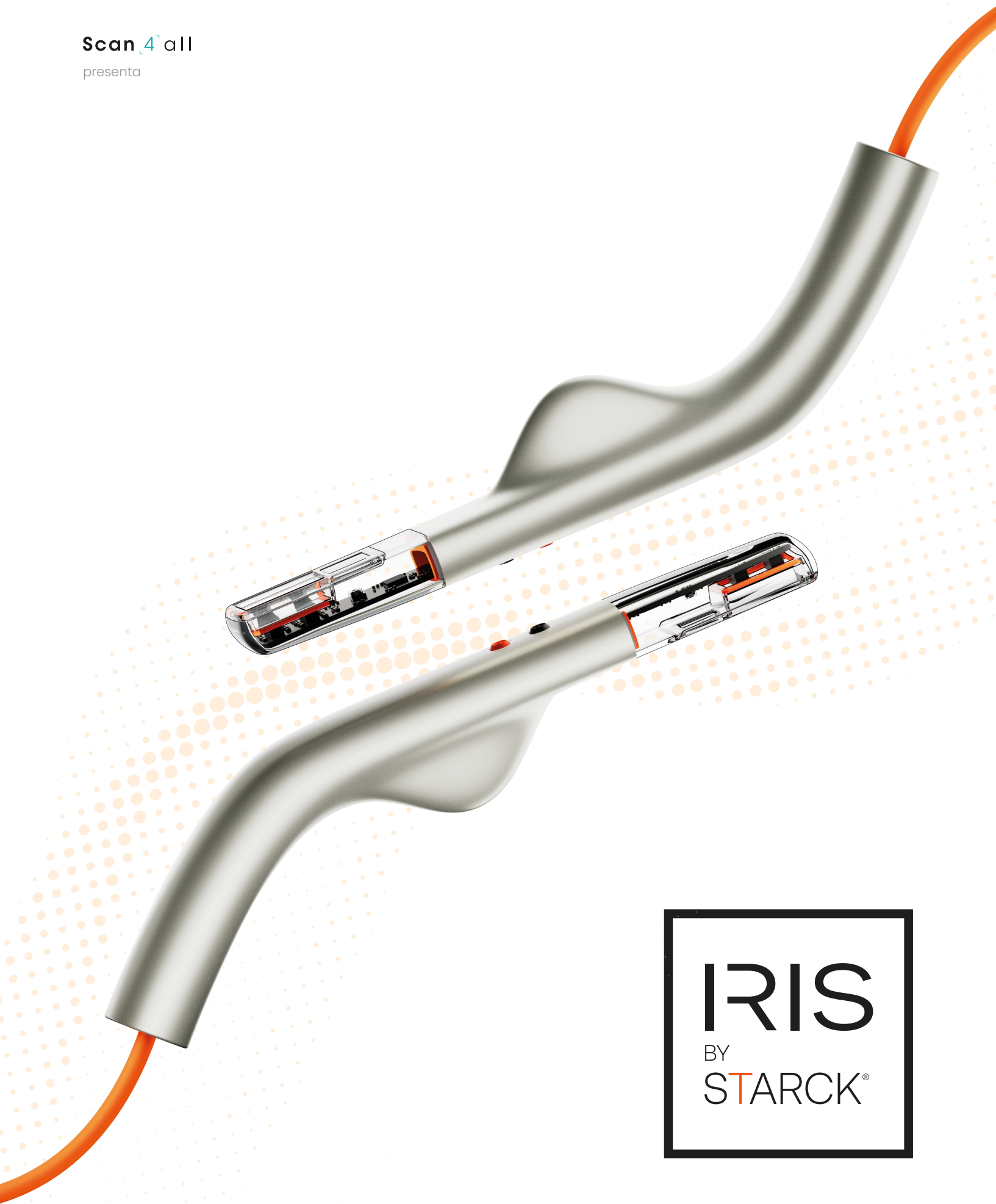

IRIS
BY
STARCK®

INSIDE / **Workflow libero**

IL WORKFLOW, UN PERCORSO ADATTATO



Modifica della scheda protesica ➤ Scansione **mascellare** ➤ Scansione **mandibolare** ➤ Scansione **dell'occlusione**
➤ Invio dell'**ordine**.

Il workflow corrisponde alle diverse fasi necessarie per l'invio di un ordine : dalla creazione della scheda protesica all'invio delle scansioni selezionate.

IL TUO PERCORSO, LA TUA AUTONOMIA

Nel workflow libero, ogni fase è indipendente (cliccando sulla barra temporale). Siete responsabili di eseguire le scansioni necessarie per un ordine completo dopo aver compilato una scheda protesica.



Impianto IA disponibile

Nel workflow libero, la funzione impianto IA è disponibile tramite gli strumenti di scansione e richiede l'inserimento degli impianti e dei denti interessati.



Perché utilizzare il workflow libero ?

Sapete di quali scansioni avete bisogno.

- › Hai compilato una scheda protesica e desideri selezionare tu stesso le arcate da scansionare.

Hai già le impronte necessarie.

- › Avete intenzione di inviare direttamente il vostro ordine utilizzando le scansioni registrate nella cronologia del paziente.
- › Desiderate scansionare un'arcata aggiuntiva.
- › Avete bisogno solo dell'occlusione e desiderate eseguire il morso.

OTTIMIZZATO PER LA COLLABORAZIONE

La funzione **DIRECT SCAN** è una funzionalità di workflow libero che consente di avviare immediatamente una scansione, senza bisogno di un ordine in corso.

DIRECT SCAN →



Scansione **mascellare** > Scansione **mandibolare** > Scansione **dell'occlusione**



Massimo risparmio di tempo


Le scansioni vengono quindi allegate alla scheda del paziente. Il medico può completare la scheda protesica e finalizzare l'ordine in un secondo momento.




Progettato per il lavoro di squadra

Gli assistenti dentali possono eseguire la scansione in completa autonomia. È sufficiente selezionare l'arcata o le arcate da scansionare.

COMPLETARE UN ORDINE

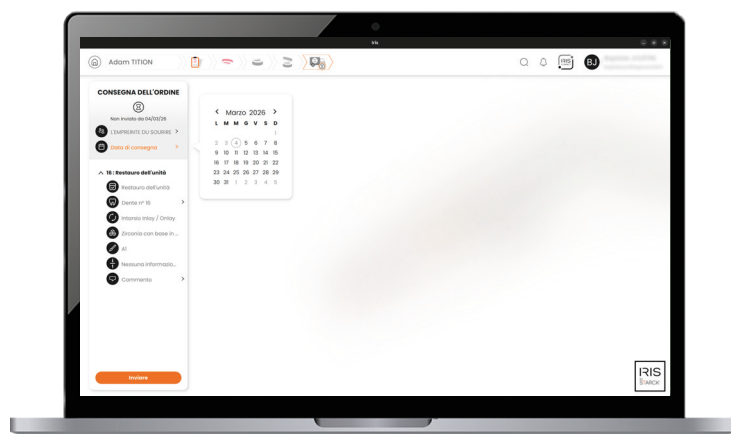

Dopo aver salvato la scansione sulla scheda paziente, selezionare la scheda paziente e cliccare sulla voce **DIRECT SCAN** nella sua cronologia.

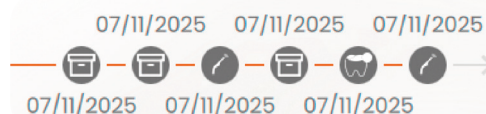

Scegli il laboratorio che preferisci, compila la scheda protesica e conferma. Infine, clicca sulla fase "Consegna ordine" e scegli la data di consegna.



IRIS CONNECT ti tiene informato.

Date, scambi, monitoraggio: tutto è centralizzato e aggiornato istantaneamente. Discuti direttamente con i laboratori dall'interfaccia IRIS CONNECT. Notifiche intelligenti ti tengono informato sullo stato di avanzamento degli ordini.

VAI OLTRE CON IRIS BY STARCK®.

Scopri tutte le risorse a tua disposizione.

IRIS
BY STARCK®



Inside / Guida introduttiva



Inside / Le mie impostazioni



Inside / DIRECT SCAN



Inside / Il mio account



Inside / Informazioni di sistema



Inside / Strumenti relativi alla scansione



Inside / IRIS Connect



Inside / SAV



Inside / I miei ordini



Inside / Scansione in tempo reale



Inside / Le mie notifiche



Inside / Specifiche tecniche del computer



Inside / I miei partner




Inside / Workflow guidato



Inside / I miei pazienti



Inside / Workflow libero

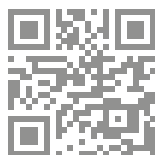

Accedere a tutta la documentazione.

Produttore

Scan4all

Eccellenza, per tutti.

137 rue Garance 31670 Labège - FRANCE

N° SIRET 507 484 863 00059

www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®

Dispositivo medico di classe I (DM) destinato all'odontoiatria digitale. CE.

Riservato esclusivamente agli operatori sanitari.

© Scan4all - Version 1.0 - 2026