


Scan 4 all


를 선보입니다

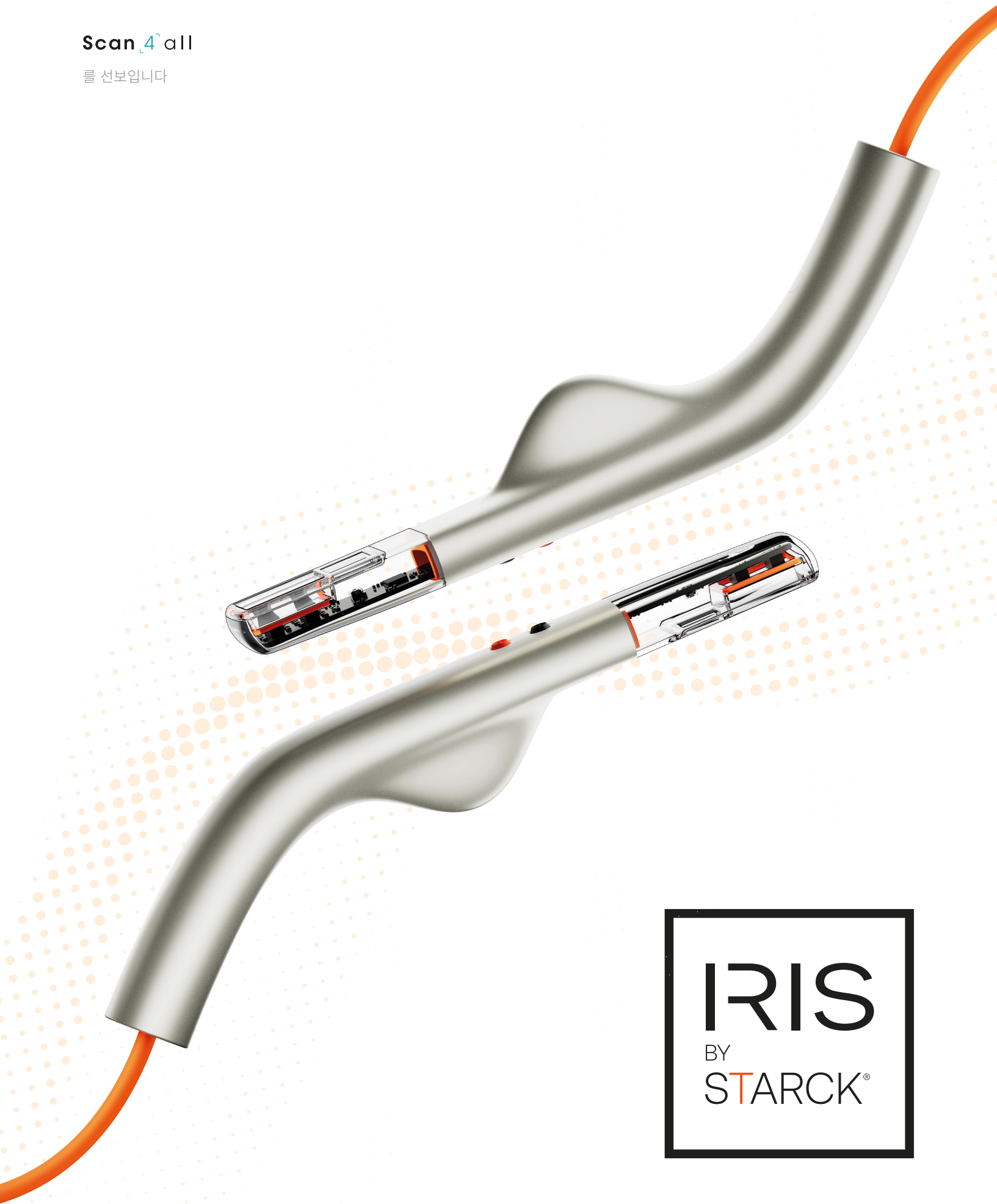

IRIS
BY
STARCK®

내부 / 개방형 워크플로우

워크플로우, 맞춤형 프로세스

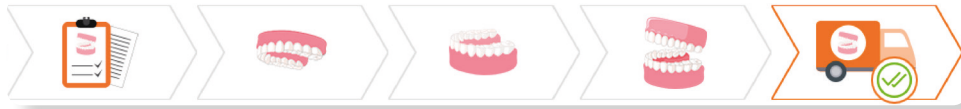


보철 파일 편집 > 상악 스캔 > 하악 스캔 > 교합 스캔 > 주문 전송.

이 워크플로우는 주문 전송에 필요한 여러 단계를 반영합니다: 보철 파일 생성부터 파일 생성부터 선택한 스캔 전송까지.

사용자만의 여정, 사용자 주도성

오픈 워크플로우에서는 각 단계가 독립적입니다(타임라인을 클릭할 때). 보철 양식을 작성한 후, 안전한 주문을 위해 필요한 스캔을 수행하는 것은 귀하의 책임입니다.

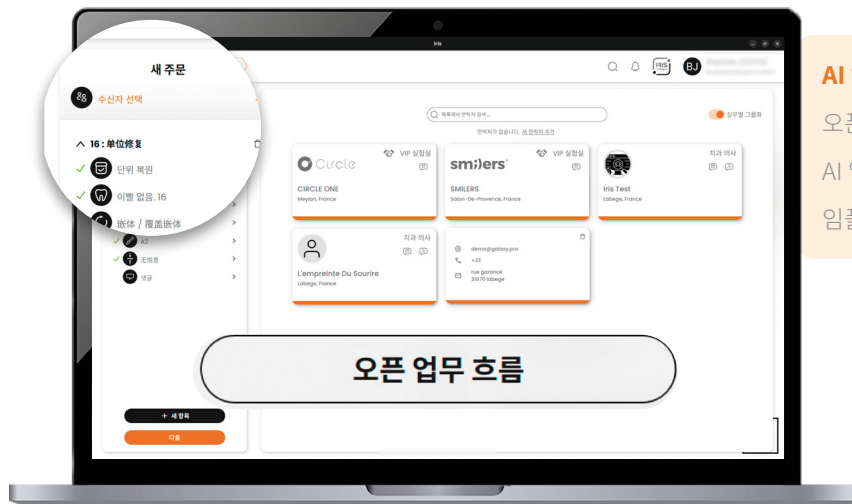

AI 임플란트 사용 가능

오픈 워크플로우에서는 스캔 도구를 통해 AI 임플란트 기능을 사용할 수 있으며, 관련 임플란트와 치아를 입력해야 합니다.

필요한 스캔을 이미 알고 계신 경우

- 보철 양식을 작성했으며 스캔할 아치를 직접 선택하고자 하는 경우.

필요한 인상 모형이 이미 준비되어 있습니다.

- 환자 이력에 있는 스캔을 사용하여 직접 주문을 진행할 예정입니다.
- 추가적인 아치를 스캔하고자 합니다.
- 교합 정보만 필요하여 교합 기록을 수행하고자 합니다.



왜 오픈 워크플로우를
사용해야 할까요?

협업을 위해 최적화됨

DIRECT SCAN 기능은 진행 중인 주문 없이도 즉시 스캔을 시작할 수 있는 개방형 워크플로우 기능입니다.

DIRECT SCAN →



상악 스캔 > 하악 스캔 > 교합 스캔




최대 시간 절약

스캔 데이터는 환자 파일에 첨부됩니다. 의료진은 보철 파일을 완성하고 나중에 주문을 확정할 수 있습니다.


응 팀워크를 위해 설계됨

치과 보조원도 독립적으로 스캔할 수 있습니다. 스캔할 아치를 선택하기만 하면 됩니다.

주문 확정

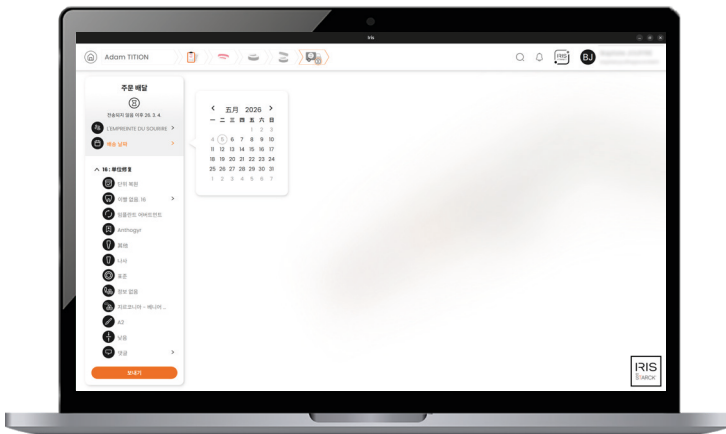

스캔 데이터를 환자 파일에 저장한 후, 해당 환자 파일을 선택하고 내역에서 'DIRECT SCAN' 절차를 클릭하십시오.

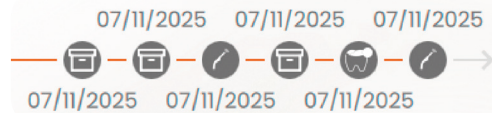

원하는 기공소를 선택하고, 보철 양식을 작성한 후 확인합니다. 마지막으로 «주문 발송» 단계를 클릭하고 배송 날짜를 선택합니다.



IRIS CONNECT가 최신 정보를 제공합니다.

날짜, 교환, 추적: 모든 정보가 중앙 집중화되어 즉시 업데이트됩니다. IRIS BY STARCK[®] CONNECT 인터페이스에서 실험실과 직접 채팅하세요. 스마트 알림을 통해 주문 진행 상황을 실시간으로 확인하세요.

IRIS BY STARCK®와 함께 더 많은 기능을 경험해 보세요.

이용 가능한 모든 리소스를 살펴보세요.

 내부 / 시작 가이드

 내부 / 내 설정

 내부 / DIRECT SCAN

 내부 / 내 계정

 내부 / 시스템 정보

 내부 / 스캔 관련 도구

 내부 / IRIS Connect

 내부 / SAV

 내부 / 내 주문

 내부 / 실시간 스캔

 내부 / 내 알림

 내부 / 컴퓨터 기술 사양

 내부 / 내 파트너

 내부 / 가이드형 워크플로우

 내부 / 내 환자

 내부 / 자유형 워크플로우



전체 문서를 확인하십시오.

제조업체

Scan4all

모두를 위한 탁월함.

137 rue Garance 31670 Labège - 프랑스

N° SIRET 507 484 863 00059

www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®
디지털 치과용 1등급 의료기기(MD).
의료 전문가 전용.
© Scan4all - 버전 1.0 - 2026