



Scan⁴all
präsentiert

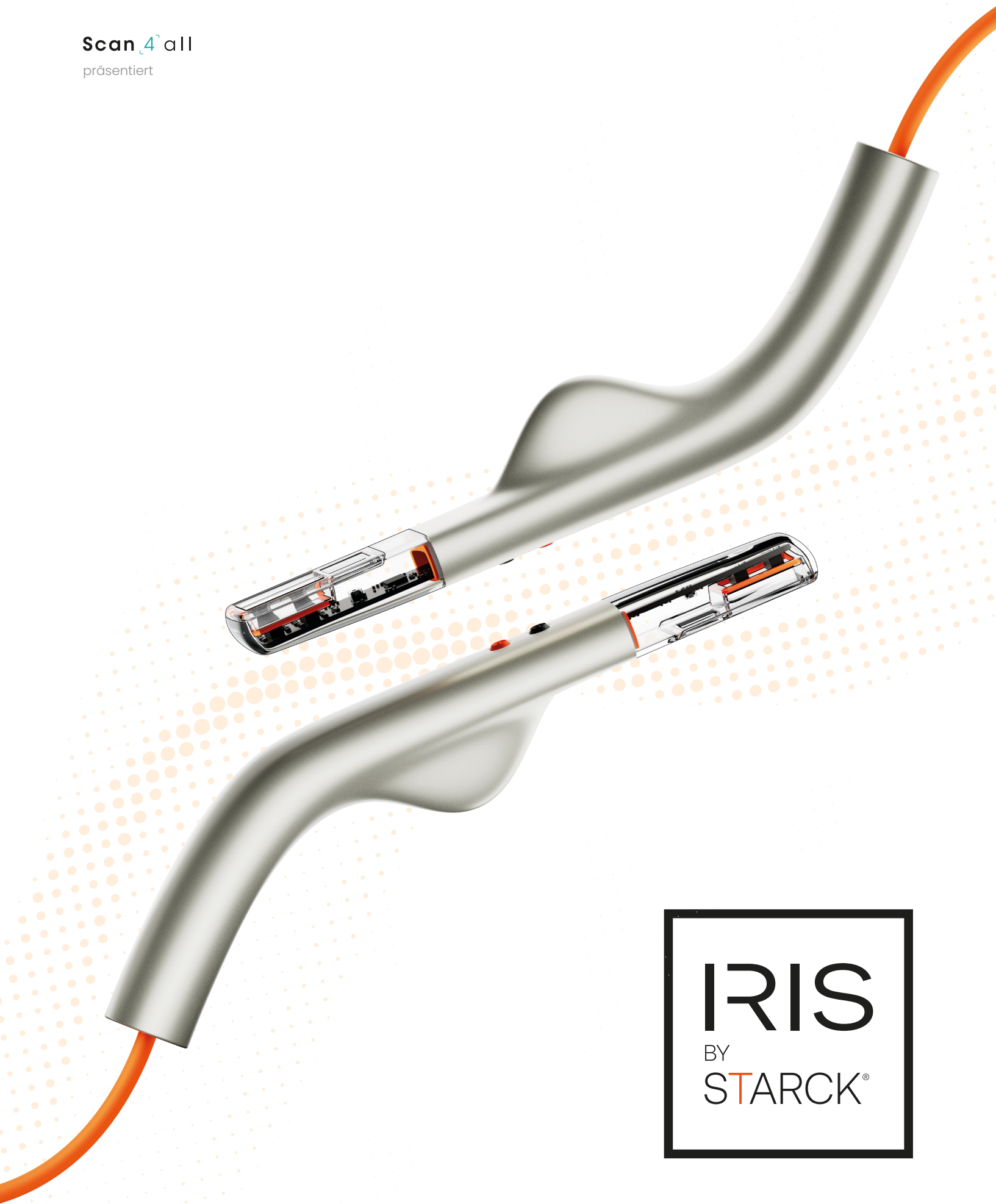

INSIDE / **Meine Partner**

EIN VERNETZTES UMFELD

IRIS BY STARCK® ermöglicht Ihnen die Zusammenarbeit mit verschiedenen Arten von Partnern, um die Verwaltung Ihrer Bestellungen und Ihres Datenaustauschs zu vereinfachen.

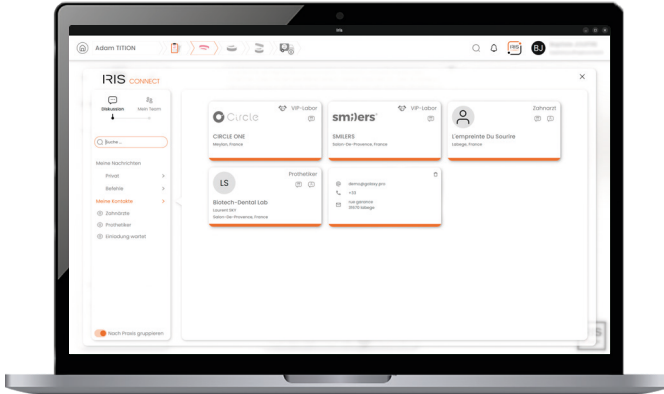

Je nach Bedarf können Sie :

- › Ihre eigenen Kontakte einladen,
- › eine Partner-Software anbinden,
- › Ihre Daten automatisch mit bestimmten kompatiblen Diensten synchronisieren.

Wie verbinde ich mich mit meinen Partnern ?

Über IRIS CONNECT (laden Sie Ihre eigenen Kontakte ein)

Die Kontakte entsprechen den Partnern, die Sie über das IRIS CONNECT-Verzeichnis hinzufügen/einladen möchten.

Sie können Ihren Kontakt nicht finden?


Eine Einladung per E-Mail versenden ✓

Einladen

Nutzen Sie in IRIS CONNECT das Suchfeld, um einen Mitarbeiter schnell zu finden. Wenn er nicht im IRIS-Verzeichnis aufgeführt ist, geben Sie seine E-Mail-Adresse ein, um ihn einzuladen. Er erhält einen Registrierungslink mit einem einmaligen Sicherheitscode, um sein Webkonto auf www.irisbystarck.com zu erstellen.

Sobald diese Kontakte angelegt sind, können sie Ihre Bestellungen empfangen und direkt über IRIS CONNECT per Nachricht mit Ihnen interagieren. Sie können auch auf die spezielle Weboberfläche zugreifen, über die sie die an www.irisbystarck.com übermittelten Anfragen einsehen, verfolgen und bearbeiten können.


Über Kopplung (Verbindung mit unserer Partner-Software herstellen)

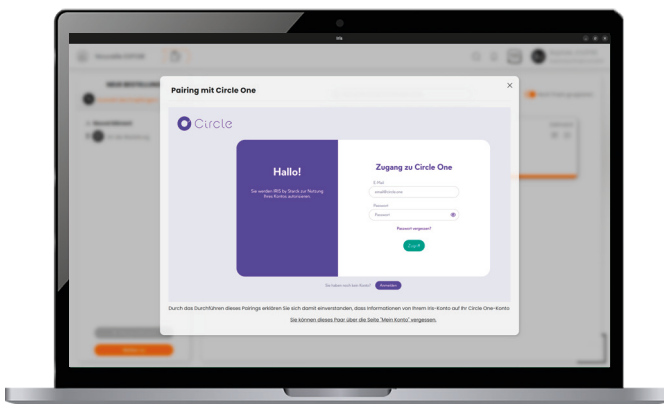

Wenn Sie über ein Konto bei einem der in IRIS BY STARCK® integrierten Partner verfügen (z. B. SMILERS, CIRCLE usw.): Sie können Ihre Bestellung direkt über Ihr Konto bei diesem Partner senden.

Klicken Sie beim Erstellen einer Bestellung und bei der Partnerauswahl auf die Karte dieses Partners und folgen Sie den Anweisungen, um die Kopplung durchzuführen.

Über Datensynchronisation (LaGalaxy von BIOTECH DENTAL)

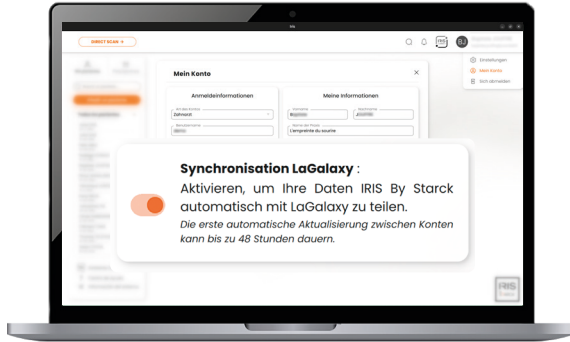


Alle Ihre Bestelldaten werden automatisch zwischen IRIS BY STARCK® und dem Partnerdienst – wie LaGalaxy – synchronisiert, wodurch eine kontinuierliche Aktualisierung der Daten gewährleistet ist. Weitere Informationen unter www.biotechgalaxy.com

LaGalaxy
By Biotech Dental



So löschen Sie einen Partner ?

Über das IRIS CONNECT-Verzeichnis

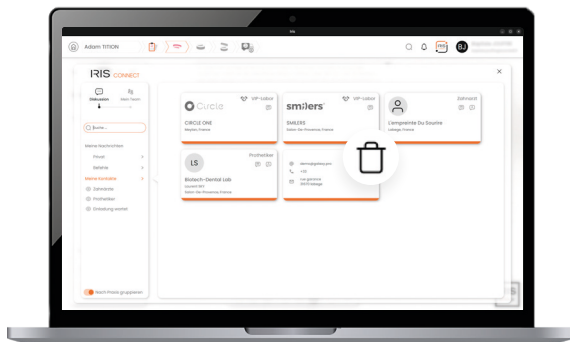


Sie können einen Kontakt direkt über **IRIS CONNECT > Meine Kontakte** löschen, indem Sie auf das "Papierkorb"-Symbol in dessen Kontaktdatenblatt klicke.

Bei gekoppelten Partner-Softwareprogrammen von Drittanbietern



Gehen Sie zu **Mein Konto > Partnerkonten** verwalten und klicken Sie auf "Vergessen Sie", um die Kopplung mit einem Partnerdienst aufzuheben.

Bei synchronisierten Softwareprogrammen (LaGalaxy)

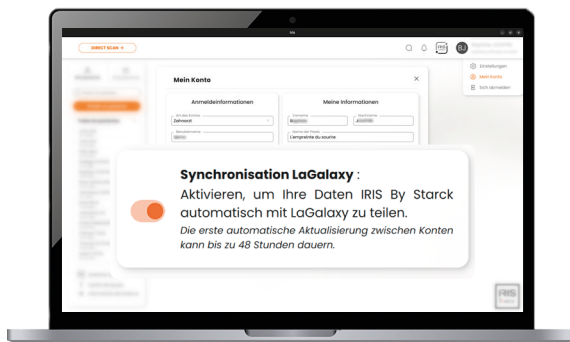

Die Deaktivierung der Synchronisierung kann jederzeit über **Mein Konto** erfolgen, indem Sie auf den zugehörigen Partnerdienst zugreifen.

Durch die Entkopplung wird die Datensynchronisation beendet und die Berechtigungen, die Sie dem Dienst erteilt hatten, werden aufgehoben.

MIT IRIS BY STARCK® NOCH WEITER KONNEN.

Entdecken Sie alle Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen.



Inside / **Einführungshandbuch**



Inside / **Meine Einstellungen**



Inside / **DIRECT SCAN**



Inside / **Mein Konto**



Inside / **Systeminformationen**



Inside / **Tools rund um den Scan**



Inside / **IRIS Connect**



Inside / **Kundendienst**



Inside / **Meine Bestellungen**



Inside / **Echtzeit-Scan**



Inside / **Meine Benachrichtigungen**



Inside / **Computerspezifikationen**



Inside / **Mein Partner**




Inside / **Geführter Workflow**



Inside / **Meine Patienten**



Inside / **Offener workflow**

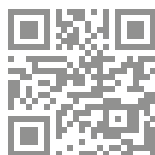

Auf die gesamte
Dokumentation
zugreifen.

Hersteller

Scan4all

Exzellenz, für alle.

137 rue Garance 31670 Labège - FRANCE

N° SIRET 507 484 863 00059

www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®

Medizinisches Gerät der Klasse I (MD) für die digitale Zahnmedizin. CE.

Nur für medizinisches Fachpersonal.

© Scan4all - Version 1.0 - 2026