

IRIS^{BY STARCK®} DESINFECÇÃO.


Sua peça de mão IRIS BY STARCK® possui classificação IP 67 (à prova d'água).
Você pode desinfetá-la **por imersão**.

O **produto de desinfecção escolhido** deve possuir a marcação CE de classe IIb, atender aos requisitos normativos e regulamentares e respeitar as características da peça de mão:

- ✓ **Em conformidade:** ácido peracético.
- ✗ **Não compatível:** presença de amônio, fenol, acetona, cloreto ou compostos de brometo.

💡 *Você pode utilizar a base de desinfecção IRIS BY STARCK®.*

PRÉ-DESINFECÇÃO

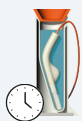

Respeite o tempo de imersão para a pré-desinfecção recomendado pelo seu produto.

1



Limpe para **remover eventuais resíduos** de sujeira.


2



Enxágue abundantemente com água estéril ou filtrada.

3

DESINFECÇÃO TOTAL

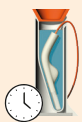

Respeite o tempo de imersão para desinfecção recomendado pelo fabricante do produto.

1



Enxágue abundantemente com água estéril ou filtrada.

2



Seque cuidadosamente com um pano de microfibra.

3



Inspeccione o vidro de safira.

Remova todos os resíduos na frente dos sensores com um pano de microfibra.

*Marcação CE de classe IIb; Norma de bactericida NF EN 13727, NF EN 14561, BMR de acordo com a EN 13727; Norma de fungicida/levuricida: NF EN 13624, NF EN 14562; Norma de virucida: NF EN 14476: ativo contra HIV-1, PRV (vírus modelo HBV), Herpesvirus, BVDV (vírus modelo HCV) e vírus da vacína; Norma de micobactericida: NF EN 14348, NF EN 14563. Não desinfete sua peça de mão em autoclave nem em banho de ultrassom.