

IRIS[®] BY STARCK[®] DESINFEKTION.


Ihr IRIS BY STARCK[®]-Handstück entspricht der Schutzklasse IP 67 (wasserdicht).
Sie können es **durch Einweichen** desinfizieren.

Das gewählte Desinfektionsmittel muss die CE-Kennzeichnung der Klasse IIb aufweisen, den normativen und behördlichen Anforderungen entsprechen und mit den Eigenschaften des Handstücks vereinbar sein:

- ✓ **Konform** : Peressigsäure.
- ✗ **Nicht konform** : Vorhandensein von Ammonium, Phenol, Aceton, Chlorid oder Bromidverbindungen.

💡 Sie können die IRIS BY STARCK[®]-Desinfektionsstation verwenden.

VORDESINFEKTION

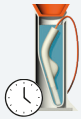

Halten Sie die vom Hersteller Ihres Desinfektionsmittels **empfohlene Einweichzeit** für die Vor-desinfektion ein.

1



Reinigen Sie das Handstück, **um eventuelle Rückstände zu entfernen.**


2



Spülen Sie es gründlich mit sterilem oder gefiltertem Wasser **ab.**

3

VOLLSTÄNDIGE DESINFEKTION

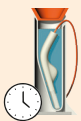

Halten Sie die vom Hersteller **empfohlene Einweichzeit** für die Desinfektion ein.

1



Spülen Sie es gründlich mit sterilem oder gefiltertem Wasser **ab.**

2



Sorgfältig mit einem Mikrofasertuch **trocknen.**

3



Die Saphirscheibe überprüfen.

Alle Spuren vor den Sensoren mit einem Mikrofasertuch **entfernen.**

*CE-Kennzeichnung der Klasse IIb; Normen zur bakteriziden Wirksamkeit: NF EN 13727, NF EN 14561, BMR gemäß EN 13727; Norm zur Fungizid-/Hefeababtötung: NF EN 13624, NF EN 14562; Norm zur Viruzidwirkung: NF EN 14476: wirksam gegen HIV-I, PRV (HBV-Modellvirus), Herpesvirus, BVDV (HCV-Modellvirus) und Vaccinia-Virus; Norm für Mykobakterizidie: NF EN 14348, NF EN 14563. Desinfizieren Sie Ihr Handstück weder im Autoklav noch in einem Ultraschallbad.