

IRIS BY STARCK® DESINFECCIÓN.


Tu pieza de mano IRIS BY STARCK® cumple con la norma IP 67 (resistente al agua).
Puedes desinfectarla **por inmersión**.

El producto desinfectante elegido debe contar con el marcado CE de clase IIb, cumplir con los requisitos normativos y reglamentarios, y respetar las características de la pieza de mano :

- ✓ **Conforme:** ácido peracético.
- ✗ **No compatible:** presencia de amonio, fenol, acetona, cloruro o compuestos de bromuro.

Puede utilizar la base de desinfección IRIS BY STARCK®.

DESINFECCIÓN PREVIA

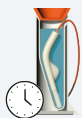

Respete el tiempo de inmersión para la desinfección previa recomendado por el fabricante de su producto.

1



Limpie para **eliminar cualquier resto de suciedad**.

2



Enjuague abundantemente con agua estéril o filtrada.

3

DESINFECCIÓN TOTAL



Respete el tiempo de inmersión para la desinfección recomendado por el fabricante del producto.

1



Enjuague abundantemente con agua estéril o filtrada.

2



Secar cuidadosamente con un paño de microfibra.

3



Inspeccionar el cristal de zafiro.

Eliminar cualquier resto de suciedad delante de los sensores con un paño de microfibra.

*Marcado CE de clase IIb; Norma de bactericidicidad NF EN 13727, NF EN 14561, BMR según EN 13727; Norma de fungicida/levuricida: NF EN 13624, NF EN 14562; Norma de virucida: NF EN 14476: activo contra el VIH-1, el PRV (virus modelo del VHB), el herpesvirus, el BVDV (virus modelo del VHC) y el virus de la vacuna; Norma de micobactericida: NF EN 14348, NF EN 14563. No desinfecte su pieza de mano en autoclave ni en una cuba de ultrasonidos.