

IRIS BY STARCK® DÉSINFECTION.

Votre pièce à main IRIS BY STARCK® est IP 67 (étanche).


Vous pouvez la désinfecter **par trempage**.

Le produit de désinfection choisi doit posséder le marquage CE de classe IIb, répondre aux exigences normatives, réglementaires et respecter les caractéristiques de la pièce à main :

- ✓ **Conforme** : acide peracétique.
- ✗ **Non-conforme** : présence d'ammonium, de phénol, d'acétone, de chlorure ou de composants bromure.

💡 Vous pouvez utiliser le socle de désinfection IRIS BY STARCK®.

PRÉ-DÉSINFECTION

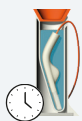

Respecter le temps d'immersion de pré-désinfection, conseillé par votre produit.

1



Nettoyer afin de **retirer les éventuelles souillures** résiduelles.


2



Rincer abondamment avec une eau stérile ou filtrée.

3

DÉSINFECTION TOTALE

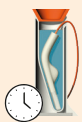

Respecter le temps d'immersion de désinfection, conseillé par votre produit.

1



Rincer abondamment avec une eau stérile ou filtrée.

2



Sécher soigneusement avec un tissu microfibre.

3



Inspecter la vitre saphir.

Enlever toutes traces devant les capteurs à l'aide d'un tissu microfibre.

*Marquage CE de classe IIb ; Norme de bactéricidie NF EN 13727, NF EN 14561, BMR selon EN 13727 ; Norme de fongicidie/levuricidie : NF EN 13624, NF EN 14562 ; Norme de virucidie : NF EN 14476 : actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), Herpesvirus, BVDV (virus modèle HCV) et Vaccinia virus ; Norme de mycobactéricidie : NF EN 14348, NF EN 14563. Ne pas désinfecter votre pièce à main en autoclave ni dans une cuve à ultrasons.