

IRIS^{BY STARCK®} DISINFEZIONE.


Il vostro manipolo IRIS BY STARCK® è classificato IP 67 (impermeabile).
È possibile disinfettarlo **mediante immersione**.

Il **prodotto disinfettante scelto** deve recare il marchio CE di classe IIb, soddisfare i requisiti normativi e regolamentari e rispettare le caratteristiche del manipolo:

- ✓ **Conforme** : acido peracetico.
- ✗ **Non-conforme** : presenza di ammonio, fenolo, acetone, cloruro o componenti bromurati.

💡 È possibile utilizzare la base di disinfezione IRIS BY STARCK®.

PRE-DISINFEZIONE

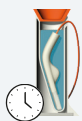

Rispettare il tempo di immersione per la pre-disinfezione consigliato dal prodotto utilizzato.

1



Pulire per **rimuovere eventuali residui** di sporco.


2



Risciacquare abbondantemente con acqua sterile o filtrata.

3

DISINFEZIONE TOTALE

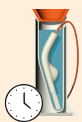

Rispettare il tempo di immersione per la disinfezione consigliato dal produttore del prodotto.

1



Risciacquare abbondantemente con acqua sterile o filtrata.

2



Asciugare accuratamente con un panno in microfibra.

3



Ispezionare il vetro zaffiro.

Rimuovere ogni traccia davanti ai sensori utilizzando un panno in microfibra.

*Marcatura CE di classe IIb; Norma di battericidicità NF EN 13727, NF EN 14561, BMR secondo EN 13727; Norma di fungicida/levuricida: NF EN 13624, NF EN 14562; Norma di virucida: NF EN 14476: attivo su HIV-1, PRV (virus modello HBV), Herpesvirus, BVDV (virus modello HCV) e Vaccinia virus; Norma di micobattericida: NF EN 14348, NF EN 14563. Non disinfettare il manipolo in autoclave né in una vasca a ultrasuoni.