

IRIS BY STARCK® 소독.

IRIS BY STARCK® 핸드피스는 IP 67 등급(방수)입니다.

침지 방식으로 소독할 수 있습니다.


선택한 소독제는 CE 마크(클래스 IIb)를 보유하고 있어야 하며, 관련 표준 및 규제 요건을 충족하고 핸드피스의 특성을 준수해야 합니다:

✓ **적합:** 과아세트산.

✗ **부적합:** 암모늄, 페놀, 아세톤, 염화물 또는 브롬화물 성분이 포함된 경우.

💡 IRIS BY STARCK® 소독 거치대를 사용할 수 있습니다.

사전 소독

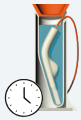

사용 중인 소독제가 권장하는 사전 소독 침지 시간을 준수하십시오.



잔여 오염물이 있을 경우 세척하여 제거하십시오.




멸균수 또는 여과수로 충분히 행구십시오.

1

2

3

완전 소독

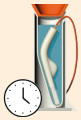

제품에서 권장하는 소독 침지 시간을 준수하십시오.



멸균수 또는 여과수로 충분히 행구십시오.



마이크로파이버 천으로 꼼꼼히 말리십시오.

1

2

3



사파이어 유리를 점검하십시오.

마이크로파이버 천을 사용하여 센서 앞의 모든 이물질을 제거하십시오.

*IIb 등급 CE 마크; 살균 표준 NF EN 13727, NF EN 14561, EN 13727에 따른 BMR; 곰팡이 및 효모 살균 기준: NF EN 13624, NF EN 14562; 바이러스 살균 기준: NF EN 14476: HIV-1, PRV(HBV 모델 바이러스), 헤르페스바이러스, BVDV(HCV 모델 바이러스) 및 백신 바이러스에 대해 효능이 있음; 마이코박테리아 살균 기준: NF EN 14348, NF EN 14563. 핸드피스를 오토클레이브나 초음파 세척기에서 소독하지 마십시오.